

ELEERA

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



**Инфракрасный
термометр**

АОJ-20А

elera.ru

Как установить режим звука вкл/выкл?

1. Держите термометр включенным.
2. Удерживайте кнопку включения питания в течение 5 секунд, чтобы переключить режим вкл/выкл звука. В режиме отключения звука будет отображаться значок.



Как установить единицу измерения?

1. Открыть крышку батарейного отсека.
2. Используйте тумблер, чтобы изменить F/C.



Описание дисплея:





Как просматривать историю измерений?

1. Держите термометр включенным.
2. Нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 5 секунд.
3. Нажмите кнопку режима еще раз, чтобы по одному проверить 40 предыдущих измерений.



Инфракрасный термометр АОJ-20А.

- 1** Обратите внимание, что при непрерывном измерении датчик нагревается, что делает показания неточными. Чтобы получить точную температуру, подождите около 10 секунд между каждым измерением.
- 2** При измерении температуры лба держите устройство на расстоянии 0-3 см.
- 3** Измерьте температуру лба в нужном месте: центр лба.

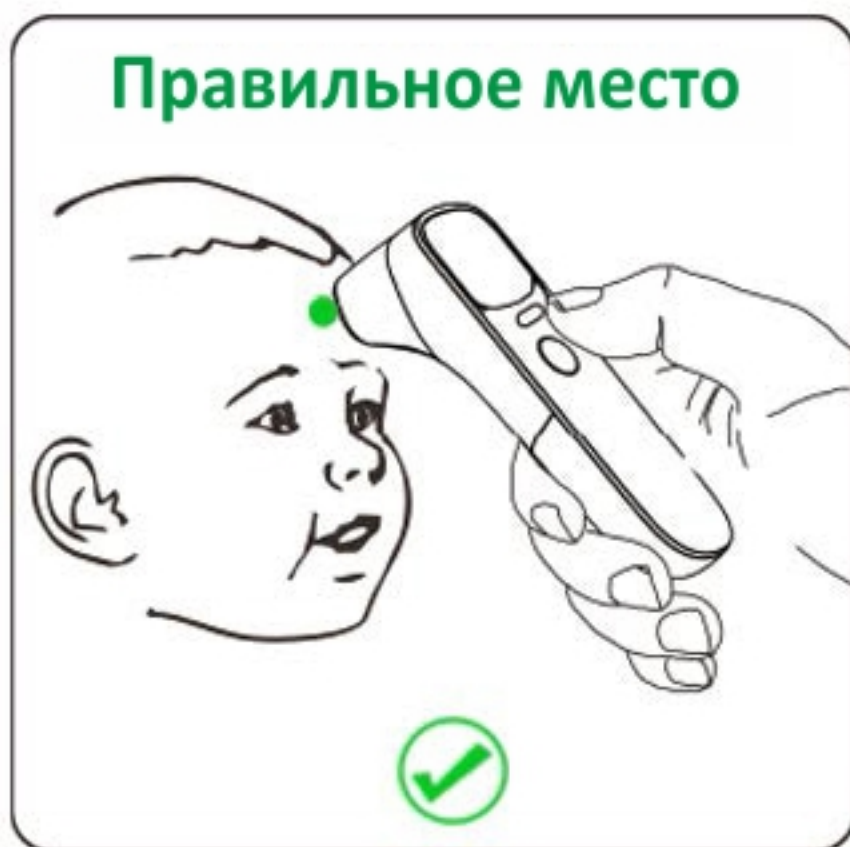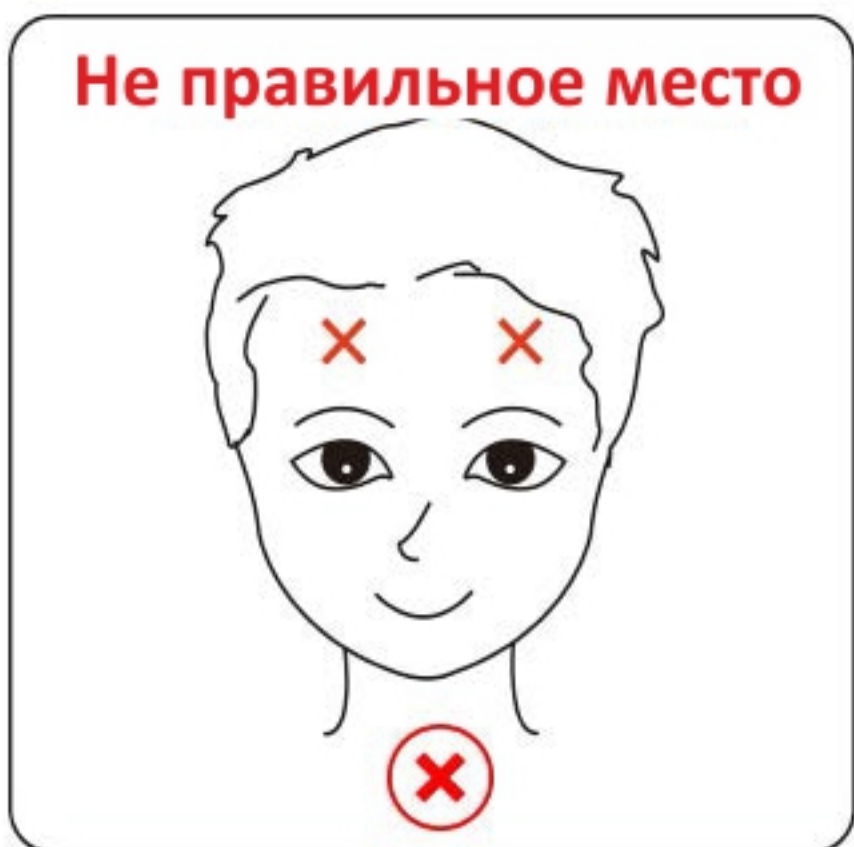

Измерение температуры лба:





ВКЛЮЧИТЬ
ПИТАНИЕ

Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.



выбрать режим

Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать его (взрослый  ребенок )



Направьте устройство в центр лба, держите на расстоянии 0-3 см.



измерить

Нажмите кнопку и измерьте температуру.

Измерение температуры уха:



1
Снимите крышку с устройства.




2
Нажмите кнопку питания, чтобы включить аппарат.



3
Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать режим.



4
Нажмите на кнопку и измерьте температуру.

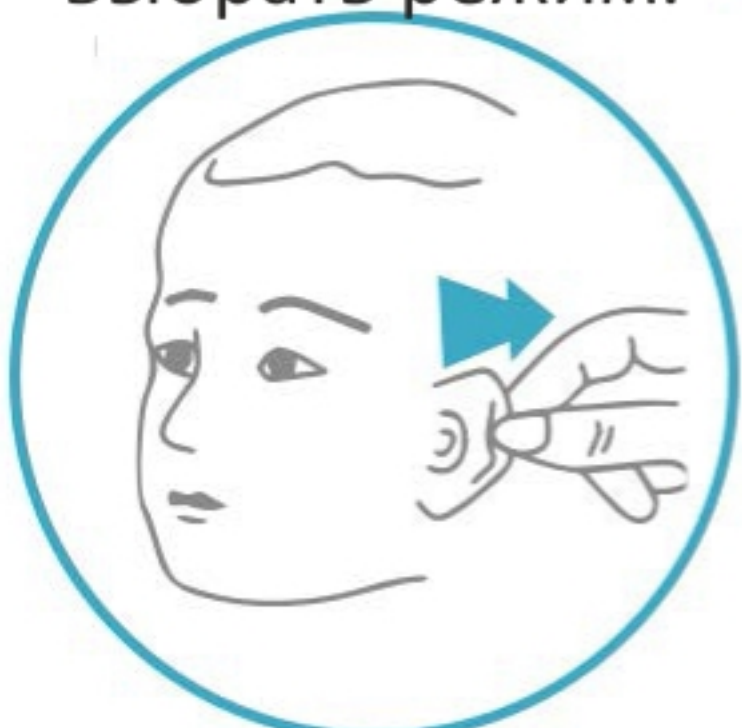

* Дети до 1 года:
потяните ухо
прямо назад.



* В возрасте от 1 года
до взрослого:
потяните ухо
вверх.