

ТРАНСПОРТИРОВКА:
Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:
Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал: АВС-пластик, металл, текстиль.
Цвет: серый
Входное напряжение: 110В-220В
Мощность: 60 Вт.
Частота: 50-60 Гц.
Вес: 4.35 кг.
Комплектация: массажер – 1 шт., инструкция.

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	вилка не плотно подключена к розетке	вставьте вилку правильно

BRADEx™
Health & Beauty



KZ 0556
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0568
ВИБРОМАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА
БЕСПРОВОДНОЙ
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙ ЧИ
И ШИАЦУ МАССАЖА

KZ 0561
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»



KZ 0571
МАССАЖНАЯ НАКИДКА
С ПОДОГРЕВОМ

KZ 0567
МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
С ДИСПЛЕЕМ
И 7 СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

KZ 0570
МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ
С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА
ГУАША ASIA SPA

BRADEx™
Health & Beauty

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙСКОГО МАССАЖА
СЕН СИП

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 0569



Премиальный массажер для ног с возможностью выбора вида массажа, аэрокомпрессии и прогрева воздействует на рефлекторные зоны стоп и способствует улучшению кровообращения, а также снятию напряжения, мышечной боли в ногах и усталости после физических нагрузок. Сен Сип - это 10 линий жизненной энергии, акупрессура которых вызывает терапевтический эффект. Режим ионизации воздуха делает процесс массажа еще более комфортным.

- ПРЕИМУЩЕСТВА:**
1. Максимально удобная регулировка интенсивности массажа.
 2. Возможность индивидуальной настройки.
 3. Универсальный массажер для всей семьи с множеством функций:
 - 3.1. Функция прогрева;
 - 3.2. Функция аэрокомпрессии;
 4. Режим ионизации;
 5. Автовыключение.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
Товар не является медицинским изделием.
Разработан для расслабляющего массажа.
Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**
- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
 - Храните вдали от нагревательных приборов.

- ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**
- Использовать только для массажа ног.
 - Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
 - Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
 - Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
 - Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
 - Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
 - Не тяните за шнур.
 - Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
 - Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
 - Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.
 - Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки.
 - Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
 - Не используйте в ванной комнате.
 - Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
 - Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
 - Не стойте, не сидите на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
 - Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
 - Будьте аккуратны при использовании прогрева.
 - Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
 - При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.

- ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:**
1. Съемные чехлы для ног
 2. Панель управления
 3. Корпус массажера

Панель управления:

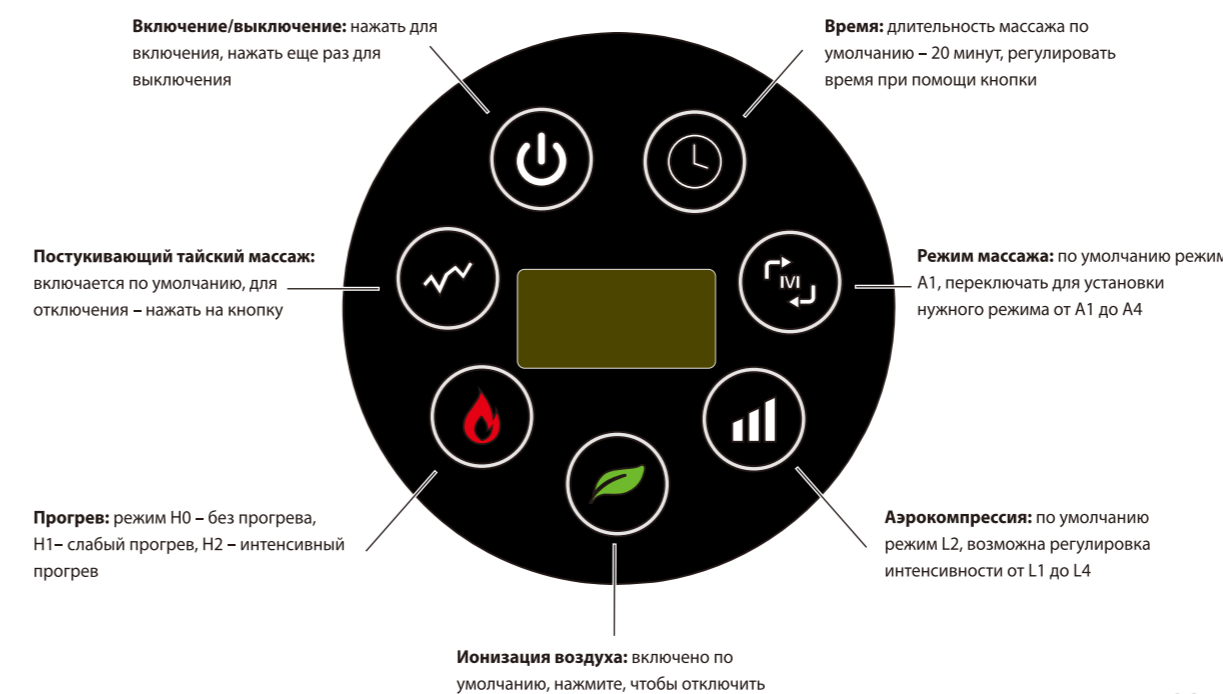

ПОДГОТОВКА:
Установите массажер на пол перед креслом или стулом.
Сядьте на кресло, вставьте ступни в массажер.
Не вставляйте на ролики или корпус массажера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Вставьте вилку в розетку, дисплей будет отключен.
- Кнопка включения: нажмите для начала работы, нажмите еще раз для отключения. Режим по умолчанию: режим массажа А1, интенсивность компрессии L2, время 20 минут, прогрев Н1, роликовый массаж, очищение воздуха и подсветка включены.
- Постукивающий тайский массаж включен по умолчанию, нажмите еще раз, чтобы отключить. Массаж осуществляется под вашими ступнями и снимает мышечное напряжение ног.
- Прогрев: режим по умолчанию Н1, режим регулируется с Н0 до Н2. Прогрев ног улучшает кровообращение, сон, а также способствует снятию боли в ногах.
- Ионизация воздуха: включено по умолчанию, нажмите, чтобы выключить. Встроенная технология ионизации воздуха освежает и удаляет возможный неприятный запах.
- Компрессия: L2, регулируйте интенсивность компрессии от L1 (слабая) до L4 (сильная). Начните с L1 и увеличивайте при необходимости.
- Режим массажа: по умолчанию А1, регулируйте от А1 до А4.

Режимы представляют из себя комбинации разминающего, роликового, постукивающего массажа, а также компрессии и прогрева. Попробуйте разные режимы для комфортной настройки массажа.
• Таймер: длительность массажа по умолчанию 20 минут, регулируйте время массажа от 5 до 30 минут. Каждое нажатие кнопки добавляет 5 минут.
• Когда массаж окончен, дисплей отключится, можно вынуть вилку из розетки.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:
Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте.
Избегайте контакта с острыми предметами.
Не наматывайте провод на массажер, чтобы избежать повреждений.
Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

- Отключите от розетки.
- Расстегните молнию на съемных чехлах, постирайте, верните на место после полного высыхания.
- При загрязнении на корпусе протрите мягкой слегка влажной тряпочкой.
- Если не используете массажер, храните его в сухом прохладном месте.
- Избегайте попадания воды.
- Не погружайте в воду.
- Не используйте абразивные чистящие средства и щетки, которые могут поцарапать корпус массажера.