

НАБОР МЕЗОРОЛЛЕРОВ 6 в 1

NACOMI



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

KZ 0659

Показания к применению

- анти-эйдж уход
- коррекция мелких и глубоких морщин лица
- коррекция растяжек
- коррекция рубцов и шрамов
- коррекция следов от акне



1200 игл: 1.5 мм (для тела)



720 игл: 1.0 мм (для лица)



300 игл: 0.5 мм
(для области вокруг глаз)



мезоштамп 12 игл: 2,0 мм
(для проработки глубоких
шрамов и следов от акне)

Подготовка к процедуре

Перед применением промойте насадку мезороллера в теплой мыльной воде, проведите дезинфекцию с хлоргексидином или спиртовым раствором в специальной емкости (входит в набор), оставьте на несколько минут, достаньте, просушите.

Соберите мезороллер – наденьте нужную вам насадку на пластиковую рукоятку.

Используйте насадку для определенного участка кожи.

Очистите кожу при помощи косметических средств, для лучшего очищения используйте щеточку.


Рекомендуется нанести на кожу сыворотку, гель или коктейль (например, мезококтейль с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой) небольшими участками и работать по влажной поверхности.

Избегая волнообразных или круговых движений, проведите мезороллером сначала в вертикальном направлении, потом в горизонтальном и по диагонали 10-12 раз на каждом участке кожи. Не давите на кожу слишком сильно.

Покраснения кожи должны исчезнуть через 1-3 часа, поэтому рекомендуется делать процедуру вечером или когда нет необходимости выходить из дома.

Сразу после использования нанесите успокаивающую маску на 15-20 минут.

После использования проведите очистку и дезинфекцию мезороллера, как описано выше. Сложите набор в бокс для хранения.

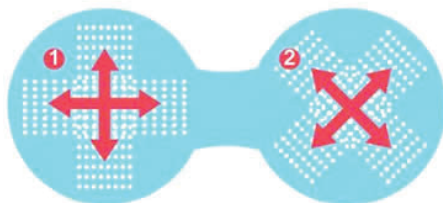

Мезороллер предназначен для индивидуального использования.

Курс процедур: 1-2 раза в неделю в вечернее время в течение месяца. Далее необходим перерыв длительностью в один месяц. При необходимости повторите курс до достижения желаемых результатов.

Весной-летом используйте солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF 40.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не использовать на коже с папилломами, бородавками, родинками, акне, ожогами и повреждениями кожи.

Беременность, заболевания крови, острые инфекционные заболевания, истощение, заболевания сердца, новообразования.

Характеристики:

Материал: пластик АБС, нержавеющая сталь / титан

Цвет: мультиколер

Размер бокса: 17x10x4 см.

Комплектация:

универсальная пластиковая рукоятка – 1 шт., емкость для дезинфекции – 1 шт.,

силиконовая щёточка для очищения лица – 1 шт. и сменные насадки – 4 шт.:

мезоштамп 12 игл - 2,0 мм (для проработки глубоких шрамов и следов от акне)

300 игл - 0.5 мм (для области вокруг глаз)

720 игл - 1.0 мм (для лица)

1200 игл - 1.5 мм (для тела)

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Тел: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», 117405, Москва,

ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59,

8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск,

ул. Монтаньинов, д. 9 комн. 34/4, УНП 192409754, email: optbell@bradex.ru.

Страна происхождения: Китай.

Производитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.

тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.

e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183.

Израиль - Рег. №204012.

Россия - Рег. №444287, №683532