

МАССАЖЕР ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА ВАКУУМНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Неправильный образ жизни приводит к ухудшению состояния организма, в том числе и ухудшению состояния кожи, которая становится питательной средой для бактерий.

Поэтому необходимо постоянно ухаживать за кожей и два – три раза в неделю чистить поры при помощи вакуумного массажера для чистки лица LuazON.

Такая процедура не занимает много времени, помогает избавиться от угрей, не повреждая кожу и не вызывая воспаления.

Массажер для чистки лица LuazON делает поры здоровыми и препятствует дальнейшему появлению угрей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- работает от аккумуляторной батареи;
- заряд батареи осуществляется от сети 220 В и от устройства с разъемом USB.

Комплектация: массажер для чистки лица, 4 насадки, провод USB, сетевой адаптер, набор сменных фильтров и рингов, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

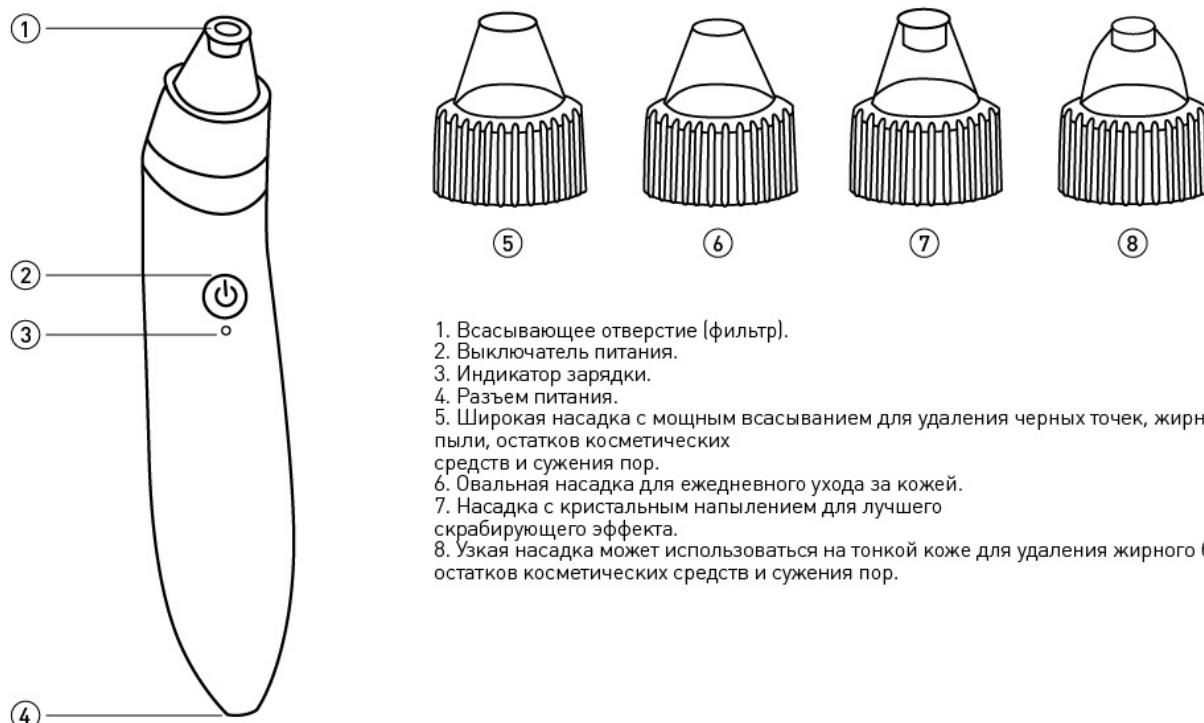
1. Перед использованием зарядите устройство до полной зарядки. Во время процесса зарядки светодиодный индикатор будет светиться красным, когда устройство зарядится – зеленым, информируя вас о готовности к работе.
2. Снимите весь макияж с лица. Никогда не используйте устройство на коже, покрытой лосьоном для чистки кожи или косметическим мылом.
3. Для достижения наилучших результатов поры кожи должны быть расширены. Для этого лучше всего выполнять чистку после приема ванны, так как горячая вода приводит к расширению пор.
4. Установите необходимую вам насадку.
5. Включите устройство.
6. Медленно перемещайте устройство вокруг кончика носа.
7. Произведите предварительную чистку всей поверхности носа, не акцентируя действия на каком-либо определенном участке.
8. После выполнения процедуры выключите устройство.
9. Ополосните лицо и нанесите увлажняющий лосьон или другое косметическое средство для кожи, которое вы обычно используете.

Для достижения наилучших результатов используйте устройство два или три раза в неделю во время ваших обычных процедур ухода за кожей.

Смена фильтра и ринга

Если фильтр используется долго и требует замены, то поверните головку устройства и снимите ее. После этого снимите защитную крышку и достаньте фильтр. Установите новый фильтр (в комплекте) и произведите все вышеописанные действия в обратном порядке.

Время от времени ринг будет приходить в негодность или требовать замены. В этом случае поверните головку устройства и снимите ее. После этого снимите защитную крышку, снимите ринг и установите новый (идет в комплекте) и произведите все вышеописанные действия в обратном порядке.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Если зарядное устройство не используется, выключите его из сети. Всегда беритесь за вилку и никогда не тяните за шнур. Не закручивайте шнур вокруг устройства и не перегибайте его.
- Не используйте устройство рядом с пожароопасными веществами, такими как бензин, растворители для красок, аэрозоли и т.п.
- В случае повреждения устройства или присоски не пользуйтесь устройством, так как это может привести к травмам.
- Постоянно перемещайте устройство по коже, не задерживайтесь на одном участке.
- Не используйте устройство на поврежденных участках, в местах солнечных ожогов, трещин или какого-либо воспаления кожи.
- Если у вас чувствительная кожа не перемещайте данное устройство более трех раз по одному и тому же участку кожи.
- Не используйте и не храните зарядное устройство вблизи источников воды.
- Храните устройство вдали от детей.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, как указано в данном руководстве.
- Не используйте удлинитель для подключения зарядного устройства в сеть.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Это приведет к нарушению действия гарантии. При повреждении или неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.