

МАССАЖНАЯ НАКИДКА ДЛЯ СПИНЫ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Массажная накидка LuazON работает по технике вибрационного массажа в областях бедер, плеч, спины. Устройство обеспечивает качественный массаж участков, для которых характерно регулярное ощущение утомляемости и напряжения. Все режимы предусматривают возможность настройки интенсивности воздействия. Функция прогрева разогревает мышцы и повышает эффективность массажа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип: вибрационный;
- 3 зоны массажа: бедра, спина, плечи;
- 8 режимов работы;
- 3 уровня интенсивности;
- таймер 15 / 30 мин.;
- функция прогрева;
- пульт управления;
- мощность: 5 Вт;
- работает от сети 220 В или от прикуривателя 12 В.

Комплектация: массажная накидка, пульт управления, 2 адаптера питания (220 В и 12 В), инструкция, гарантийный талон.


Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не допускайте падений устройства на твердую поверхность.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- В случае повреждения устройства не пользуйтесь им.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.

- Не используйте прибор более 15 мин.
- Слишком интенсивное использование прибора может привести к его перегреванию и уменьшению срока его работы. В подобном случае отключите прибор и дайте ему остыть.
- Не применяйте прибор непосредственно на воспаленных или опухших участках тела. Не применяйте массажер при наличии повреждений кожных покровов.
- Не применяйте прибор для профессионального медицинского назначения.
- Не используйте прибор непосредственно перед сном. Массаж оказывает легкое возбуждающее воздействие, что может нарушить ваш сон.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с ним.

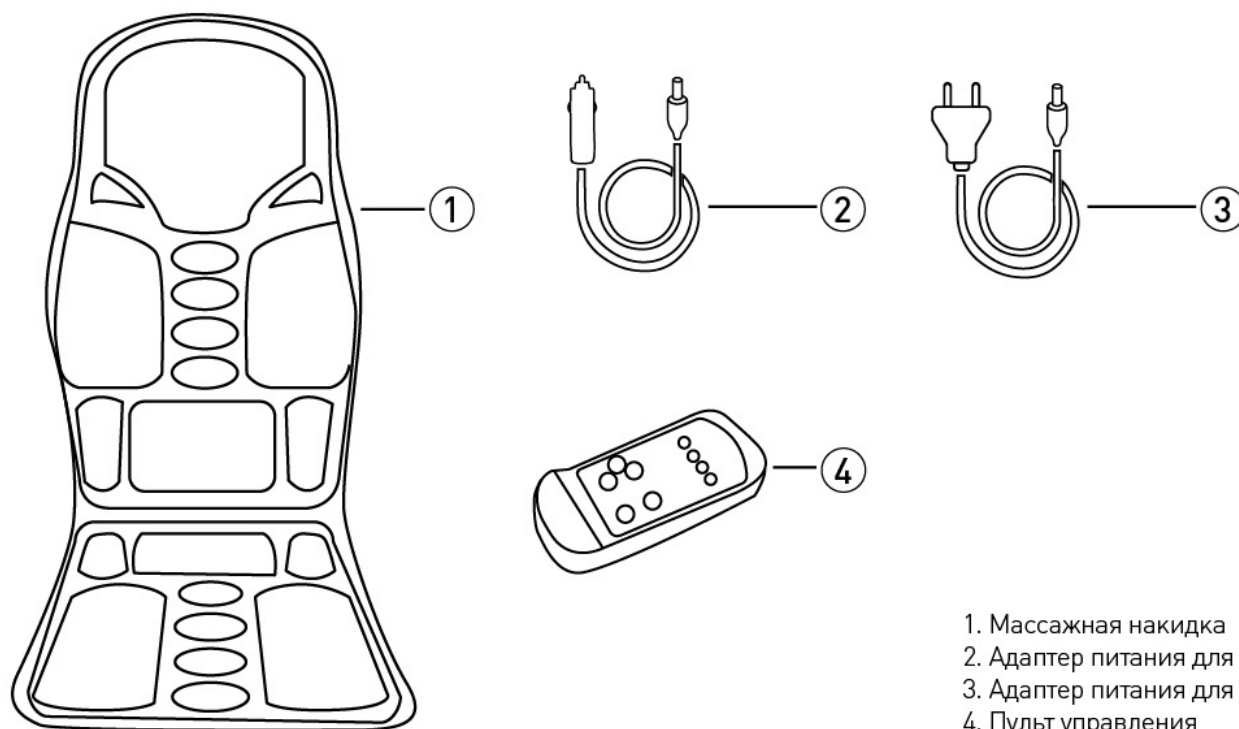

1. Массажная накладка
2. Адаптер питания для прикуривателя 12 В
3. Адаптер питания для сети 220 В
4. Пульт управления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Расположите насадку на стуле, автокресле, диване или любой другой схожей конструкции.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Сядьте на насадку, расслабьтесь и займите удобное положение.
4. Включите прибор, нажав на пульте управления кнопку питания.
5. Чтобы выбрать режим, нажимайте на кнопку MODE.
6. По завершении массажа выключите прибор и отключите его от источника питания.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.
- Протирайте прибор мягкой влажной тканью, не оставляющей ворса.
- Не включайте прибор сразу после чистки.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Протирайте прибор мягкой влажной тканью или губкой.
- Не используйте для чистки растворители и абразивные вещества.

LuazON. Искусство заботы о близких.