



Руководство пользователя

Умных Весов
с диагностикой
показателей тела.
(TELSC001)







Умные весы для определения состава тела.

Беспроводные весы для определения состава тела.

Умные весы TELSC001 -это анализатор тела, который измеряет вес и использует технологию биоэлектрического импедансного анализа (BIA) для оценки процента жира в организме и других данных о составе тела.

Весы предназначены только для домашнего использования.



Требуется приложение для использования всех функций. Совместим с устройствами iOS и Android. iOS 8.0 или более поздней версии / Android 4.3 или более поздней версии.



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием

Не используйте, если у вас есть кардиостимулятор, или искусственное легкое, или вы носите ЭКГ, или какое-либо внутреннее медицинское устройство.

Не используйте на скользком полу; не используйте, когда ваше тело мокрое.



ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Измерения данных о составе вашего тела могут быть неточными при использовании шкалы сразу после тяжелых физических нагрузок.

Шкала лучше всего подходит для взрослых старше 18 лет. (Дети в возрасте от 0 до 9 лет могут воспользоваться данными о весе и ИМТ, подростки 10-17 лет - о весе, ИМТ и процентном содержании жира в организме, но другие данные лучше всего использовать в качестве справочных).

Интеллектуальная шкала не должна использоваться для диагностики или лечения каких-либо заболеваний. Всегда консультируйтесь со своим врачом или медицинскими работниками, чтобы определить, что идеально подходит для вас.



Советы по измерению.

Прочитайте эти советы, которые помогут вам получить наиболее точные измерения:

В этом продукте используется технология BIA (биоэлектрический анализ импеданса). Чтобы получить точный и последовательный результат измерения, пожалуйста, используйте его в одно и то же время в течение дня и в одинаковых условиях, насколько это возможно.

Пожалуйста, избегайте проведения измерений:

- Во время или сразу после напряженных упражнений
- После обильной еды
- Сразу после душа, ванны или сауны
- С большим потреблением алкоголя
- Во время беременности
- Во время лихорадки
- С мокрыми ногами



Во время теста, пожалуйста, будьте босиком и стойте прямо. Ношение носков может не дать вам точного результата. Грязные ноги также могут повлиять на точность измерения.

Единица измерения веса может быть изменена с килограмма (кг) на фунт (фунт) или наоборот с помощью программы мобильного приложения. Единица измерения высоты также изменится соответствующим образом (метр против фута/дюйма).



Руководство пользователя

Правильно измерьте вес: поставьте весы на ровную, плоскую поверхность и сбросьте их перед измерением. Вес должен показывать 0,0 кг/фунт. перед тем, как встать на весы.

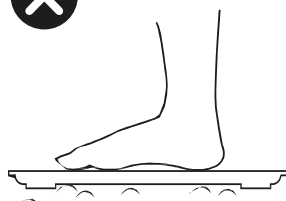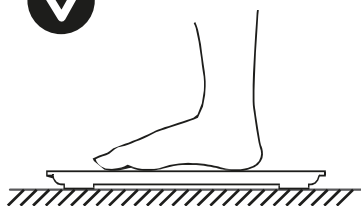

Используйте его на твердой поверхности

Правильно измерьте содержание жира в теле и другие параметры состава тела: встаньте прямо на весы, и обе ноги должны равномерно касаться электродов, как показано на рисунке ниже.



Проводящие области



Мощность В Масштабе.

Ваши умные весы питаются от 3-х батареек типа AAA (батарейки в комплект не входят). Установите батарейки в батарейный отсек, и весы будут включены.

С установленными батарейками вы можете измерить вес своего тела, наступив на него. Однако для измерения других данных о составе тела, таких как процентное содержание жира в организме, вам необходимо использовать интеллектуальные весы вместе со смартфоном или планшетом. Чтобы узнать, как установить программу мобильного приложения на ваши мобильные устройства, смотрите следующий раздел.



Установка и измерение.

Интеллектуальные весы подключаются по беспроводной сети к вашим мобильным телефонам или планшетам. Для этого на ваших мобильных устройствах необходимо установить рекомендуемую нами программу для мобильных приложений. Самый простой способ загрузить мобильное приложение-использовать свой телефон или планшет для сканирования QR-кода на следующей странице. Следуйте инструкциям, чтобы полностью оценить возможности весов.



ШАГ 01

Загрузите приложение



Скачайте
«HealthU»




Зарегистрируйтесь
и заполните свои
персональные
данные



Установите
батарейные
элементы на
весы

ШАГ 02

Сопряжение шкалы с приложением

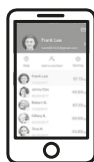

Выберите свой
зарегистрированный
аккаунт



Встаньте
на весы



Создайте
пару
в приложении

Соряжение происходит автоматически, как только
Вы встанете на весы, в противном
случае Вам следует подключить весы вручную
в меню настроек приложения.

Примечание: Для работы устройства под управлением Android 6.0 потребуется включить доступ к местоположению.




ШАГ 03

Измерьте и проверьте отчет об анализе тела



Быстрый шаг
по шкале для
калибровки
(может быть
выполнен
в любое
время)

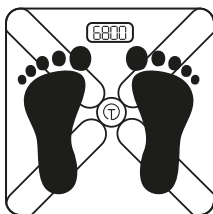

Продолжайте,
пока номер
на дисплее не
стабилизируется



Проверьте отчет
об анализе тела
в приложении

1

6800
* kg

2

3

6800
* kg

Число мигает дважды, указывая на завершение весового теста. Число 0 поворачивается вправо, затем стабилизируется, что указывает на то, что тест на содержание жира также завершен.

Что входит в комплект

Ваш комплект Умных Весов включает в себя:

- Умные Весы TELSC001
- Руководство по эксплуатации



Руководство пользователя

Вся информация является ознакомительной и может меняться, в зависимости от требований производителя.

Спецификация

Нагрузка: максимум 180kg/400lb

Градация: 0.1kg/0.2lb

Единицы измерения: kg/lb

Минимальный вес: 3kg

Питание: 3 x AAA

Рабочая температура: от 0°C до 40°C)

Рабочая влажность: <90%RH

Температура хранения: от -20°C до 60°C)

Техническое обслуживание и уход

Просто используйте мягкую влажную ткань или губку, чтобы вытереть пыль с весов.


НЕ допускайте попадания воды или жидкостей в электрические системы внутри.

Для удаления пятен или остатков используйте ткань со спиртом для протирания.

Примечание: Эти весы не являются водонепроницаемыми, **НЕ погружайтесь в воду.**

Описание дисплея

6800 * kg Нормальные условия работы	(no display) Нет батареек / Батарейки сели	6800 kg Беспроводная связь не подключена
Lo Низкое энергопотребление	Err Перегрузка	

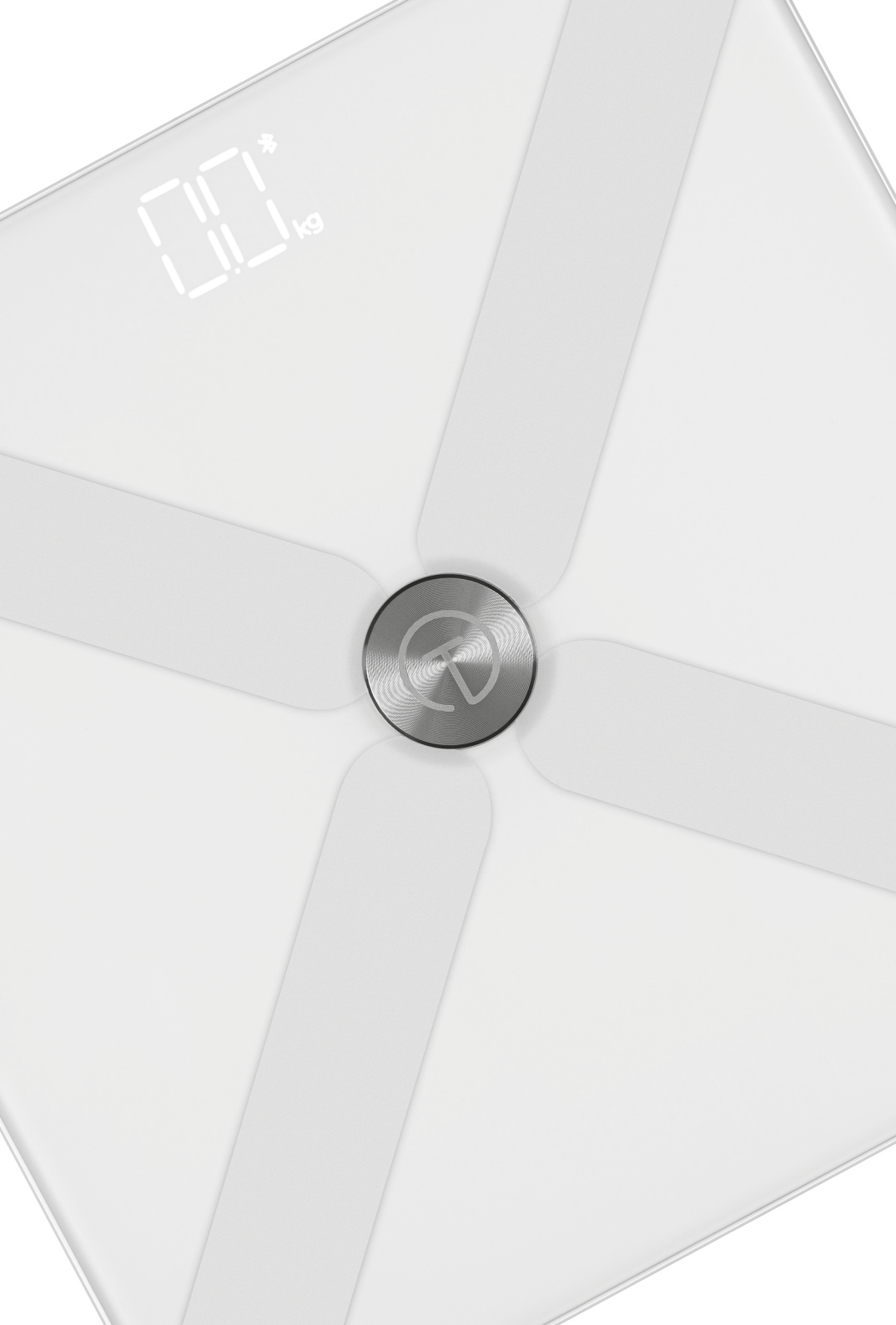



R210-117092



Made in China