


**Получай
удовольствие!**

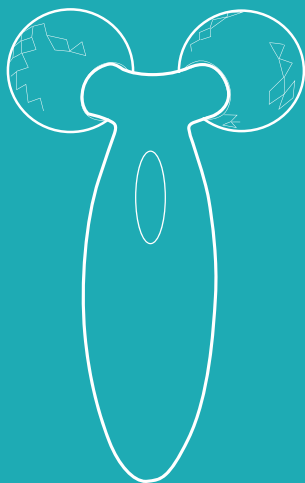

**Лифтинг-
массажер для
лица и тела
КТ-2938**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности	8
Другие товары Kitfort	9

Общие сведения

Лифтинг-массажер для лица и тела КТ-2938 поможет размять мышцы и подтянуть кожу. Лифтинг-массажер подходит для выполнения массажа всего тела как кому-то, так и самому себе. Массаж ускоряет кровообращение, помогает избавиться от дискомфорта после долгого сидения за компьютером или в телефоне, неудобной позы во время сна или тем, у кого малоподвижный образ жизни.

При движении массажера по телу ролики прокручиваются и захватывают кожу и мышцы, прорабатывая и расслабляя мышцы. Также массажер КТ-2938 улучшает циркуляцию крови и лимфы, что положительно сказывается на самочувствии и внешнем виде. Треугольные грани на роликах обеспечивают лучший захват кожи и мышц, делая массаж максимально эффективным.

Массажер не является электронным устройством, поэтому не боится попадания влаги, что дает возможность использовать его с кремами или маслами. Массажер имеет компактный размер и легкий вес, благодаря чему его можно взять с собой в поездку или на работу.

Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера



Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

1. Достаньте массажер из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Протрите корпус и ролики сухой мягкой тканью.

Использование

1. Используйте массажер на очищенной коже лица или тела. Если вашей коже требуется дополнительное увлажнение, можно использовать уходовые средства — нанесите любимый крем, гель или масла на те части тела, где собираетесь выполнять массаж.
2. Будьте внимательны, так как на ролики массажера могут накручиваться волосы. Выполняя массаж лица или воротниковой зоны, обязательно убирайте волосы. Также не забудьте снять украшения, например цепочку или длинные серьги.
3. Возьмите массажер и выполняйте движения вперед–назад или влево–вправо по массажным линиям, избегая лимфоузлов — места под коленями, сгибы локтей, подмышечные впадины и паховая область. Массаж следует выполнять снизу вверх. То есть если вы выполняете массаж тела, начинать следует с ног, постепенно поднимаясь выше. При движении вперед ролики просто прокатываются по телу, выполняя более легкий массаж. При движении в обратном направлении ролики захватывают кожу и мышцы, выполняя более интенсивный массаж. Для еще более интенсивного массажа и глубокой проработки мышц надавливайте на массажер, прокатывая его по телу в обратном направлении.

Примечание. Перед выполнением массажа лица можно положить массажер в холодильник на несколько минут. Массаж лица холодным массажером способствует устранению отеков.

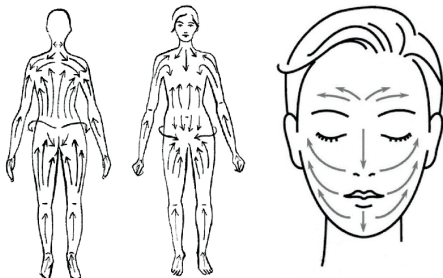



Чистка и обслуживание

Всегда выполняйте чистку массажера после выполнения массажа. Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Допускается использовать мыльный раствор для очистки от остатков крема, геля или масла. Не используйте для мытья агрессивные химические средства и посудомоечную машину.

Уход и хранение

Всегда очищайте массажер перед тем, как убрать на хранение. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Массажер не захватывает кожу и мышцы

Возможная причина	Решение
Слишком много крема, масла или геля	Используйте меньшее количество уходовых средств или выполняйте массаж без их использования
Недостаточное давление	Давите на массажер при прокатывании немного сильнее. На некоторых участках тела кожа более нежная и ткани тела более мягкие. Там массажер легко захватывает кожу и мышцы без надавливания на него. Но другие участки тела, такие как ноги, имеют больше мышечной массы и более грубую кожу. Тут для захвата кожи и мышц необходимо приложить больше давления

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Материал корпуса и роликов массажера: АБС-пластик
2. Размер устройства: 95 × 155 × 53 мм
3. Размер упаковки: 120 × 60 × 185 мм
4. Вес нетто: 0,14 кг
5. Вес брутто: 0,22 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103
Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение покрытия массажера вследствие использования кремов, гелей, масел и агрессивных химических средств для очистки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для не-промышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения повреждения покрытия устройства не погружайте устройство в воду и другие жидкости надолго.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
5. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
6. Храните устройство в недоступных детям местах.
7. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1

<

—





