


**Делаю массаж –
высший
пилотаж!**

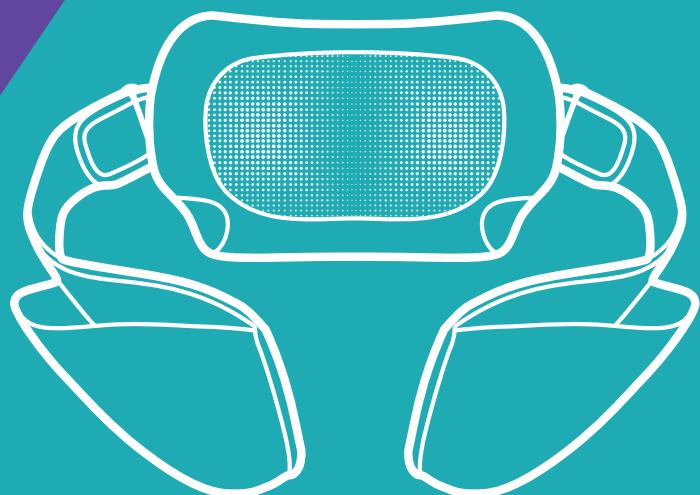

**Массажер
КТ-2929**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера	4
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Массажер Kitfort KT-2929 поможет избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или тем, у кого сидячий образ жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажер устраниет стресс и затекание мышц. Также устройство можно использовать для массажа поясницы, живота, бедер и стоп.

У данного массажера есть режим вибрации и функция инфракрасного прогрева. Функция инфракрасного прогрева улучшает кровообращение и лимфоотток, тем самым повышая эффективность массажа. Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью удлиненных ручек.

После 15-минутного сеанса сработает таймер с автоотключением.


Массажером можно пользоваться в автомобиле, подключив его к прикуривателю.

Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Автомобильный адаптер (в прикуриватель) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

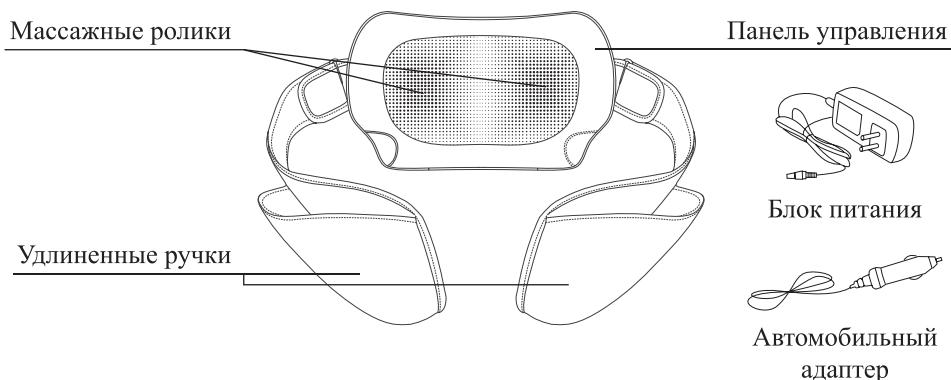

Панель управления



Массажер включается нажатием на кнопку «Вкл/Выкл», ролики начнут крутиться в разные стороны. Сразу же включается инфракрасный прогрев, который работает совместно с вращением роликов. Чтобы выключить функцию инфракрасного прогрева, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз. Чтобы выключить электромассажер необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл».

Нажатие на кнопку «Вибрация» включает вибрацию. Повторное нажатие на кнопку выключает ее.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Распакуйте массажер и протрите его влажной тканью.

Вставьте коннектор массажера в разъем блока питания, а сам блок питания подключите к сети.

Поместите массажер на шею (воротниковую зону) так, чтобы пульт управления оказался с левой стороны, и вденьте руки в удлиненные ручки.

Использование

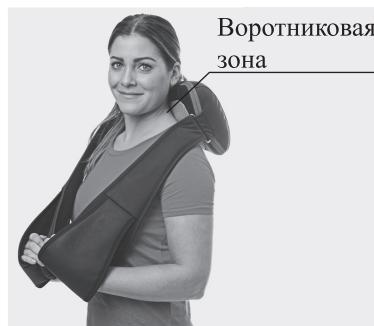

Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и устройство начнет работу.

Включите вибрацию с помощью кнопки «Вибрация», если это необходимо.

Выключите инфракрасный прогрев нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» при необходимости.

Один сеанс массажа длится 15 минут, далее сработает автоотключение. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку включения.

Меры предосторожности по применению

- Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
- Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
 - инфекционные заболевания кожи;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
 - повышенная температура;
 - сахарный диабет.
4. Пользоваться с осторожностью при:
 - беременности;
 - наличии ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительности к теплу;
 - переутомлении.

Советы

1. Помимо массажа шейно-плечевого отдела, используйте прибор для массажа поясницы, живота, бедер или стоп. Для этого снимите удлинительные ручки и расположите массажер в той зоне, где это необходимо.




Снимите удлинительные
ручки, отсоединив ли-
пучки




Предплечье



Кисти

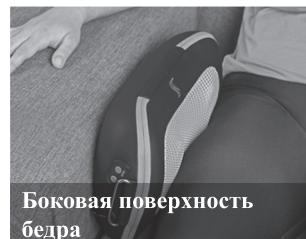

Боковая поверхность
бедра

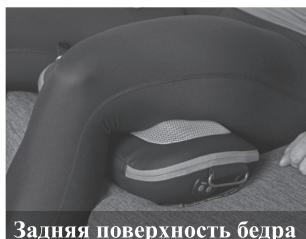

Задняя поверхность бедра



Бедра



Стопы

2. Пользуйтесь массажером в личном автомобиле, подключив массажер к прикуривателю через автомобильный адаптер (входит в комплект).
- Внимание!**
Не используйте массажер во время езды во избежание аварийных ситуаций на дороге. Если в дороге вы устали, припаркуйтесь и тогда используйте массажер.
3. Не используйте массажер более 3–5 минут на каждой части тела. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не прижимайте массажер сильно к массажируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.
4. Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно. Каждый сеанс длится 15 минут, далее у массажера срабатывает автоАвтоотключение.

Чистка и обслуживание

Чистите корпус ворсовой щеткой или щеткой с микрофиброй. Не используйте агрессивные моющие средства.

Для чистки роликов используете сухую мягкую ткань. Расстегните молнию на кожухе массажера и протрите тканью образовавшуюся под кожухом пыль. Будьте осторожны, не повредите механизмы устройства при обслуживании.

Уход и хранение

В случае если массажер не используется в течение долгого времени, очистите его от пыли и других загрязнений, и поместите на хранение в сухое место.

Устранение неполадок

Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Закончился 15 минутный сеанс массажа и прибор автоматически выключился	Сработало автоотключение. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку включения

Массажер нагрелся

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- | | |
|---|--|
| 1. Блок питания: | 4. Размер устройства: 1450 × 210 мм |
| • Вход: ~100–240 В, 50/60 Гц 0,8 А | 5. Размер упаковки: 395 × 150 × 200 мм |
| • Выход: ==12 В, 2 А | 6. Вес нетто: 1,60 кг |
| 2. Мощность: 24 Вт | 7. Вес брутто: 1,96 кг |
| 3. Класс защиты от поражения электрическим током: | Срок службы: 2 года |
| • Блока питания: II | Срок гарантии: 1 год |
| • Массажера и автомобильного адаптера: III | Товар сертифицирован:  |

Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Бинълан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Не используйте прибор под одеялом или подушкой, чтобы избежать перегрева. Иначе может произойти возгорание, поражение электрическим током или травмы.
16. Не переносите массажер за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
17. Никогда не эксплуатируйте изделие с заблокированными воздушными отверстиями, не допускайте попадания в них ворса, волос и тому подобного.
18. Не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия массажера.
19. Не пользуйтесь массажером на открытом воздухе.
20. Не позволяйте детям играть с массажером.
21. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей, это может привести к серьезным повреждениям. Не используйте на нечувствительных участках кожи или при плохом кровообращении.
22. Прибор имеет поверхность с подогревом. Люди, нечувствительные к теплу должны быть осторожны при использовании прибора.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87