



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Гидромассажная ванночка MFS-400
с функцией нагрева воды и вибромассажа**



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:





ВНИМАНИЕ! Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования!

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение продукции PLANTA!

С гидромассажной ванночкой **PLANTA MFS-400** Вы сможете наслаждаться спа-процедурой ухода за ногами в любое удобное для Вас время прямо у себя дома!

Процедуры с использованием гидромассажной ванночки оказывают расслабляющее и стимулирующее действие, снимают напряжение и тяжесть в ногах, помогают избавиться от усталости.

Гидромассажная ванночка MFS-400 имеет 3 режима работы, таймер с возможностью установки времени процедуры, а также функцию нагрева воды до температуры 45 градусов. Пузырьковый массаж имитирует джакузи, благоприятное воздействие которого на организм неоспоримо. А подогрев усиливает положительный эффект гидромассажа и делает процедуру еще более приятной и расслабляющей.

⚠ ВНИМАНИЕ! ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННОЧКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Если Вы не уверены, что ванночка Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Устройство предназначено для личного использования. Чтобы использовать все преимущества Вашей гидромассажной ванночки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего устройства. Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: <https://planta-russia.ru>

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Обязательно вымойте ноги перед использованием устройства. Оставшиеся на ногах грязь или шерсть животных могут привести к засорению отверстий подачи пузырьков.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.

- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Не используйте устройство дольше, чем 30 минут. Если вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Ремонт прибора могут проводить только специалисты авторизованных сервисов.
- Запрещено разбирать устройство и снимать его панели. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь. Ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не используйте прибор во время сна, управления машинами и оборудованием или другой работы, а также под воздействием алкоголя или других веществ.
- При использовании ванночки, следите, чтобы устройство располагалось на сухой поверхности и вода не проникала в отсеки устройства, кроме чаши для гидромассажа. Не используйте данное устройство в ванной, душе, бассейне и не погружайте в воду.
- Нельзя оставлять работающее устройство, накрытое одеялами, тканями и т.п.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Не вставляйте на ноги в ванночке. Устройство можно использовать только сидя.
- Не осуществляйте переключение режимов мокрыми руками.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в устройство.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф.
- Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуем использовать прибор, если Вы:

- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- имеете различные патологии в острой фазе;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
- проходите реабилитацию после операции;
- имеете заболевания кожи;
- страдаете от острой или хронической респираторной недостаточности;
- страдаете от сердечной недостаточности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль в нижних конечностях, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- В устройстве имеются функции подогрева. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.


ПРИМЕЧАНИЯ


- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, гидромассаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызывать бессонницу.
- В зависимости от температуры воды рекомендованное время продолжительности процедуры гидромассажа составляет:

34° – 36°	25 минут
36° – 38°	15 минут
38° – 45°	15 минут

ДЕТАЛИ ПРИБОРА

1. Дисплей с электронной панелью управления
2. Дно ванночки и гидромассажными форсунками
3. Массажные ролики 4 шт
4. Корпус прибора
5. Специальная вставка для защиты от брызг
6. Резиновые ножки с присосками
7. Место установки одной из насадок для массажа или ухода за стопами
8. Насадка с мягкой щеткой для мягкой очистки стоп
9. Насадка массажная с вращающимися шариками
10. Насадка-пемза для ухода за поверхностью стоп

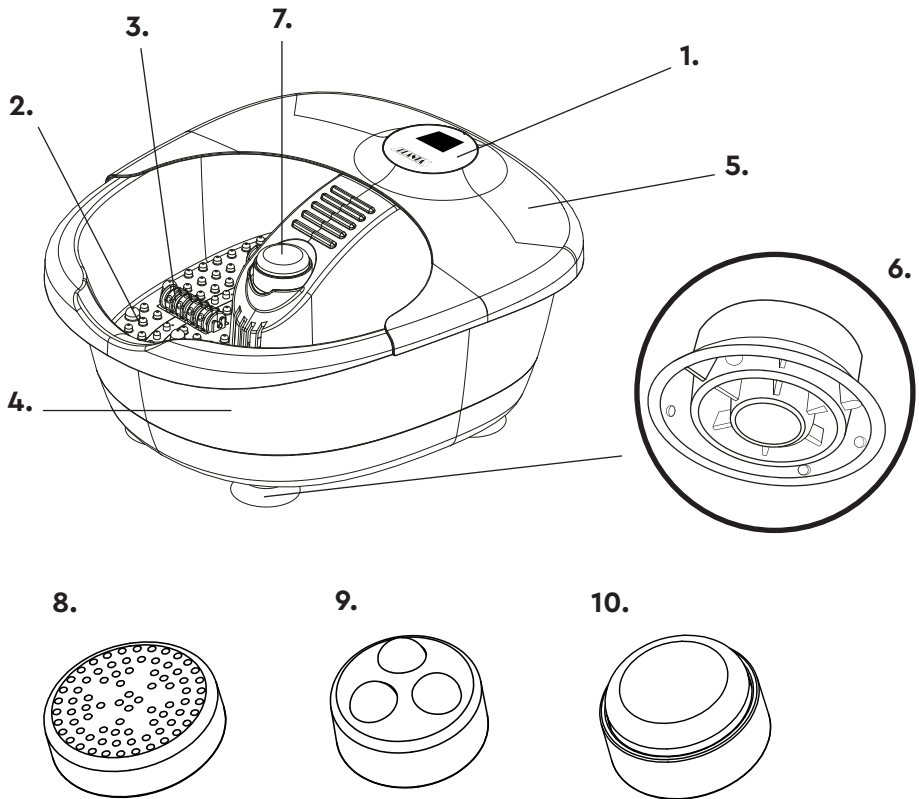

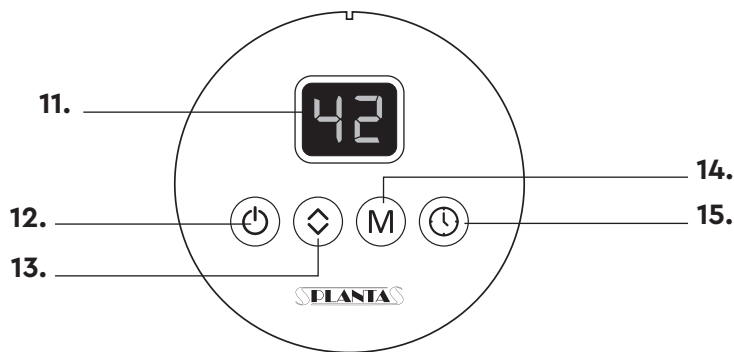

11. ЖК- экран – отображает температуру нагрева воды


12. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»

13. Кнопка установки температуры нагрева воды (от 35 до 45 градусов)

14. Кнопка «М» - для установки одного из режимов массажа: пузырьковый, вибромассаж, пузырьковый+вибромассаж

15. Кнопка «⌚» – позволяет установить время процедуры массажа 15-25-35 мин.

НАСАДКИ ДЛЯ МАССАЖА И УХОДА ЗА СТОПАМИ

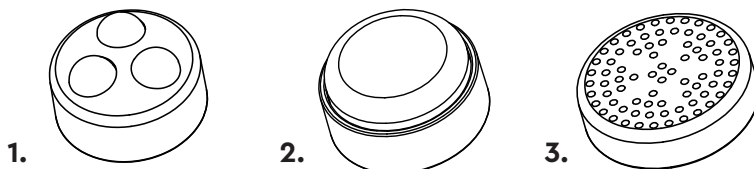

1. Массажная насадка с вращающимися шариками подходит для точечного массажа ступней и пяток.


2. Насадка-пенза подходит для очистки ног от ороговевшей кожи.

3. Насадка с мягкой щеткой подходит для мягкой очистки кожи ног.

Насадки легко снимаются и крепятся на специальное место – достаточно потянуть снизу-вверх до щелчка и насадка снимется. (см. рис.):

Установить насадку также просто – совместите насадку и место для ее установки и надавите на насадку сверху-вниз до щелчка.

Насадки можно применять до, во время или после процедуры гидромассажа – на ваше усмотрение.

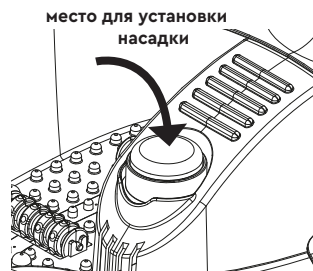

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Осмотрите гидромассажную ванночку. Убедитесь в отсутствии повреждений на аппарате и шнуре питания.
2. Подключите устройство к розетке электрической сети 220-240В. Экран дисплея будет по умолчанию отображать «- -».
3. Поставьте ванночку перед собой, налейте в ванночку воду. Уровень воды не должен превышать отметку –MAX– на внутренней стенке ванночки.



ВНИМАНИЕ! ПРИБОР НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ВОДЫ! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛЕЙТЕ ВОДУ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ.

Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку . Прибор включится, на дисплее по умолчанию будет отображаться текущая температура воды внутри ванночки.

5. ВЫБОР РЕЖИМА.

Режим 1 – сочетание пузырькового массажа и вибромассажа

Режим 2 – только пузырьковый массаж (имитация «джакузи»). Функция вибрации отключена.

Режим 3 – только вибромассаж. Пузырьковый массаж будет отключен

По умолчанию при включении устройства будет работать Режим 1 (пузырьковый + вибромассаж). Для переключения на режим 2 (пузырьковый массаж) – вам нужно 1 раз нажать на кнопку – , последующее нажатие на кнопку  включит 3-ий режим работы гидромассажной ванночки (вибромассаж)

6. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

ЖК-дисплей отображает текущую температуру воды, которая находится в гидромассажной ванночке. Для изменения температуры нажимайте  до установки нужной температуры. По умолчанию в приборе запрограммировано автоматическое подогревание до 42°. Можно установить температуру нагрева до 45°. Прибор начнет нагревать воду до нужной температуры. В процессе нагрева на ЖК дисплее будет отображаться текущее значение температуры воды в ванночке.

 **ПРИМЕЧАНИЕ! Т.к. на температуру воды в том числе оказывает влияние внешняя среда, прибор может нагревать воду на 2-3°C больше выбранного значения. Диапазон колебаний 2-3°C от установленного значения является нормальным и допустимым и не говорит о неисправности прибора.**

7. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ МАССАЖА

Нажмите на кнопку  для изменения времени работы прибора. Предусмотренное время работы 15 мин, Вы также можете изменить это значение на 25 мин однократным нажатием на кнопку  или на 35 мин, нажав на кнопку  2 раза.

8. ОТКЛЮЧЕНИЕ.

После окончания установленного времени прибор выключится автоматически. Для выключения прибора ранее предустановленного времени необходимо нажать на кнопку . После завершения работы рекомендуется выключить прибор из сети питания.

Дополнительная функция массажа

Вы можете дополнить любой из режимов массажа дополнительным воздействием массажных роликов, установленных на дне ванночки. Просто водите ступнями вперед-назад по дну ванночки, выбирая при этом интенсивность надавливания, и Вы получите дополнительный роликовый массаж стоп. Данный вид массажа можно использовать и без воды, но только при выключенной из сети ванночке.

УХОД, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА И РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР

Чистите корпус прибора только сухой тканью. Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен. При появлении засаленных участков на ЖК-дисплее протрите его слегка влажной мягкой тканью и вытрите насухо. Не используйте химические или абразивные средства для чистки и ухода за прибором.



ВНИМАНИЕ! НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ.

Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.

Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

- Если Вы не используете ванночку, храните её в сухом месте.
- Прежде чем убрать устройство для хранения, дайте ему полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: MFS-400


Питание: 220–240В ~50 Гц

Мощность: 440 W

Размер (Д*Ш*В): 40,8*35*19,1 см

Объём резервуара: 3 литра

Вес: 900 гр

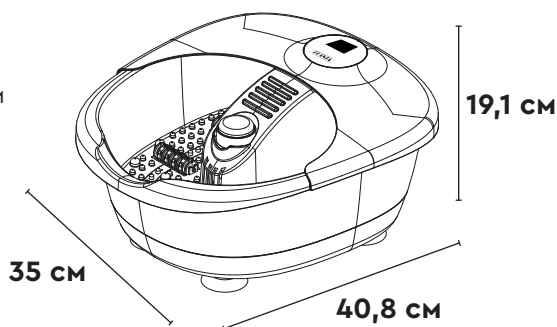

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменить комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменения веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm$ 5–10%.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред, окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился неуполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: «Сямынь Комфорт Саэнс Энд Текнолджи Груп Ко., Лтд»

Адрес: 168#, Цианпу роуд, Симинг Зона, Сямынь, Китай

Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «ПАЛЛАДА», 111675 Россия, город Москва,
улица Руднёвка, дом 4, п IV к 1,2 оф 1 рм 2/5

Служба сервисной поддержки потребителей:
www.planta-russia.ru
+7 (495) 137-80-32

Товар сертифицирован



Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.