




**ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ
ТЕПЛОЙ КОВРИК**

PLANTA

PL-MAT2 STONE&PHOTON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

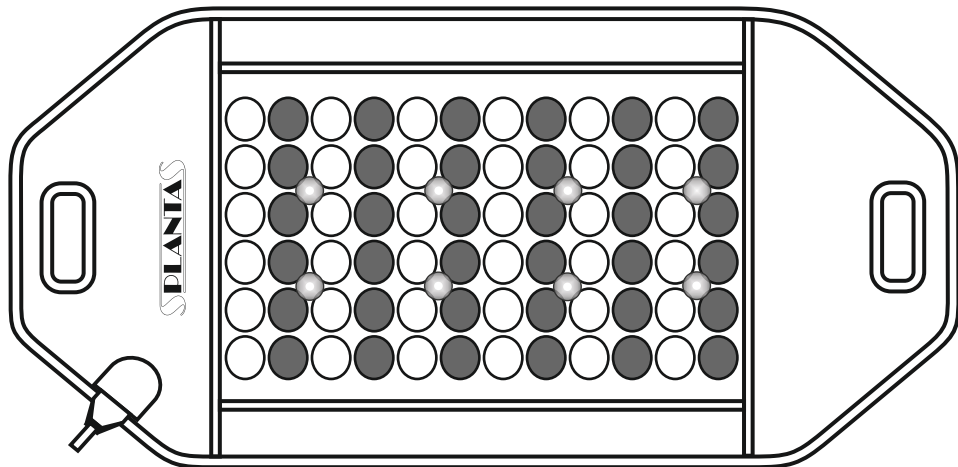

 #planta_beauty

www.planta.ru.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Название продукции: ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ КОВРИК

Модель: PL-MAT2

Материалы: нефрит, турмалин, термостойкий материал/искусственная кожа

Напряжение: 220В/50Гц

Мощность: 102 Вт

Регулировка температуры: от 30 до 70°C

Количество камней: 36 шт. – натуральный нефрит, 36 шт. – турмалин

8 шт. - инфракрасных излучателей

Размер: 47 x 100 см


Вес: 3.6 кг

ОПИСАНИЕ

ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ КОВРИК PL-MAT2 STONE&PHOTON предназначен для прогревания тела. 36 нефритовых и 36 турмалиновых кристаллов коврика, соприкасаясь с кожей тела, имитируют нажатие пальцев, как при точечном массаже, одновременно прогревая ткани организма. Это значительно улучшает кровообращение, т.к. к прогреваемым точкам активно поступает обогащенная кислородом кровь. Температура нагревательного элемента варьируется от 30°C до 70°C, излучая при этом инфракрасное тепло и отдавая его телу человека. Инфракрасный прогрев благоприятно воздействует на весь организм. Нихромовый кабель, который нагревает коврик, равномерно уложен по поверхности, поэтому все 72 керамических пластин прогреваются до одинаковой температуры. Фольга в нижней части коврика помогает греть только тело, а не пол или диван. Каждый камень упакован в сетку, камни не выпадут и не потеряются. Действие основано на инфракрасном тепловом воздействии с использованием кристаллов, включая нефрит и турмалин. При нагревании эти кристаллы создают инфракрасное тепло, которое проникает в тело человека на 10-15 см, что улучшает кровоток и микроциркуляцию, расширяя кровеносные сосуды и расслабляя мышцы в области нагрева. Инфракрасные волны усиливают обмен веществ и облегчают болевые ощущения. Прогревание способствует нормализации кровообращения в зоне воздействия, полезно для повышения выносливости организма, для улучшения сна, для снятия напряжения в мышцах и уменьшения застойных явлений, оказывает общеукрепляющее воздействие на организм, избавляет от стресса. В результате воздействия инфракрасного излучения происходит расслабление гладких мышц внутренних органов, расширение кровеносных сосудов, улучшается кровообращение и лимфоток, повышается содержание кислорода в крови, регулируется работа нервной системы, усиливаются иммунные функции клеток. Преимуществом теплового коврика PL-MAT2 является наличие еще одной дополнительной функции - лазерного применения низкого уровня (фототерапия). При помощи 8 ламп-излучателей красного цвета – фотонов мат обеспечивает физиотерапевтическое воздействие на весь организм рассеянными лучами видимого красного света, позволяя восстанавливать защитные механизмы, повышая иммунитет и регенеративные способности, а также восстанавливая обмен веществ и механизмы самоочищения.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- При наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- При переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- При острых заболеваниях;
- При наличии гипертермии;
- Беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл (в случае, если врач не рекомендует использование);
- Если тело человека влажное;
- При чувствительности к тепловому прогреванию.

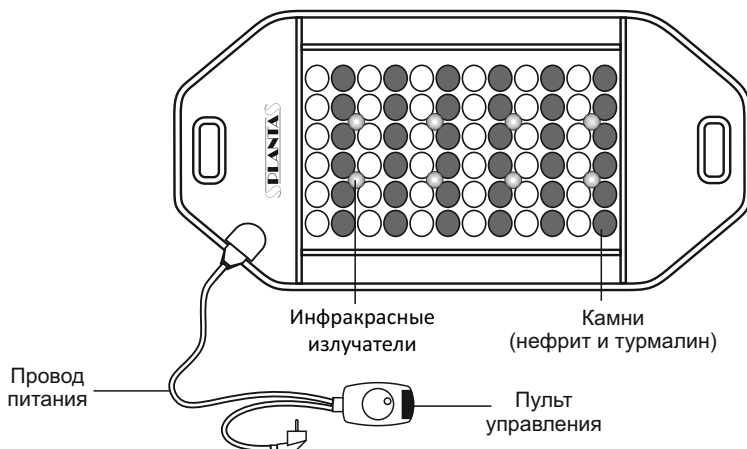

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Подсоедините клеммы коврика, следуя рисунку ниже.

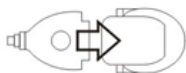

- Подключите провод питания к сети переменного тока 220 В.
- Поверните регулятор 3 по часовой стрелке. Устройство включится, а на дисплее появится значение температуры в Цельсиях. По умолчанию установлено 60°C. Установите нужную температуру нагревательного элемента (выбранная температура отображается на дисплее в течение 3 секунд, затем исходная температура коврика). По мере его нагревания температура будет повышаться, пока не достигнет заданной, что изобразится на дисплее.
- Нажмите кнопку 1 для включения фотонотерапии. Повторное нажатие отключит функцию.
- Нагрев до конечной температуры будет достигнут в течение 15-20 минут.
- Для выключения коврика после его использования поверните регулятор 3 против часовой стрелки до щелчка и отключите провод питания от сети.



- 1- Кнопка включения/выключения фотонотерапии
- 2- Индикатор работы фотонотерапии
- 3- Регулятор включения/выключения; Регулятор температуры
- 4- HIGH –Максимальная температура, LOW – Минимальная температура
- 5- Индикатор нагрева, при достижении установленной температуры индикатор нагрева гаснет

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

- Прогрев до 45°C: Улучшает качество крови, восстанавливает нервную и гормональную системы. Не имеет противопоказаний для использования.
- Прогрев от 45°C до 55°C: Активное нагревание. Улучшает кровоток, расслабляет мышцы.
- Интенсивный прогрев от 55°C до 70°C: Эффект прижигания. Уникальный режим нагревания омолаживает сосуды, кожу и суставы, активизирует местный иммунитет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните для дальнейшего использования.

Сохранность и эффективное использование турмалиново-нефритового теплового коврика возможны только в случае его применения исключительно по назначению.

Перед первым использованием коврика осмотрите его и убедитесь в отсутствии повреждений. До начала использования коврика проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет его использовать.

Во время использования коврика следите за своим самочувствием.

Не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться ковриком без присмотра со стороны.

Используйте необходимое напряжение для подключения прибора, в противном случае, это может привести к пожару или поломке. Не используйте коврик в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.

Не используйте коврик вблизи раскаленных предметов.

Ни в коем случае не используйте коврик при видимых повреждениях шнура или вилки!

Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.

Обязательно отключайте устройство от сети после использования.

Запрещено касаться коврика влажными руками.

При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование. Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время использования турмалиново-нефритового теплового коврика немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Запрещено погружать коврик в воду или другие жидкости во время его очистки.

Не используйте прибор вблизи нагревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, это может привести к пожару.

Не используйте прибор на улице.

Не используйте прибор после принятия алкоголя или при плохом самочувствии.

Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки устройства.

Производитель за собой право на модификацию дизайна и дополнения к

описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления.

ХРАНИЕНИЕ

- Поместите коврик в упаковку.
- Храните коврик в безопасном сухом и прохладном месте.
- Избегайте соприкосновения коврика с острыми или режущими предметами, которые могут его повредить.
- Не сгибайте, не тяните провод питания и не ставьте на него тяжести.

УХОД

- Прежде чем начать чистить изделие отключите его от сети и дайте остыть.
- Очищайте изделие мягкой сухой тканью.
- Во время чистки не погружайте коврик в воду или другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Турмалиново-нефритовый тепловой коврик
- Пульт управления
- Инструкция
- Сумка для переноски и хранения

Утилизация электрооборудования

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования).



Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие.

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:

Венжоу Поп Релакс Ко., Лтд., по адресу №57, Картон Индастриал Зоун, Вуянг, Аоджанг Таун, Пингянг каунти, Венжоу, Китай Страна-производитель: Китай

Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «Паллада», 111675 Россия, г. Москва,
ул. Руднёвка, д. 4, п. IV, к. 1, 2 оф. 1 РМ 2/5

Служба поддержки потребителей:

+7 (495) 137-80-32 www.planta.ru.com

Дата производства: см. на упаковке

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011,
ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.

