

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091,
Israel. Tel: +972-4-8521824, fax:
+972-3-7256059. www.bradex.co.il.
Импортер на территории РФ: ООО
«Технологии здоровья». Российская
Федерация, 117405, Москва,
ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66,
www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики
Беларусь: ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск,
ул. Монтажников, д.9 комн.34/4. , УНП
192409754, email: optbel1@bradex.ru.

Страна происхождения: Китай. Производи-
тель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт
Компани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,
Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо,
КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:
+86-574-6560938. e-mail:

zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183. Израиль - Reg. №204012.
Россия - Reg. №444287, №683532



Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных
для детей и животных

NACOMI

МАССАЖНЫЙ НАБОР «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»

ИНСТРУКЦИЯ KZ 0916



Комплект вакуумных массажных банок и рукавички для влажного и сухого массажа поможет активно бороться с застойными жировыми отложениями и увеличить поступление кислорода к тканям. Подобный комплекс массажных процедур даст возможность расслабить и восстановить мышцы не только после длинного рабочего дня, но и даже после интенсивной тренировки.

Базовый набор вакуумных банок незаменим для массажа проблемных зон тела, вследствие которого происходит движение крови и лимфы, улучшается питание клеток, кожа обретает тонус и эластичность, сокращаются проявления целлюлита. Банки выполнены из качественного силикона, они легко моются и при правильной эксплуатации прослужат вам много лет. Регулярно выполняя самомассаж таких проблемных зон как ягодицы, бока, руки, бедра, вы увидите результат уже через пару месяцев использования. Массажная рукавичка «Принцесса» предназначена для антицеллюлитного и расслабляющего массажа тела как в душе с участием необходимых косметических средств, так и для сухого массажа проблемных зон. Массажер удобно надевается на руку, что позволяет обеспечить регулировку интенсивности массажа исходя из Ваших индивидуальных предпочтений. Антицеллюлитный массаж с рукавичкой «Принцесса» подойдет даже для самой чувствительной кожи.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните в местах, недоступных для детей и животных.

Храните вдали от нагревательных приборов.

Храните вдали от острых предметов.

Не позволяйте детям играть с банками.

Не используйте банки в воде.

Не оставляйте банки на одном участке на длительное время, возможно возникновение синяков.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная температура тела, наличие инфекционных заболеваний, воспалительные процессы, родинки, злокачественные опухоли, эпилепсия, тромбофлебит, варикоз, тромбоз, беременность и период лактации, кровотечения, заболевания сердечной системы, болезни крови, ожоги и другие поражения кожи, сильная пигментация кожи.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.



МАССАЖ ТЕЛА:


1. Примите ванну или душ, разотрите тело мочалкой, пилингом или скрабом, чтобы открыть поры и улучшить кровообращение.

2. Нанесите масло или антицеллюлитный крем, чтобы банка свободно скользила по телу.

3. Надавите на банку, чтобы создать вакуум, приложите банку к телу и ведите вдоль массажных линий, указанных на рисунке. Можно делать прямые, волнистые, спиральные и зигзагообразные линии. Повторите движения на каждом участке 5-10 раз, но не более 15-20 минут на одну зону.

Следите за давлением в банке, кожа не должна втягиваться более чем на 1-1,5 см, иначе возможно образование синяков.

Закончить массаж успокаивающими поглаживающими движениями. При возможности прилечь на 20 минут.

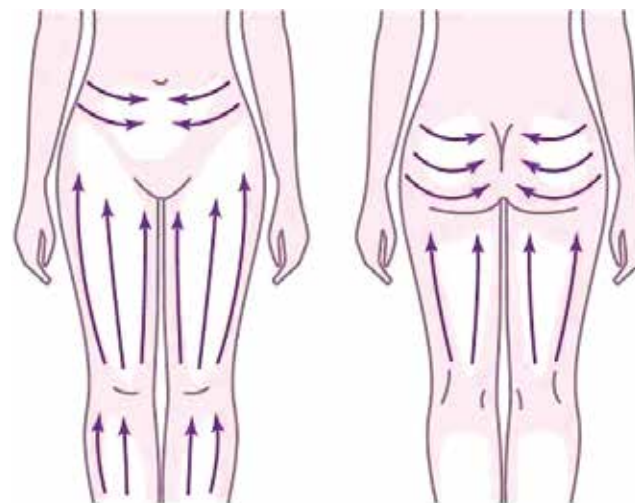

УСТАНОВКА БАНОК НА СПИНУ:

Запрещено ставить банки на родинки, позвоночник, костные выступы, на углы лопаток и проекцию области сердца.

Надавите на банку, чтобы спустить воздух и создать вакуум.

Поставьте банку, чтобы она плотно присосалась к телу. Оставьте банки на теле на 10 минут. В следующий раз банки можно ставить через несколько дней, избегая области, где ставили прошлые банки.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖНОЙ РУКАВИЧКИ «ПРИНЦЕССА»:

Наденьте рукавичку на руку и начните массировать любую зону тела круговыми движениями.

Вы можете регулировать интенсивность массажа путём нажатия рукой на поверхность рукавички.

При желании перед процедурой можете нанести крем или скраб, подходящий вашей коже.



ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

- После использования промойте в воде с мылом или мягким моющим средством.
- Храните чистые банки в коробке в сухом прохладном месте.
- Избегайте контакта с острыми предметами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал банок: силикон.

Материал рукавички: ПВХ.

Цвет: розовый.

Размер банок: 55х55 см.

Комплектация: банка – 2 шт.,
массажная рукавичка - 1 шт., инструкция.

