




ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА **PL-PI01**

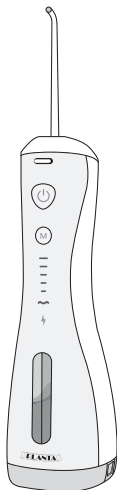

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Использование портативного ирригатора для полости рта

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Портативный ирригатор для полости рта PLANTA **PL-PI01** создан для людей, следящих за своим здоровьем и гигиеной.

Ирригатор для полости рта выполняет ряд важных функций:

- тщательно и бережно очищает зубы и десны,
- предназначен для ухода за имплантами, коронками и брекет-системами,
- быстро удаляет остатки пищи без нанесения вреда деснам,
- предотвращает появление кариеса, стоматита, пародонтоза,
- является профилактическим средством кровоточивости десен,
- борется с неприятным запахом изо рта, который вызывается бактериальным налетом,
- поддерживает естественный цвет зубной эмали,
- предотвращает образование зубного камня,
- исключает развитие гингивита у беременных и кормящих женщин,
- ускоряет регенеративные процессы после

микротравм.

За счет мощной струи воды, ирригатор тщательно вымывает остатки пищи из межзубного пространства и пародонтальных карманов, таким образом, ирригатор является безопасной заменой зубной нити и флоссеру. Помимо функции очищения, струя воды бережно массирует десны, выполняя функцию профилактики их заболеваний.

Примечание! Ирригатор для полости рта не является заменой зубной щетки и должен применяться в комплексе по уходу за зубами.

Модель PLANTA PL-PI01 является портативной, ее удобно хранить дома и брать с собой в путешествия и поездки.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

! При использовании этого или любого другого электроприбора всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:

- Для зарядки ирригатора не включайте его в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время его использования.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали ирригатор в качестве игрушки.
- Не ставьте устройство рядом с источниками тепла, внутри или на верхней части нагретой духовки.
- Не эксплуатируйте устройство на открытом воздухе.

- Во время зарядки не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к шнуру питания.
- Не ставьте прибор на шнур для зарядки, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в/из розетки мокрыми руками.
- Во избежание риска поражения электрическим током не заряжайте ирригатор во влажных помещениях, например, в ванной.
- Если устройство не используется продолжительное время, во избежание риска пожара отключите зарядный кабель от электросети.
- Во время переноса устройства держите его обеими руками. Не держитесь только за основание или верхнюю часть.
- Если шнур для зарядки поврежден, его необходимо заменить.
- Не включайте ирригатор без воды.
- Не наливайте в ирригатор жидкость для полоскания рта, это может привести к поломке устройства. В резервуар ирригатора разрешается заливать только чистую воду.
- Не используйте ирригатор без насадок.
- Не нажимайте насадками на десны или зубы, это может привести к травмам.


- Если у Вас были хирургические вмешательства в течение 2х последних месяцев, ирригатор можно использовать только с разрешения лечащего врача.
- Используйте ирригатор только по его прямому назначению и в соответствии с изложенными в данном руководстве указаниями. Нецелевое использование ирригатора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА



1. Ирригатор для полости рта.
2. Стандартная насадка для ежедневного ухода.
3. Пародонтологическая насадка для бережного ухода за зубами и деснами.
4. Насадка для ухода за имплантами, пластинками и коронками.
5. Насадка для чистки языка.
6. Шнур для зарядки.
7. Сумочка для хранения.


УСТРОЙСТВО ИРРИГАТОРА ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

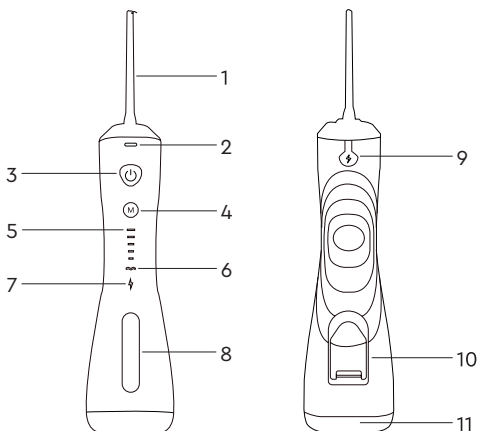


1. Насадка.
2. Кнопка для снятия насадки.
3. Кнопка включения.
4. Кнопка выбора режима.
Попеременно нажимайте на кнопку, чтобы выбрать 1 из 6ти режимов.
5. Индикатор выбранного режима.
Отображает выбранный режим работы.
6. Режим пульсации.
7. Индикатор заряда батареи.
8. Окошко резервуара для воды.
9. Порт Type-C для зарядки с защитным водонепроницаемым клапаном.
10. Боковая крышка резервуара для воды.
11. Нижняя крышка резервуара для воды (для слития остатков воды и мытья резервуара).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРРИГАТОРА ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА


1. Вставьте насадку в корпус ирригатора. Вы должны услышать звук «клик».

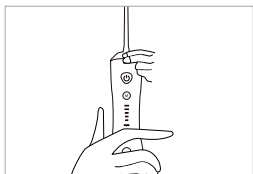


2. Откройте резервуар для воды и наполните его водой комнатной температуры.

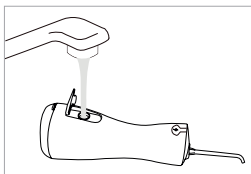


3. С помощью кнопки выбора режима выберете подходящий Вам режим. Режимы располагаются сверху вниз в зависимости от силы напора струи. Сверху – самый слабый, снизу – самый сильный. Шестым идет режим пульсации.

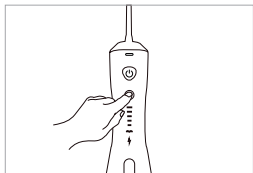


4. Поместите насадку в полость рта и нажмите на кнопку включения ирригатора для начала его работы.

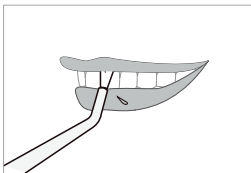

5. После окончания использования ирригатора откройте резервуар для воды при помощи нижней крышки, промойте его и просушите (рекомендуется чистить резервуар каждые 20 дней).

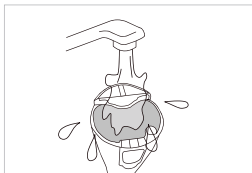

Примечание! Чтобы открыть резервуар, нажмите на кнопку на крышке резервуара и поверните его, как показано на рисунке.

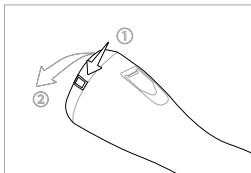

Примечание! Заливать воду в ирригатор удобнее при помощи боковой крышки, сливать остатки воды и промывать ирригатор – при помощи нижней крышки.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ИРРИГАТОРА

На задней части корпуса устройства найдите порт Type-C для зарядки аккумулятора ирригатора. Вставьте разъем кабеля, входящего в комплект, в порт для зарядки, второй конец кабеля USB вставьте в адаптер питания 5Вt=1А. Подключите адаптер питания к электросети. Полная зарядка аккумулятора ирригатора составляет примерно 4 часа.

Примечание! В комплект поставки входит только шнур для питания, адаптер для шнура питания в комплект поставки не входит.


РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПОРТАТИВНОГО ИРРИГАТОРА

Режим	Назначение режима	Давление струи воды
Чувствительный	Для чувствительных зубов и десен	276–414 кПа
Защитный	Мягкий массаж десен	414–552 кПа
Мягкий	Бережная очистка	552–690 кПа
Стандартный	Ежедневная очистка	690–827 кПа
Сильный	Глубокая очистка	827–965 кПа
Пульсация	Глубокая очистка и массаж десен	462–655 кПа

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Красный	Уровень заряда батареи менее 20%
Синий	Уровень заряда батареи 20–80%
Зеленый	Уровень заряда батареи более 80%
Мигает красным	Идет зарядка батареи

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИРРИГАТОРА

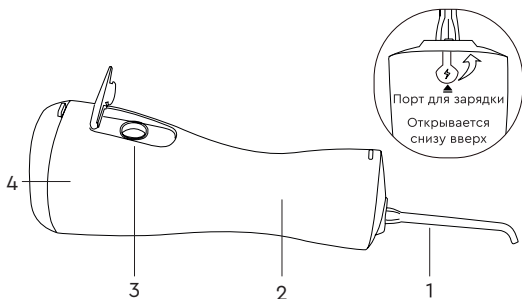

1. Насадка.

Нажмите на кнопку съема насадки, снимите насадку, промойте ее водой и вытрите тряпочкой. Рекомендуется менять насадку каждые 6 месяцев. Если насадка повреждена в ходе эксплуатации, ее необходимо заменить.

2. Корпус ирригатора.

При загрязнении корпуса ирригатора, помойте его теплой водой. Запрещается использовать воду выше 50 градусов, моющие средства, растворители, спирт, абразивные моющие вещества. Корпус ирригатора имеет степень влагозащиты IPX7: его можно погружать под воду глубиной до 1 метра без риска навредить прибору.

3. Разъем для заливания воды.

Разъем для заливания необходимо регулярно чистить так же, как и корпус. При появлении загрязнений возможна протечка воды.

4. Резервуар для воды.

Регулярно прочищайте резервуар для воды изнутри щеточкой. После чистки резервуар необходимо протереть насухо.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Наименование неполадки	Возможная причина	Решение
Ирригатор не работает	Только что купленный ирригатор или ирригатор использовался без подзарядки более 3х месяцев.	Полностью зарядить аккумулятор. Время зарядки – 4 часа.
Низкое давление струи воды во время работы	Насадка ирригатора забита посторонними предметами.	Заменить насадку.
	Установлен минимальный режим работы ирригатора.	Установите режим с более мощной струей воды.
Быстрый расход заряда аккумулятора	Срок работы батареи истек.	Свяжитесь с продавцом.
	Время зарядки аккумулятора меньше положенного.	Заряжать аккумулятор в течение 4х часов.
Индикатор зарядки не загорается в процессе зарядки аккумулятора	Неправильно вставлен зарядный кабель.	Вставить зарядный кабель еще раз.
	Срок работы батареи истек.	Свяжитесь с продавцом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PL-PI01

Мощность: 8 Вт

Питание: 5В=1А

Объем резервуара: 240 мл

Степень влагозащиты: IPX7

Давление струи воды: 276 – 965 кПа
(в зависимости от выбранного режима)

Уровень шума: 72 Дб

Количество режимов работы: 6

Диаметр насадки: 0,6 мм


Емкость аккумулятора: 2000 мАч

Размер устройства: 76×64×218 мм

Длина шнура для зарядки: 50 см

Вес нетто: 278 г

Вес брутто: 532 г

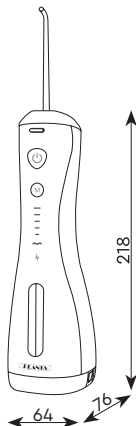

УТИЛИЗАЦИЯ

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить устройство от остальных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом. Месяц и год изготовления указаны на коробке.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления о вносимых изменениях.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: «Дунгуань Минчуаньюшан Электроник Текнолоджи Ко., Лтд»

Адрес: Здание 5, научно-технический парк Хайюн, город Фэнган, Дунгуань, провинция Гуандун 523690, Китай

Импортер / Уполномоченная организация: ООО «ПАЛЛАДА»
111675 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА РУДНЁВКА ДОМ 4 П IV К 1,2 ОФ
1 РМ 2/5, РОССИЯ

Служба сервисной поддержки потребителей:

<https://www.planta-russia.ru>

+7 (495) 137-80-32

Товар сертифицирован



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: _____

Модель: _____

Дата продажи: _____

Торгующая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца: _____

М.П.