

PLANTA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ USER MANUAL

Массажное кресло
Massage chair

PLANTA MC-3000B



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Применение и назначение

Уважаемый Покупатель, благодарим Вас за выбор **массажного кресла PLANTA MC-3000B!**

Массажное кресло PLANTA MC-3000B позволит Вам наслаждаться массажем в любое время, не выходя из дома. Массажное кресло MC-3000B помогает успокоить нервную систему, снять стресс, быстро восстановить силы, расслабить мышцы шеи, спины, бедер, ягодиц, икр и стоп.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что это массажное кресло Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажного кресла, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta-russia.ru

 **ВНИМАНИЕ! МАССАЖНОЕ КРЕСЛО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**

Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности.

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель.
- Не используйте устройство дольше, чем 30 минут. Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, в бассейне, сауне и вне помещения.
- НИКОГДА не используйте кресло во время сна и не засыпайте во время выполнения массажа.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажное кресло.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Не размещайте массажное кресло на солнце или в месте с температурой выше 40 °С, так как это приведет к выцветанию материала, из которого изготовлено массажное кресло, а также к возможному выведению из строя внутреннего механизма.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если во время или после использования устройства у Вас появилась боль, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя накрывать работающее устройство подушками, одеялами и т.п.
- Не допускайте зажимания провода питания или попадание его под основание кресла.
- Если у Вас длинные волосы, не позволяйте длинным волосам закрывать область массажа, чтобы избежать случайного запутывания.
- Не вставайте на кресло и не кладите на него тяжелые предметы.
- Не наступайте на массажные ролики, так как это может привести к их поломке.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.

- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 30 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.
- **Максимальный вес пользователя – 150 кг.**



ВНИМАНИЕ!

- Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при регулировке положения тела.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм прилагайте к креслу только легкое усилие.

Предупреждения:

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков, любые болезни позвоночника, спины и суставов и др.;
- проходите реабилитацию после операции.

Примечание:

Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.

Описание массажного кресла



7. **Аэромассаж.** Включение/выключение режима воздушно-компрессионного массажа всего тела (активация работы всех массажных подушек – плечи, голова, шея, руки, бедра, ноги, стопы).
8. **АВТО.** Включение/выключение и выбор одного из 5 автоматических режимов общего массажа всего тела. Выбрать необходимую программу можно, нажимая на кнопку АВТО до активации нужной автопрограммы (см. п. «Режим «АВТО»»). Авторежимы включают в себя чередование и/или сочетание компрессионного и роликового массажа всего тела.
9. **«Положение «Сидя».** Опускание подставки для ног и одновременное поднятие спинки кресла для фиксации сидячего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.
10. **Время.** Выбор времени массажа (15, 20, 25 или 30 минут).
11. **«Положение «Лежа».** Поднятие подставки для ног и одновременное опускание спинки кресла для фиксации лежачего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.
12. **Стопы.** Включение/выключение режима роликового массажа в области стоп.
13. **Ягодицы.** Включение/выключение режима роликового массажа в области бедер и ягодиц.
14. **Подогрев.** Активация подогрева в области спины и икр.
15. **Невесомость.** Активация данной функции предусматривает приведение кресла в положение, при котором пользователь перестает ощущать вес собственного тела.
16. **Шея.** Включение/выключение режима разминающего массажа шеи (активация работы массажных роликов в области шеи).
17. **Поясница.** Включение/выключение режима разминающего массажа поясницы (активация работы массажных роликов в области поясницы).
18. **Направление.** Выбор направления движения массажных роликов (по часовой стрелке/против часовой стрелки) для зоны активированного режима массажа.
19. **Скорость «+».** Увеличение скорости движения массажных роликов для области активированного режима массажа (на выбор предусмотрено 3 уровня скорости движения).

20. **Скорость «-».** Уменьшение скорости движения массажных роликов для области активированного режима массажа (на выбор предусмотрено 3 уровня скорости движения).
21. **Вся спина.** Включение/выключение режима разминающего массажа в области всей спины (активация работы массажных роликов области шеи и поясницы).


Комплектация массажного кресла

Массажное кресло поставляется полностью в собранном виде и не требует дополнительной сборки.


Эксплуатация массажного кресла

 Внимательно прочтите инструкцию и указания по технике безопасности.


- Извлеките из коробки массажное кресло. Удалите все упаковочные материалы.
 - Внимательно осмотрите массажное кресло на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
1. Осмотрите массажное кресло.
 2. Убедитесь в отсутствии повреждений на кресле и шнуре питания.
 3. Убедитесь, что провод питания подушки плотно соединен с разъемом питания на кресле, а воздухопроводы надежно закреплены с помощью соединительной трубки:

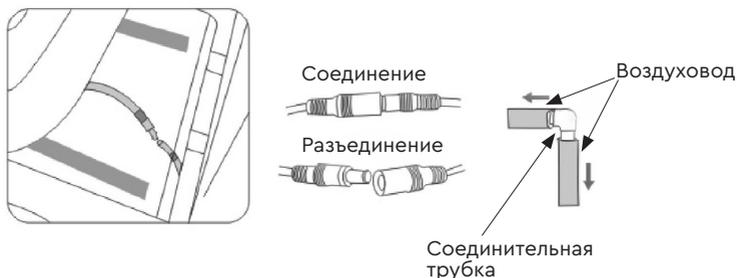

4. Опустите подставку для ног:

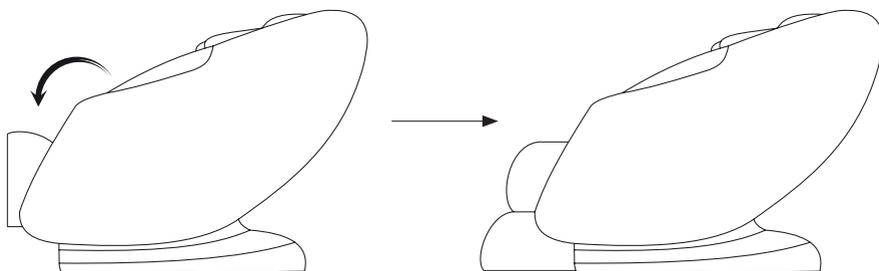

- Убедитесь, что вокруг кресла достаточно пространства для его раскладывания:
 - не менее 80 см позади кресла;
 - не менее 50 см перед креслом.

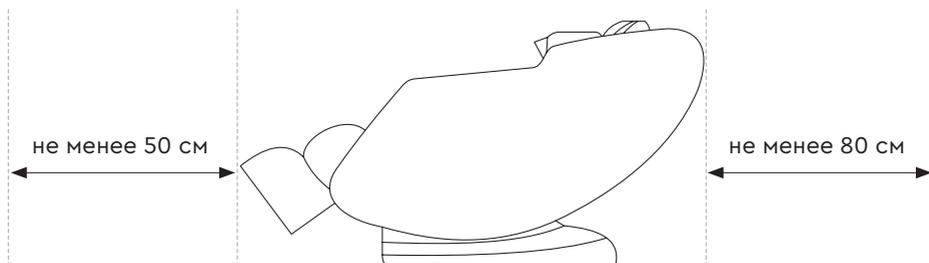

- Убедитесь, что под креслом нет посторонних предметов.
- Подключите адаптер к розетке электрической сети 220 В.
- Нажмите переключатель в положение «ВКЛ» в нижнем углу задней части спинки кресла.



- Нажмите кнопку  на панели управления для включения устройства. По умолчанию активируется автоматический режим «А». Данный режим предусматривает активацию работы воздушно-компрессионного массажа всего тела с уровнем давления 2 и роликового массажа в области зоны шеи, поясницы и стоп на 2-ой скорости.

Примечание. При включении массажного кресла автоматически активируется функция Bluetooth. При этом прозвучит звуковой сигнал.

- Выберите нужный режим массажа нажатием на соответствующую кнопку (см. табл. «Режимы и функционал массажного кресла»).
- С помощью кнопок  и  выберите комфортный для Вас уровень положения спинки и подставки для ног или с помощью кнопки  активируйте функцию «Невесомость».

- С помощью кнопки  выберите необходимое время массажа (15, 20, 25 или 30 минут).
 - При желании Вы можете активировать функцию подогрева спины, нажав кнопку . Для отключения подогрева нажмите кнопку повторно.
11. Нажатие на кнопку  во время работы массажного кресла прерывает цикл работы программы и отключает массажное кресло.
 12. По завершении массажа выключите прибор из розетки.

Описание режимов массажного кресла

- **Режим ПЛЕЧИ**



Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области плеч и головы с уровнем давления 2.

- С помощью кнопок **«Давление «+»** и **«Давление «-»** выберите комфортный для Вас уровень интенсивности воздействия компрессионных массажных подушек (1, 2 или 3 уровень интенсивности).

Примечание. При включении Автопрограммы «Е» режим «ПЛЕЧИ» автоматически прекращает работу.

- **Режим РУКИ+ЯГОДИЦЫ**



Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области рук, бедер и ягодиц с уровнем давления 2.

- С помощью кнопок **«Давление «+»** и **«Давление «-»** выберите комфортный для Вас уровень интенсивности воздействия компрессионных массажных подушек (1, 2 или 3 уровень интенсивности).

Примечание. При включении Автопрограммы «С» режим «РУКИ+ЯГОДИЦЫ» автоматически прекращает работу.

- **Режим НОГИ**



Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области икр и стоп с уровнем давления 2.

- С помощью кнопок **«Давление «+»** и **«Давление «-»** выберите комфортный для Вас уровень интенсивности воздействия компрессионных массажных подушек (1, 2 или 3 уровень интенсивности).

Примечание. При включении Автопрограммы «С» режим «НОГИ» автоматически прекращает работу.

- **Режим ШЕЯ**



Данный режим предусматривает активацию режима разминающего массажа шеи (активация работы массажных роликов в области шеи) с 1-ой скоростью движения массажных роликов.

- С помощью кнопок **«Скорость «+»** и **«Скорость «-»** выберите комфортную для Вас скорость движения массажных роликов (1, 2 или 3 уровень скорости).
- С помощью кнопки  выберите направление движения массажных роликов (по/против часовой стрелки).

Примечание. При включении Автопрограммы «Е» режим «ШЕЯ» автоматически прекращает работу.

- **Режим ПОЯСНИЦА**



Данный режим предусматривает активацию режима разминающего массажа поясницы (активация работы массажных роликов в области поясницы) с 1-ой скоростью движения массажных роликов.

- С помощью кнопок **«Скорость «+»** и **«Скорость «-»** выберите комфортную для Вас скорость движения массажных роликов (1, 2 или 3 уровень скорости).
- С помощью кнопки  выберите направление движения массажных роликов (по/против часовой стрелки).

Примечание. При включении Автопрограммы «Е» режим «ПОЯСНИЦА» автоматически прекращает работу.

- **Режим СТОПЫ**



Данный режим предусматривает активацию режима роликового массажа стоп со 2-ой скоростью движения массажных роликов.

Примечание. При включении Автопрограммы «С» режим «СТОПЫ» автоматически прекращает работу.

- **Режим ЯГОДИЦЫ**



Данный режим предусматривает активацию режима разминающего массажа бедер и ягодиц (активация роликового массажа в области бедер и ягодиц) со 2-ой скоростью движения массажных роликов.

Примечание. При включении режима «АВТО» режим «ЯГОДИЦЫ» автоматически прекращает работу.

- **Режим ВСЯ СПИНА**



Данный режим предусматривает активацию разминающего массажа в области всей спины (активация работы массажных роликов в области шеи и поясницы) со 2-м уровнем скорости.

- С помощью кнопок **«Скорость «+»** и **«Скорость «-»** выберите комфортную для Вас скорость движения массажных роликов (1, 2 или 3 уровень скорости).
- С помощью кнопки  выберите направление движения массажных роликов (по/против часовой стрелки).

Примечание. При включении режима «АВТО» режим «ВСЯ СПИНА» автоматически прекращает работу.

- **Режим АЭРОМАССАЖ**



Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа всего тела (активация работы всех массажных подушек – плечи, голова, шея, руки, бедра, ноги, стопы) с уровнем давления 2.

- С помощью кнопок **«Давление «+»** и **«Давление «-»** выберите комфортный для Вас уровень интенсивности воздействия компрессионных массажных подушек (1, 2 или 3 уровень интенсивности).

Примечание. При включении режимов «Плечи», «Руки + ягодицы», «Ноги» режим «АЭРОМАССАЖ» автоматически прекращает работу.

- **Режим АВТО**



На выбор предустановлено 5 автоматических программ. Для переключения между автоматическими программами нажимайте кнопку  до активации нужного Вам режима.

АВТО программы:

- **Автопрограмма «А».**

Активация воздушно-компрессионного массажа всего тела с уровнем давления 2, а также роликового массажа в области шеи, поясницы и стоп на 2-ой скорости.

Примечание. При включении режимов «Плечи», «Руки + ягодицы», «Ноги», «Аэромассаж», «Стопы», «Шея», «Поясница», «Вся спина» автопрограмма «А» автоматически прекращает работу.

- **Автопрограмма «В».**

Активация воздушно-компрессионного массажа всего тела с уровнем давления 2, а также роликового массажа в области шеи, поясницы и стоп на 2-ой скорости. От автопрограммы «А» отличается направлением движения массажных роликов.

Примечание. При включении режимов «Плечи», «Руки + ягодицы», «Ноги», «Аэромассаж», «Стопы», «Шея», «Поясница», «Вся спина» автопрограмма «В» автоматически прекращает работу.

- **Автопрограмма «С».**

Активация воздушно-компрессионного массажа в области плеч и головы, а также роликового массажа в области шеи, поясницы и ягодиц на 2-ой скорости.

Примечание. При включении режимов «Плечи», «Ягодицы», «Шея», «Поясница», «Вся спина» автопрограмма «С» автоматически прекращает работу.

- **Автопрограмма «D».**

Активация воздушно-компрессионного массажа всего тела с уровнем давления 2, а также роликового массажа в области шеи, поясницы и ягодиц на 2-ой скорости.

Примечание. При включении режимов «Плечи», «Руки + ягодицы», «Ноги»,

«Аэромассаж», «Стопы», «Шея», «Поясница», «Ягодицы», «Вся спина» автопрограмма «D» автоматически прекращает работу.

- **Автопрограмма «Е».**

Активация режима невесомости, активация воздушно-компрессионного массажа для рук, бедер и ягодиц, а также роликового массажа в области ягодиц и стоп на 2-ой скорости.

Примечание. При включении режимов «Руки + ягодицы», «Ноги», «Стопы», «Шея», «Поясница», «Ягодицы», «Вся спина», а также функции «Невесомость» автопрограмма «Е» автоматически прекращает работу.

• **Функция НЕВЕСОМОСТЬ**

ZERO G

Активирование данной функции переводит массажное кресло в положение, при котором пользователь перестает ощущать вес собственного тела, словно оказываясь в состоянии невесомости. Это способствует максимальному расслаблению, обеспечивающему наиболее эффективную проработку мышц.

Нажмите кнопку  для активации функции невесомости. Для отключения функции и возврату в исходное положение нажмите кнопку  повторно.

Данная функция активна для всех режимов кресла.

• **Функция ПОДОГРЕВ**



- Нажмите кнопку  для активации подогрева в области спины. Для выключения функции подогрева нажмите кнопку  повторно.

Примечание. При включении режима «Авто» функция подогрева автоматически прекращает работу. Ее можно активировать повторно после включения одной из автопрограмм.

Режимы и функционал массажного кресла

Режим		Давление «-», «+»  ДАВЛЕНИЕ -  ДАВЛЕНИЕ +	Время 15, 20, 25, 30 мин 	Подогрев 	Невесомость 	Положение «Сидя»/ «Лежа»  	Скорость «-», «+»  СКОРОСТЬ -  СКОРОСТЬ +	Направление 
1	Плечи 	+	+	+	+	+	-	-
2	Руки+ ягодицы 	+	+	+	+	+	-	-
3	Ноги 	+	+	+	+	+	-	-
4	Аэро- массаж 	+	+	+	+	+	-	-
5	Авто 							
	A	+	+	+	+	+	-	-
	B	+	+	+	+	+	-	-
	C	+	+	+	+	+	-	-
	D	+	+	+	+	+	-	-
6	Стопы 	-	+	+	+	+	-	-
7	Ягодицы 	-	+	+	+	+	-	-
8	Шея 	-	+	+	+	+	+	+
9	Поясни- ца 	-	+	+	+	+	+	+
10	Вся спина 	-	+	+	+	+	+	+

Совместимость режимов массажного кресла

Массажное кресло предусматривает как автономную работу каждого режима, так и активацию сразу нескольких режимов. Ниже приведена таблица совместимости режимов массажного кресла между собой.

Режим	Плечи	Руки+ягодицы	Ноги	Аэромассаж	Авто 					Стопы	Ягодицы	Шея	Поясница	Вся спина	
					A	B	C	D	E						
1	Плечи 	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
2	Руки+ягодицы 	+		+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
3	Ноги 	+	+		-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	
4	Аэромассаж 	-	-	-		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5	Авто 														
	A	-	-	-	-		-	-	-	-	-	+	-	-	-
	B	-	-	-	-	-		-	-	-	-	+	-	-	-
	C	-	+	+	+	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	D	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
E	+	-	-	+	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
6	Стопы 	+	+	+	+	-	-	-	-	-		+	+	+	+
7	Ягодицы 	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+		+	+	+
8	Шея 	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+		+	+
9	Поясница	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+		+
10	Вся спина	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	



ВНИМАНИЕ! При использовании кресла следите, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат под креслом.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Не забывайте отключить прибор от сети, если он не используется.
- Не пытайтесь вставать на кресло.
- Не используйте функции массажа или подогрева непрерывно более 30 минут. Полезное действие массажа составляет 30 минут – что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

Внимание!

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполнять только уполномоченные представители производителя.
- Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!

Перемещение кресла

Перед перемещением массажного кресла убедитесь, что кнопка питания находится в положении Выкл, провод питания отсоединен. Возьмитесь за углубление в задней спинке кресла двумя руками, слегка наклоните его на себя и переместите кресло на нужное место, используя транспортировочные ролики, расположенные в задней части спинки кресла.

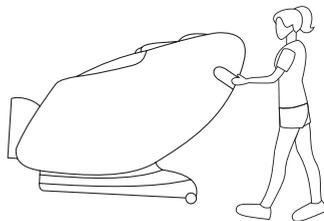

Уход и хранение

Правильное обслуживание поможет поддерживать массажное кресло в хорошем техническом состоянии и продлить его срок службы. Неправильное же техническое обслуживание может привести к повреждению или сокращению срока службы массажного кресла.

Предупреждение: перед очисткой или обслуживанием массажного кресла обязательно отключите вилку питания.

- Регулярно удаляйте пыль влажной тряпкой.
- Перед чисткой выключите устройство и отключите его от сети, дайте креслу остыть.
- Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.

⚠ Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

- Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.

⚠ Внимание! Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.

- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань.
- Во избежание поломки не сворачивайте шнур вокруг кресла.

Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Устройство не подключено	Убедитесь, что устройство включено в сеть
		Проверьте правильность подключения адаптера
	Устройство включено неправильно	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Устройство неожиданно отключилось	Вы используете массажер более 30 мин	Это нормально, устройство исправно работает
Массажные ролики двигаются слишком медленно	Слишком большое давление на массажные ролики	Уменьшите давление на массажные ролики
Слышен громкий звук во время использования кресла	Звук вызван работой массажного механизма	Это нормальная ситуация при работе массажера

Технические характеристики

Модель: МС-3000В

Питание: 220 В, 50–60 Гц

Мощность: 90 Вт

Размер прибора: 140x74x104 см

Размер подголовника: 28x30 см

Ширина сидения: 52 см

Вес нетто: 53 кг

Материал: ABS-пластик, полиэстер



Гарантийный талон

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: <ul style="list-style-type: none"> - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p>
<p>6. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Фуцзянь Эпос Текнолоджи Ко., Лтд.»</p>	<p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:</p> <p>_____</p>
<p>Адрес: Ванци Индастриал Парк, Фуань Сити, Провинция Фуцзянь, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»</p>	<p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:</p> <p>_____</p>
<p>Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32</p> <p>Товар сертифицирован Сделано в Китае</p>	<p style="text-align: right;">М.П.</p>

