



**Здорово
улыбайтесь!**



**Ирригатор
для полости рта
КТ-2958**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени) info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание


Общие сведения	4
Комплектация	6
Устройство ирригатора	6
Подготовка к работе и использование	10
Чистка и обслуживание	17
Уход и хранение	19
Устранение неполадок	20
Технические характеристики	23
Меры предосторожности	25

Общие сведения

Ирригатор КТ-2958 — важное вспомогательное устройство для поддержания гигиены полости рта. Он позволяет справиться с налетом и остатками пищи в труднодоступных местах, например, межзубном пространстве и пародонтальных карманах.

После еды остатки пищи застравают между зубами, забиваются в карманы десен. В таких случаях на помощь может прийти зубная нить или флоссер. Но для чистки зубов нитью необходимо обеспечить чистоту рук, а возможность помыть их имеется далеко не всегда. В противном случае повышается вероятность попадания в полость рта болезнетворных бактерий и вирусов. Также зубной нитью можно механически повредить десны.

Ирригатор может частично заменить зубную нить или флоссер. Тонкая и сильная струя воды вымывает остатки еды и налет из межзубного пространства и десневых карманов. Струя воды не только очищает труднодоступные места, но и тщательно массирует десны, что является хорошей профилактикой заболевания десен. Регулярное использование ирригатора поможет предотвратить межзубный кариес. Ирригатор считается самым гигиеничным вариантом ухода за полостью рта. Особенно он будет полезен для тех людей, которые носят брекеты, и людям с протезами или коронками.

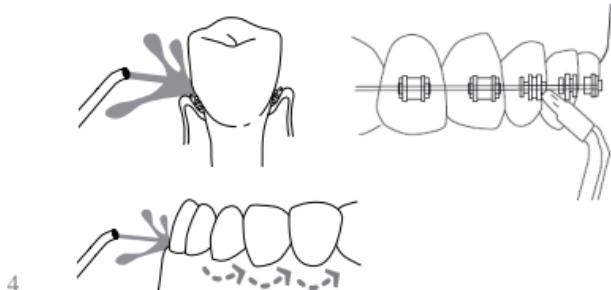

**Ирригатор для полости рта
КТ-2958**

Модель Kitfort KT-2958 является портативным ирригатором, его можно брать с собой в путешествия или на работу. У ирригатора есть резервуар для воды емкостью 200 мл. Этого объема хватает для тщательной обработки полости рта.

На корпусе ирригатора расположены 2 кнопки — кнопка «Вкл/Выкл» и кнопка «Режим». У прибора всего 4 режима работы — «Норма», «Мягко», «Пульс» и «Вручную». Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с самого слабого режима «Мягко», т.к. неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и тонкого потока воды. Когда десны привыкнут и окрепнут, вы можете переходить на более сильные режимы.

В комплекте к ирригатору идут три классические струйные насадки, а также многоструйная насадка.

Заряжать прибор можно с помощью USB-шнура от компьютера, пауэрбанка или блока питания. При полном заряде ирригатор работает до 20 мин. У прибора есть автоматическое отключение после 2 минут использования.

В профилактических целях ирригатор нужен каждому взрослому человеку. Ирригатор не заменяет собой зубную щетку, он является частью комплексного ухода за полостью рта. Комплексный уход для вас должен подобрать ваш лечащий врач-стоматолог, обычно уход включает в себя: ирригацию, чистку зубов зубной щеткой и ершиками, полоскание рта ополаскивателем и использование зубной нити, если это необходимо.

Комплектация

1. Ирригатор с всасывающей трубкой с наконечником — 1 шт.
2. Струйная насадка — 3 шт.
3. Многоструйная насадка — 1 шт.
4. Резервуар для воды — 1 шт.
5. Шнур USB — 1 шт.
6. Заглушка разъема для зарядки — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ирригатора



Иrrигатор для полости рта
KT-2958



Корпус прибора выполнен из пластика, что делает ирригатор удобным в использовании благодаря небольшому весу прибора.

Прибор оснащен тремя одинаковыми струйными насадками. Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи. Для удобства каждая насадка помечена разным цветом. Также прибор комплектуется одной многоструйной насадкой.

В комплекте идет шнур USB с нестандартным разъемом. Чтобы защитить разъем для зарядки от попадания воды во время использования ирригатора, предусмотрена силиконовая заглушка разъема для зарядки.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство.

Кнопка «Режим» переключает режимы работы ирригатора.

Режимы работы и индикаторы

В *режиме «Мягко»* струя слабая. Если вы до этого не пользовались ирригатором, рекомендуется начинать в этом режиме, так как неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и резкого потока воды.



В *режиме «Норма»* струя самая сильная для лучшего очищения межзубного пространства и других труднодоступных мест во рту.

Режим «Пульс» предназначен для массажа десен и общей чистки полости рта пульсирующей струей воды. Массаж десен усиливает микроциркуляцию крови, что является хорошей профилактикой пародонтита и пародонтоза.

В *режиме «Вручную»* при нажатии и удерживании кнопки «Вкл/Выкл» циклически меняется напор струи от слабой до сильной.

При следующем включении ирригатор будет работать в режиме последнего использования.

Световой индикатор выбранного режима будет гореть, пока работает прибор.


Во время зарядки ирригатора индикаторы режимов позволяют отслеживать уровень, до которого прибор зарядился на данный момент:

- мигает индикатор режима «Вручную» — уровень заряда ниже 25%;
- индикатор режима «Вручную» горит непрерывно, индикатор режима «Пульс» мигает — уровень заряда 25–50%;
- индикаторы режимов «Вручную» и «Пульс» горят непрерывно, индикатор режима «Мягко» мигает — уровень заряда 50–75%;
- индикаторы режимов «Вручную», «Пульс» и «Мягко» горят непрерывно, индикатор режима «Норма» мигает — уровень заряда 75–100%;
- все индикаторы горят непрерывно — прибор полностью заряжен.

Во время использования устройства все индикаторы мигают, если заряд аккумулятора низкий.

Классическая струйная насадка


С помощью данной насадки можно очистить труднодоступные места во рту. Остатки пищи, которые глубоко «забиваются» в зубных или междесневых пространствах с легкостью вымываются потоком воды или специального раствора.

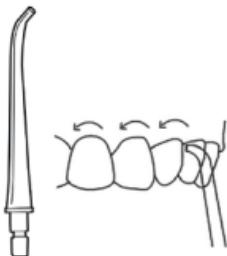


Многоструйная насадка

С использованием многоструйной насадки вы сможете проводить очистку зубов и полости рта, регулируя количество струй. Данная насадка подходит для людей с чувствительными деснами, а также позволяет очищать большую площадь, чем струйная насадка. У насадки три режима:


- режим «1» задействует максимальное количество струй, подходит для чувствительных десен;
- режим «2» задействует меньшее количество струй, позволяет очищать зубы и полость рта более эффективно, при этом обеспечивая мягкое воздействие на десны;
- в режиме «3» насадка выдает одну мощную струю; режим необходим, когда два предыдущих недостаточно эффективны для очистки.

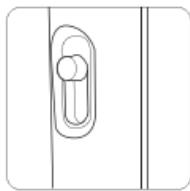

Режим «1»

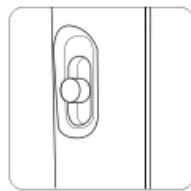

Режим «2»

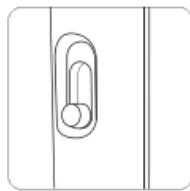

Режим «3»



Подготовка к работе и использование

Достаньте прибор из коробки и удалите весь упаковочный материал.

Перед первым использованием зарядите ирригатор.

Вымойте резервуар и насадки в теплой воде с мылом, используя мягкую губку. Это устранит следы пыли, появившиеся во время хранения. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и жесткие мочалки.

Протрите ирригатор влажной, а затем сухой мягкой тканью и тщательно высушите перед включением. Не погружайте ирригатор в воду или другие жидкости.

Установите струйную насадку или многоструйную насадку в отверстие для насадки на ирригаторе до щелчка. Заполните резервуар водой. Не заполняйте резервуар полностью, следите, чтобы уровень воды или раствора был на 1 см ниже ободка резервуара. Иначе при установке резервуара на ирригатор жидкость начнет выливаться.

Включайте прибор, держа его над раковиной. Струя воды не будет выходить, если сильно наклонять ирригатор, поэтому держите устройство под углом не более 45 градусов.

Примечания. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку снятия насадки и потяните насадку вверх.

Установка и снятие насадки в новом ирригаторе могут быть затруднительными.

Чтобы отделить резервуар для воды от ирригатора, поверните его справа налево и потяните вниз. Для установки резервуара для воды обратно наденьте резервуар на ирригатор так, чтобы выступы внутри резервуара вошли в пазы на ирригаторе. Затем поверните резервуар слева направо.

Зарядка ирригатора

Если при работе все индикаторы режимов мигают, у аккумулятора низкий заряд. В этом случае зарядите аккумулятор. Если при включении устройство не работает, значит, аккумулятор разрядился полностью.

Для зарядки подходит шнур USB из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB, если он рассчитан на ток 1 А и имеет такой же разъем. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: =5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Перед подключением шнура USB к разъему для зарядки на ирригаторе убедитесь, что ирригатор и заглушка сухие. Затем откройте силиконовую заглушку и подключите шнур USB.

Когда прибор будет полностью заряжен, 4 индикатора будут гореть непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2–3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки ирригатор не включите.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB от ирригатора и закройте разъем для зарядки заглушкой.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если ирригатор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости



аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите ирригатор, затем заряжайте примерно 1–1,5 часа. Прекращайте заряд устройства, когда индикаторы режимов «Вручную» и «Пульс» будут непрерывно гореть. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Установка насадки

Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи.

Вставьте насадку в место установки насадки до щелчка.

Чтобы извлечь насадку, нажмите на кнопку снятия насадки, а саму насадку потяните вверх.

Примечание. Установка и снятие насадки в новом ирригаторе могут быть затруднительными.

Как налить воду в ирригатор

Снимите резервуар с ирригатора и наполните его водой или специальным раствором для ирригатора. Не заполняйте резервуар полностью, следите, чтобы уровень воды или раствора был на 1 см ниже ободка резервуара. Иначе при установке резервуара на ирригатор жидкость начнет выливаться.

Чтобы снять резервуар для воды, поверните его справа налево и потяните вниз. Для установки резервуара для воды обратно наденьте резервуар на ирригатор так, чтобы выступы внутри резервуара вошли в пазы на ирригаторе. Затем поверните резервуар слева направо.

Используйте кипяченую воду или специальный раствор для ирригатора. Температура воды или раствора должна быть близкой к температуре тела человека (35–40 °C). Измерять температуру

воды необязательно, достаточно, чтобы она была комфортной. Горячая вода не повышает качество чистки и может навредить вам, а слишком холодная вода вызывает неприятные ощущения.

Использование

1. Вставьте насадку в место установки насадки до щелчка.
2. Заполните резервуар водой или специальным раствором для ирригатора и установите резервуар на ирригатор так, чтобы выступы внутри резервуара вошли в пазы на ирригаторе. Затем поверните резервуар слева направо.
3. Поверните насадку, чтобы отрегулировать направление потока воды. Установленная насадка крутится на 360°. Поворачивать насадку вы можете как держась за саму насадку, так и за место для крепления насадки. Для поворота насадки нужно приложить усилие. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить насадку или прибор.

Примечание. Если используете многоструйную насадку, установите желаемый режим работы насадки.


4. Выберите режим работы ирригатора. Для этого нажмите на кнопку «Режим» до тех пор, пока не загорится индикатор нужного вам режима.

Примечания. Если нажать на кнопку «Вкл/Выкл», ирригатор сразу включится на последнем выбранном режиме.

Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Мягко», иначе чувствительные и неподготовленные десны могут быть травмированы резким и сильным потоком воды. Рекомендуется также использовать многоструйную насадку в режиме «1» для особо чувствительных десен.



5. Перед тем как нажать на кнопку «Вкл/Выкл», наклоните ирригатор под углом 45° и направьте наконечник насадки себе в рот.
6. Наклонитесь над раковиной, а рот слегка приоткройте, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Вода из вашего рта должна стекать в раковину. Действуйте в такой последовательности, как на рисунке: двигайтесь от жевательных зубов к передним, направляйте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных пространствах. Чтобы разбрызгивания было меньше, включайте и выключайте прибор только при нахождении насадки во рту.

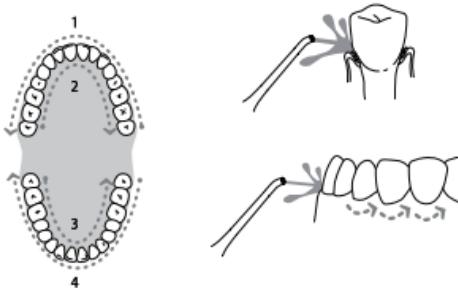

7. Рекомендуемое время чистки ротовой полости при помощи ирригатора составляет 2 минуты. По истечении 2 минут ирригатор автоматически отключается. Если вода закончилась или вы хотите прекратить чистку раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
8. Снимите насадку и отсоедините резервуар для воды. Чтобы извлечь насадку, нажмите на кнопку снятия насадки, а саму насадку потянните вверх. Чтобы отделить резервуар для воды от ирригатора, поверните его справа налево и потянните вниз.

Примечание. Если вы пользовались не водой, а специальным раствором для ирригатора, обя-

Ирригатор для полости рта
КТ-2958

зательно промойте ирригатор после него. Для этого налейте в резервуар чистую воду, включите ирригатор с установленной насадкой, направляя насадку в раковину под углом в 45 градусов.

Резервуар и насадку рекомендуется промывать и просушивать после каждого использования. Если этого не делать и ирригатором не пользоваться несколько дней, при последующем использовании может появиться неприятный запах застоявшейся воды.

Советы

В резервуар рекомендуется наливать кипяченую воду температурой не выше 40 градусов. Также можно использовать специальные растворы для ирригаторов. Травяные отвары, которые могут вызвать отложения в системе ирригатора, использовать нельзя во избежание его повреждения. Также запрещено использовать антисептики, любые химические вещества, жидкости с содержанием масел — они способны разъедать некоторые элементы внутри ирригатора. Обычный ополаскиватель для полости рта или раствор зубной пасты также заливать внутрь резервуара нельзя — во время работы ирригатора будет выделяться обильная пена, после чего прибор может выйти из строя.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для ирригатора, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать, промывайте устройство сразу же после использования таких растворов.

Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Мягко», иначе чувствительные десны могут быть травмированы резким потоком воды. Рекомендуется также использовать многоструйную насадку в режиме «1» для особо

чувствительных десен. Со временем десны привыкнут, и можно будет попробовать установить другие режимы.

У ирригатора есть функция памяти. Если нажать на кнопку «Вкл/Выкл», ирригатор сразу включится на последнем выбранном режиме.

В первое время использования возможна небольшая кровоточивость десен. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним по этому поводу.

Резервуар и насадку рекомендуется промывать и просушивать после каждого использования. Если этого не делать и ирригатором не пользоваться несколько дней, при последующем использовании может появиться неприятный запах застоявшейся воды.

Температура воды или раствора должна быть близкой к температуре тела человека (35–40 °C). Измерять температуру воды необязательно, достаточно, чтобы она была комфортной. Горячая вода не повышает качество чистки и может навредить вам, а слишком холодная вода вызывает неприятные ощущения.

Соблюдайте правила личной гигиены. Насадка является индивидуальным аксессуаром, не позволяйте другим людям использовать ее. У каждого члена семьи должна быть собственная насадка. Струйные насадки рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев.

Не применяйте зубную нить перед использованием ирригатора — она может повредить десну, а ирригатор только усугубит проблему.

Не отказывайтесь от чистки зубов с помощью зубной щетки. Ирригатор не является полноценной заменой зубной щетки — напротив, основную пользу данное устройство приносит только в комплексе со стандартной процедурой чистки зубов.

Ирригатор для полости рта KT-2958

Оптимальным решением будет использовать ирригатор два раза в день, утром и вечером после чистки зубов. Если вы носите брекеты, то пользоваться прибором стоит после каждого приема пищи. Пользоваться ирригатором рекомендуется регулярно, не делая длительных перерывов — только в этом случае вы получите хорошую профилактику заболеваний десен и качественное очищение труднодоступных участков полости рта.

Если вы носите брекеты, виниры, коронки или иные ортодонтические системы, используйте мягкий режим работы устройства. Минимального напора воды хватит для очистки, при этом вы не повредите данные системы.

Не рекомендуется применять ирригатор первые 24 часа после установки в ротовой полости каких-либо ортодонтических конструкций.

Если во рту появились воспаления, острые инфекции, обострились заболевания десен или вам провели какую-либо хирургическую операцию, вроде удаления зуба или установки имплантов — приостановите использование ирригатора. Возобновите использование устройства только после снятия острых симптомов, полного заживления тканей и консультации с лечащим врачом.

Чистка и обслуживание

Мойте резервуар и насадки в теплой воде с мылом, используя мягкую губку. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и жесткие мочалки.

Протрите ирригатор влажной, а затем сухой мягкой тканью и тщательно высушите перед включением. Не погружайте ирригатор в воду или другие жидкости.



Струйные насадки рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев.

Если прибор не использовался в течение долгого времени, промойте его. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя насадку в раковину под углом 45 градусов.

Резервуар и насадку рекомендуется промывать и просушивать после каждого использования. Если этого не делать и ирригатором не пользоваться несколько дней, при последующем использовании может появиться неприятный запах застоявшейся воды.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные растворы для ирригатора, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать промывайте устройство сразу же после использования таких растворов. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя насадку в раковину под углом 45 градусов.

Как избавиться от известкового налета

Внутри ирригатора по истечении некоторого времени начинают скапливаться известковый налет и прочие отложения. Это зависит от жесткости воды. Налет накапливается как в резервуаре для воды, так и на внутренних поверхностях. Это затрудняет работу мотора и снижает срок службы прибора. Известковый налет также является благоприятной средой для размножения болезнестворных бактерий и микроорганизмов. Средство для чистки ирригатора поможет удалить налет со всех поверхностей и скрытых элементов устройства. Действуйте согласно инструкции, прилагаемой к средству.

Иrrигатор для полости рта
KT-2958

Также вы можете воспользоваться лимонной кислотой из расчета 3 г на 100 мл воды. Залейте 220 мл воды с растворенной в ней лимонной кислотой в резервуар ирригатора. Включите ненадолго ирригатор, после оставьте его на 15–20 минут. Затем вылейте раствор и включите ирригатор с чистой водой и промойте его несколько раз.

Уход и хранение

Храните ирригатор в сухом месте при температуре от 5 до 40 °С. Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.

Если вы не планируете пользоваться прибором в течение длительного времени, очистите устройство, как это указано в главе «Чистка и обслуживание». Просушите все части прибора и уберите их на хранение в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Если ирригатор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите ирригатор, затем заряжайте примерно 1–1,5 часа. Прекращайте заряд устройства, когда индикаторы режимов «Вручную» и «Пульс» будут непрерывно гореть. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары.



Устранение неполадок

Низкое давление или устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите ирригатор в соответствии с разделом «Зарядка ирригатора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора

Ирригатор не заряжается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки ирригатора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Шнур USB неплотно подключен к разъему на задней части ирригатора или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB с устройством и с источником питания
Поврежден шнур USB	Используйте другой шнур USB с таким же разъемом, рассчитанный на ток 1 А

Вода вытекает из места соединения насадки или резервуара для воды с ирригатором

Возможная причина	Решение
Насадка установлена не плотно	Установите насадку в место установки насадки до щелчка
Насадка повреждена	Замените поврежденную насадку на новую
Слишком много воды в резервуаре	Не заполняйте резервуар полностью, следите, чтобы уровень воды был на 1 сантиметр ниже ободка резервуара

Вода не поступает

Возможная причина	Решение
Насадка засорилась	Хорошо промойте насадку, вставьте ее в прибор и встряхните резервуар перед использованием
Налет накопился на внутренних поверхностях прибора	Произведите очистку ирригатора так, как описано в разделе «Чистка и обслуживание»
Насадка не закреплена	Установите насадку в место установки насадки до щелчка
Вы наклоняете ирригатор слишком сильно	Струя воды не будет выходить, если сильно наклонять ирригатор, поэтому держите устройство под углом не более 45 градусов



Не снимается насадка

Возможная причина	Решение
Вы не нажали на кнопку снятия насадки	Нажмите на кнопку снятия насадки, затем потяните насадку на верх. Установка и снятие насадки в новом ирригаторе могут быть затруднительными

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB ==5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,8 А*ч (2,96 Вт*ч)
5. Частота пульсации струи:
 - режим «Норма»: 1800 имп/мин;
 - режим «Мягко»: 800 имп/мин;
 - режим «Пульс»: 1300 имп/мин;
 - режим «Вручную»: 800–1800 имп/мин
6. Давление воды: от 3,8 до 7,6 бар (в зависимости от выбранного режима)
7. Емкость резервуара для воды: 200 мл
8. Время зарядки: 2–3 ч
9. Режимов работы: 4
10. Автоотключение: через 2 мин
11. Время работы ирригатора: 20 мин
12. Длина шнура USB: 0,9 м
13. Размер устройства: 73 × 73 × 295 мм
14. Размер упаковки: 78 × 78 × 225 мм
15. Вес нетто: 0,27 кг
16. Вес брутто: 0,32 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Ланьсан Криейтив Текнолэджи Ко., Лтд. Фэкттори №702, Билдинг А01, №99, Тинцзян Роуд, Тинцзян Таун, Мавэй Дистрикт, Фучжоу Сити, Фуцзянь Провинс (Бизнес Локайшен: Мавэй Дистрикт, Фучжоу Сити), Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.



Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать кипяченую воду и регулярно проводить очистку, как это указано в разделе «Чистка и обслуживание».

Порча прибора вследствие использования других жидкостей помимо воды и специальных растворов для ирригатора не является гарантийным случаем.

Иrrигатор для полости рта
КТ-2958

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Людям, которые недавно перенесли периодонтальную или стоматологическую хирургическую операцию, а также тем, кто проходит курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, перед применением ирригатора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним по этому поводу.
3. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
4. Используйте ирригатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте ирригатор в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB. Не тяните за шнур USB при отключении от источника питания.



7. Не используйте устройство, если шнур USB, или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования, промывайте и просушивайте резервуар для воды и насадку.
13. Температура воды или раствора должна быть не выше 40 °C.
14. Не допускайте падения ирригатора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.

Иrrигатор для полости рта
КТ-2958

16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнуря USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в ирригатор, в область разъема шнуря USB, на сам шнур и на органы управления.
20. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
21. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
22. После зарядки отсоедините шнур USB сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87