



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**USER MANUAL**

**Складное массажное кресло-шезлонг**  
**Folder massage-lounge chair**

**PLANTA MC-2500**



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



[www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

## **ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

Уважаемый Покупатель,  
благодарим Вас за выбор **складного массажного кресла PLANTA MC-2500!**

Массажное кресло-шезлонг PLANTA MC-2500 позволит Вам наслаждаться массажем в любое время, не выходя из дома. Массажное кресло MC-2500 помогает успокоить нервную систему, снять стресс, быстро восстановить силы, расслабить мышцы шеи, спины, бедер, ног и ягодиц.

Благодаря складной конструкции кресло-шезлонг легко сложить и убрать на время хранения и раскладывать только по необходимости.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что это массажное кресло Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажного кресла, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: [www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

 **ВНИМАНИЕ! МАССАЖНОЕ КРЕСЛО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**

## Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности:

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки кресла не тяните за кабель.
- Не используйте устройство дольше, чем 15 минут. Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, в бассейне, сауне и вне помещения.
- НИКОГДА не используйте кресло во время сна и не засыпайте во время выполнения массажа.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажное кресло.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Не размещайте массажное кресло на солнце или в месте с температурой выше 40 °С, так как это приведет к выцветанию материала, из которого изготовлено массажное кресло, а также к возможному выведению из строя внутреннего механизма.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если во время или после использования устройства у Вас появилась боль, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя накрывать работающее устройство подушками, одеялами и т.п.
- Не допускайте зажимания провода питания или попадание его под основание кресла.
- Если у Вас длинные волосы, не позволяйте длинным волосам закрывать область массажа, чтобы избежать случайного запутывания.
- Не вставайте на кресло и не кладите на него тяжелые предметы.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устрой-

ства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

- **Максимальный вес пользователя – 150 кг.**



### **ВНИМАНИЕ!**

- Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при регулировке положения тела.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм прилагайте к креслу только легкое усилие.

### **Предупреждения:**

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков, любые болезни позвоночника, спины и суставов и др.;
- проходите реабилитацию после операции.


### **Примечание:**

Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.


## Детали и элементы прибора

### Комплектация:

1. Массажное кресло
2. Адаптер питания

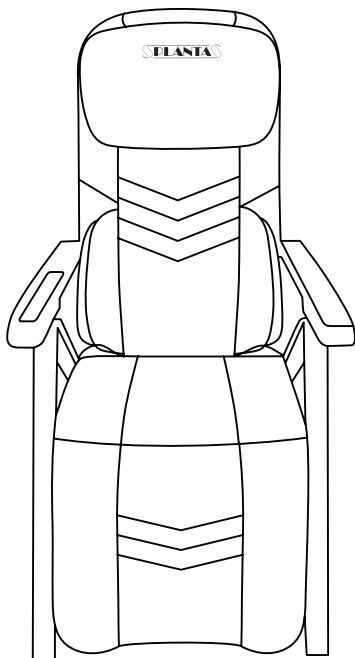

1

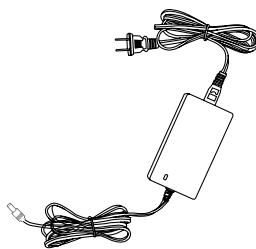


2

## Описание массажного кресла:




## Внутренний массажный механизм

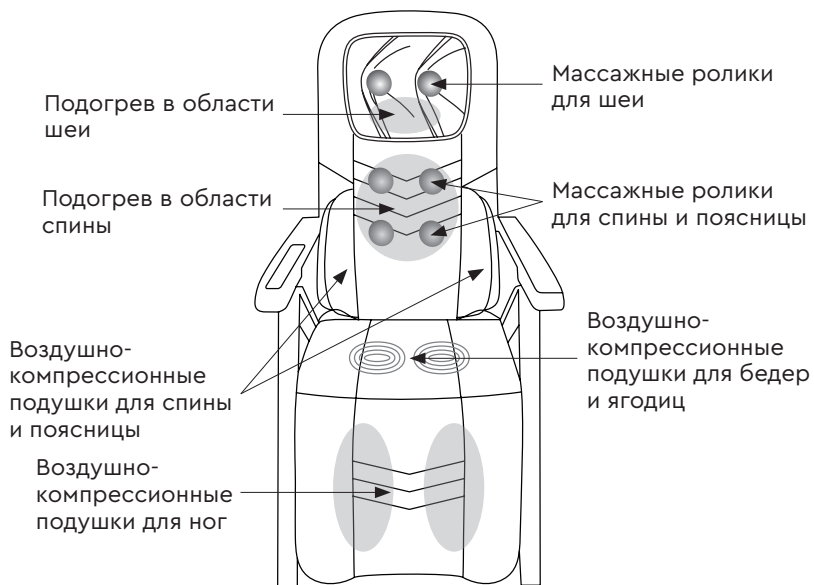




## Панель управления

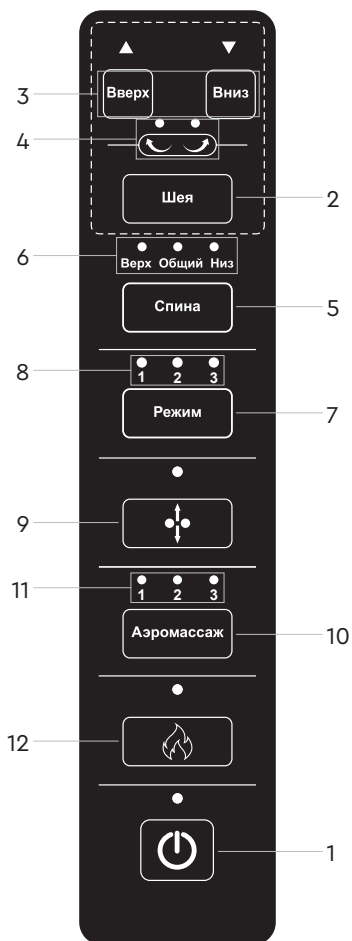

-  **Кнопка включения/выключения работы массажного кресла.**



Для включения массажного кресла нажмите кнопку один раз, для выключения нажмите кнопку повторно.

-  **Кнопка включения/выключения массажа в области шеи, а также выбора направления движения массажных роликов в области шеи.**

Для активации роликового массажа в области шеи нажмите кнопку один раз. Для изменения направления движения массажных роликов в области шеи

нажмите кнопку повторно. Для отключения массажа в области шеи нажмите кнопку третий раз.


3.  **Кнопки активации движения массажных роликов в области шеи вверх или вниз.**


После активации роликового массажа в области шеи Вы можете выбрать комфортное для Вас положение массажных роликов. Нажимайте кнопку «  » или «  » для движения роликов в выбранном направлении от исходного положения до остановки роликов в нужной области массажа. Затем отпустите кнопку. Новое положение массажных роликов будет зафиксировано.


4.  **Индикаторы, отображающие активацию выбранного направления движения массажных роликов в области шеи.**


5.  **Кнопка включения/выключения режима массажа в области спины и поясницы, а также выбора зоны массажа.**


Для активации роликового режима массажа в области спины и поясницы нажмите кнопку один раз.

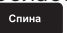
Вы можете выбрать один из 3-х режимов роликового массажа в области спины – «Верх», «Общий» или «Низ». Для этого нажимайте кнопку «  », пока не будет выбран комфортный для Вас режим. Выбранный режим будет подсвечен соответствующим индикатором на панели управления.

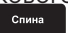Для отключения роликового режима массажа в области спины и поясницы нажимайте кнопку «  », пока не погаснут световые индикаторы, отображающие активацию выбранной зоны массажа в области спины, и массаж не будет остановлен.

6.  **Световые индикаторы, отображающие активацию выбранной зоны массажа в области спины и поясницы.**

7.  **Кнопка включения/выключения и выбора одного из 3 автоматических режимов общего массажа всего тела.**

Для активации одного из 3-х режимов нажимайте кнопку «  », пока не загорится световой индикатор необходимого режима массажа.

Для отключения автоматического режима массажа всего тела нажимайте кнопку «  », пока не погаснут световые индикаторы, отображающие активацию выбранного автоматического режима, и массаж не будет остановлен.

**Примечание.** Автоматические режимы включают в себя сочетание общего воздушно-компрессионного массажа всего тела в комбинации с роликовым массажем спины и поясницы, различающиеся по интенсивности воздействия воздушно-компрессионных подушек и массажных роликов.

### Автоматические режимы:


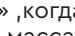
**Режим 1: Тонизирующий.** Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа всего тела с переменным сжатием и расширением компрессионных подушек на средней скорости в комбинации с роликовым массажем в области спины и поясницы.

**Режим 2: Бодрящий.** Данный режим предусматривает интенсивный воздушно-компрессионный массаж всего тела с переменным сжатием и расширением компрессионных подушек в комбинации с роликовым массажем в области спины и поясницы.


**Режим 3: Релакс.** Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа всего тела с переменным сжатием и расширением компрессионных подушек с низким уровнем интенсивности в комбинации с роликовым массажем в области спины и поясницы.


8.  Световые индикаторы, отображающие активацию выбранного автоматического режима массажа всего тела.

9.  Кнопка фиксации роликового массажа в области спины и поясницы в определенной точке.


При желании Вы можете зафиксировать роликовый массаж в определённой точке. Для этого после выбора режима «Спина» или одного из 3-х автоматических режимов нажмите кнопку «», когда ролики будут находиться в точке, которую Вы хотели бы выбрать для массажа. Данная область массажа зафиксируется и продолжится роликовый массаж данной области. При этом режим «Спина» или один из автоматических режимов остановит свою работу. Последующее нажатие на кнопку «» отключает работу роликового массажа. Последующее нажатие возобновит работу роликов на том месте, где они остановились в предыдущий раз.

**Примечание!** Данная функция совместима с функцией аэромассажа.

10.  Кнопка включения/выключения режима воздушно-компрессионного массажа всего тела и выбор интенсивности воздействия компрессионных массажных подушек (1, 2 или 3 уровень интенсивности).

Для активации функции «Аэромассаж» нажмите кнопку «» один раз. Запустится работа воздушно-компрессионного массажа всего тела на 2-ом уровне интенсивности. Повторное нажатие активирует 1-ый уровень интен-

сивности, последующие нажатия – 2-й и 3-й уровни интенсивности, соответственно. Последующее нажатие приведет к отключению функции аэромассажа.

11.  Световые индикаторы, отображающие активацию выбранного уровня интенсивности воздушно-компрессионного массажа всего тела (1, 2 или 3 уровень).

12.  Кнопка включения/выключения функции подогрева в области спины и шеи.

Для активации подогрева нажмите кнопку «  ». Для отключения подогрева нажмите кнопку повторно.

**Примечание.** Предустановленное время работы всех режимов массажа – 15 мин. При необходимости Вы можете увеличить время массажа, активировав повторно нужный Вам режим и функции.

 **Помните,** что время полезного действия массажа составляет не более 15 минут.

## Эксплуатация массажного кресла

Внимательно прочтите инструкцию и указания по технике безопасности.

1. Извлеките из коробки массажное кресло. Удалите все упаковочные материалы.
2. Внимательно осмотрите массажное кресло на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
3. Убедитесь, что вокруг кресла достаточно пространства для его раскладывания:
  - не менее 80 см позади кресла;
  - не менее 50 см перед креслом.
4. Встаньте позади массажного кресла, опустите оба рычага фиксации угла наклона спинки кресла (рис. 1), затем нажмите с усилием на оба поручня и разложите кресло (рис. 2):

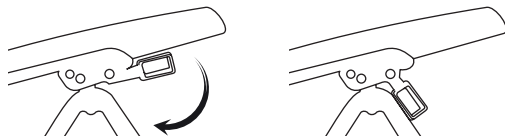


Рис. 1

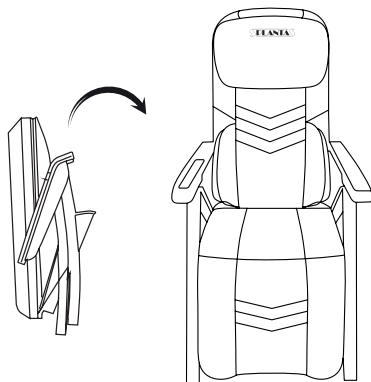



Рис. 2





5. Установите кресло на ровной горизонтальной поверхности.

6. Выберите комфортный уровень угла наклона кресла. Для этого опустите оба рычага фиксации угла наклона спинки кресла, затем нажмите на спинку кресла или приподнимите ее до комфортного положения. После этого приподнимите рычаги фиксации к поручням. Положение кресла будет зафиксировано.

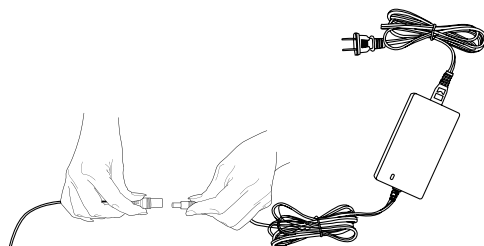


7. Соедините провод питания на массажном кресле с разъемом питания на сетевом адаптере:



8. Подключите адаптер к розетке электрической сети 220 В.
9. Нажмите кнопку «  » на панели управления для включения устройства.
10. Выберите нужный режим массажа («Спина», «Шея», «Аэромассаж» или 1 из 3-х автоматических режимов) нажатием на соответствующую кнопку на панели управления (см. п. «Панель управления»).
11. С помощью кнопок на панели управления выберите комфортный для Вас уровень интенсивности массажа в области шеи, спины и поясницы.
12. При желании зафиксируйте область массажа в определённой точке с помощью кнопки «  » и активируйте функцию подогрева в области спины и шеи с помощью кнопки «  ».
13. Предустановленное время массажа составляет 15 минут. Нажатие на кнопку «  » во время работы массажного кресла прерывает цикл работы программы и отключает массажное кресло.

**Примечание!** После выключения кресла массажные ролики и компрессионные подушки в области поясницы некоторое время продолжают работу для фиксации положения, при котором не будет ощущаться дискомфорт от роликов при использовании кресла без активации массажа.

14. По завершении массажа выключите прибор из розетки.
15. Встаньте с массажного кресла и при необходимости сложите его. Для этого опустите рычаги фиксации угла наклона кресла и потяните с небольшим усилием оба поручня к спинке кресла.

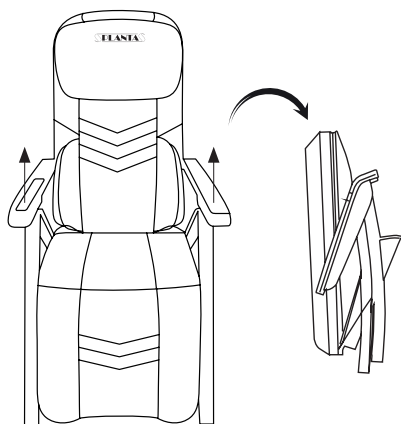

**ВНИМАНИЕ!** При использовании кресла следите, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат под креслом.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Не забывайте отключить прибор от сети, если он не используется.
- Не пытайтесь вставать на кресло.
- Не используйте функции массажа или подогрева непрерывно более 15 минут. Полезное действие массажа составляет 15 минут – что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

## Перемещение кресла

**Примечание!** Перемещать кресло с помощью транспортировочных колесиков можно только в сложенном виде.

Перед перемещением массажного кресла убедитесь, что провод питания отсоединен от сети. Возьмитесь за ручку, расположенную на задней части спинки кресла, слегка наклоните его на себя и переместите кресло в нужное место, используя транспортировочные ролики, расположенные внизу задней части спинки кресла.





## Уход и хранение

Правильное обслуживание поможет поддерживать массажное кресло в хорошем техническом состоянии и продлить его срок службы. Неправильное же техническое обслуживание может привести к повреждению или сокращению срока службы массажного кресла.

**Предупреждение:** перед очисткой или обслуживанием массажного кресла обязательно отключите вилку питания.

- Регулярно удаляйте пыль влажной тряпкой.
- Перед чисткой выключите устройство и отключите его от сети, дайте креслу остыть.
- Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.



**Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.**

- Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.



**Внимание! Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.**

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань.
- Во избежание поломки не сворачивайте шнур вокруг кресла.

## Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Устройство не подключено	Убедитесь, что устройство включено в сеть
		Проверьте правильность подключения адаптера
	Устройство включено неправильно	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Устройство неожиданно отключилось	Вы используете массажер более 15 мин	Это нормально, устройство исправно работает
Массажные ролики двигаются слишком медленно	Слишком большое давление на массажные ролики	Уменьшите давление на массажные ролики
Слышен громкий звук во время использования кресла	Звук вызван работой массажного механизма	Это нормальная ситуация при работе массажера

## Технические характеристики

Модель: МС-2500

Питание: 220 В, 50–60 Гц

Мощность: 60 Вт

Размер кресла в разложенном виде: 77 x 59 x 147 см


Размер кресла в сложенном виде: 100 x 59 x 28 см

Кол-во массажных роликов: 12 шт.


Вес нетто: 21 кг

Максимальный вес пользователя: 150 кг

Материал: ABS-пластик, полиэстер

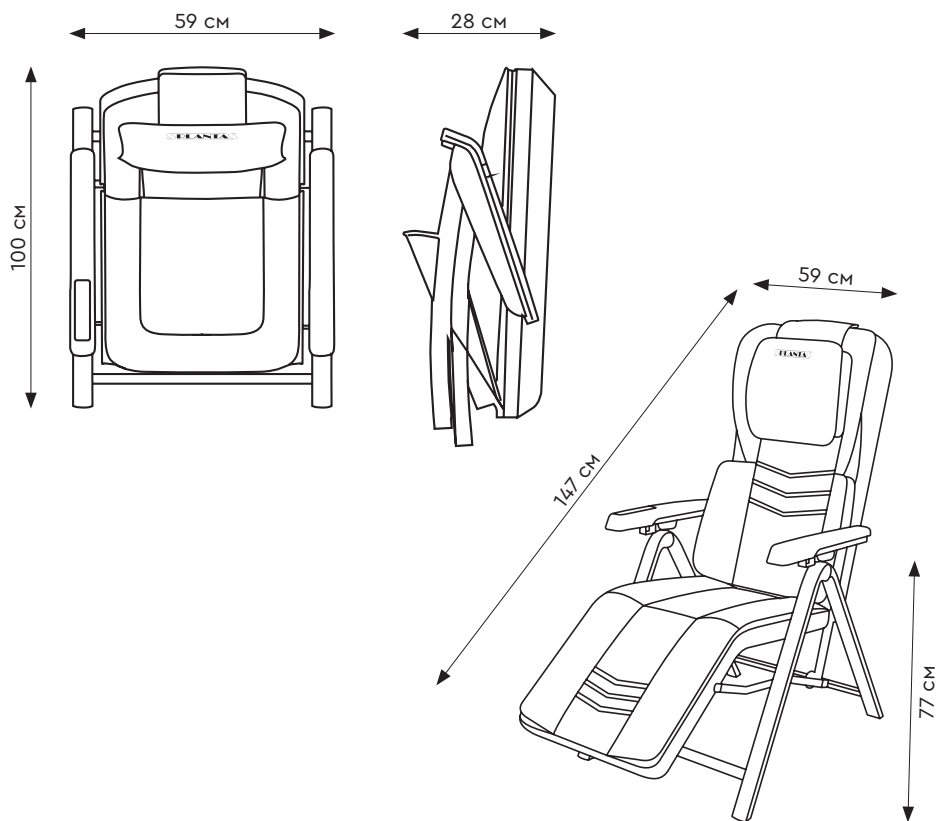

## Гарантийный талон

<p>Условия гарантии</p> <p>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</p> <p>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</p> <p>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механических повреждений;</li> <li>- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li> <li>- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li> </ul> <p>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</p> <p>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</p>	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p>
<p>6. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Чжэцзян Мондиал Электроник Текнолоджи Ко., Лтд»</p>	<p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:</p> <p>_____</p>
<p>Адрес: NO.6 ЮНШЭН РОАД, ПОДРАЙОН ХАЙРУНЬ, ОКРУГ САНЬМЭНЬ, ГОРОД ТАЙЧЖОУ, 317100, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»</p>	<p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:</p> <p>_____</p>
<p>Адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей:  <a href="https://www.planta-russia.ru">https://www.planta-russia.ru</a>          +7 (495) 137-80-32</p> <p>Товар сертифицирован</p> <p style="text-align: right;"><b>класс защиты I</b> </p>	<p style="text-align: right;">М.П.</p>