

PLANTA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ USER MANUAL

Массажное кресло-качалка
Massager rocking chair

PLANTA MRC-1200



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Применение и назначение

Уважаемый Покупатель, благодарим Вас за выбор **массажного кресла-качалки PLANTA!**

Массажное кресло-качалка PLANTA позволит Вам наслаждаться массажем в любое время, не выходя из дома. Массажное кресло-качалка помогает успокоить нервную систему, снять стресс, быстро восстановить силы, расслабив мышцы шеи, спины, бедер и ягодиц.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что это массажное кресло-качалка Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажного кресла-качалки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta-russia.ru

 **ВНИМАНИЕ! МАССАЖНОЕ КРЕСЛО-КАЧАЛКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**

Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности.

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель.
- Не используйте устройство дольше, чем 20 минут. Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, в бассейне, сауне и вне помещения.
- НИКОГДА не используйте кресло во время сна и не засыпайте во время выполнения массажа.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажное кресло-качалку.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеуказанного медицинского оборудования.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если во время или после использования устройства у Вас появилась боль, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя накрывать работающее устройство подушками, одеялами и т.п.
- Не допускайте зажимания провода питания или попадание его под полозья кресла-качалки.
- Если у Вас длинные волосы, не позволяйте длинным волосам закрывать область массажа, чтобы избежать случайного запутывания.
- Не вставайте на кресло и не кладите на него тяжелые предметы.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 20 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.
- **Максимальный вес пользователя – 150 кг.**



ВНИМАНИЕ!

- Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при регулировке положения тела.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм прилагайте к креслу только легкое усилие.

Предупреждения:

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
- проходите реабилитацию после операции.

Примечание:


Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.

Описание прибора




Пульт дистанционного управления

1. Кнопка включения/выключения работы массажного кресла-качалки.
2. Кнопка выбора времени массажа (10, 20 или 30 минут).
3. Кнопка включения/выключения режима массажа в области шеи (съемный подголовник).
4. Кнопка выбора направления движения массажных роликов в области шеи.
5. Кнопка включения/выключения режима Постукивающего массажа.
6. Регулировка интенсивности воздействия массажных роликов в режиме Постукивающий массаж.
7. Кнопка включения/выключения функции подогрева в области спины и шеи.
8. Кнопка включения/выключения режима массажа Шиацу.
9. Кнопка выбора направления движения массажных роликов в области спины.
10. Кнопка регулировки скорости движения массажных роликов (активна для режимов массаж «ШИАЦУ», массажа в области шеи и функции «ВИБРАЦИЯ»).
11. Кнопка включения/выключения функции вибромассажа для области бедер и ягодиц, а также регулировки интенсивности воздействия вибромотора.
12. LED-дисплей. Попеременно отображается область работы активных функций, а также скорость массажа.

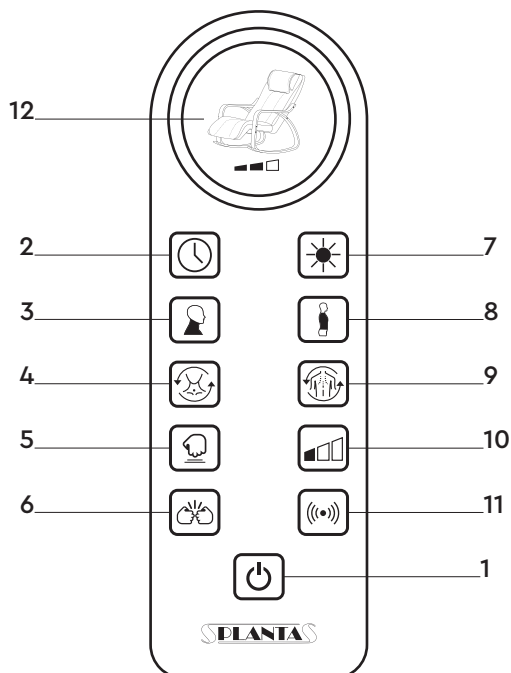


Комплектация массажного кресла-качалки


Массажное сидение
с кармашком для пульта ДУ

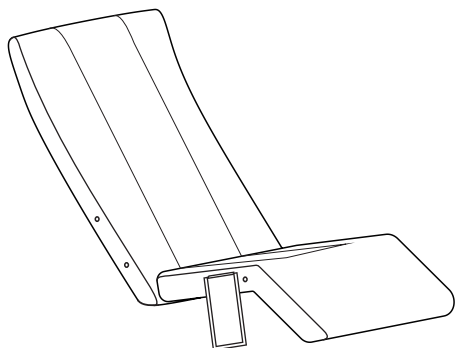


Съемная накладка на сидение

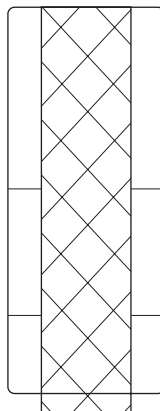


Съемный массажный подголовник

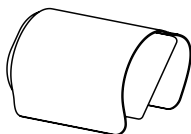


Подушка под поясницу

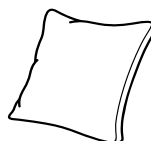


Правая опора каркаса

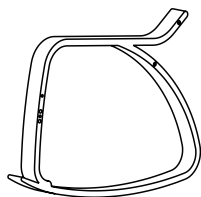


Левая опора каркаса

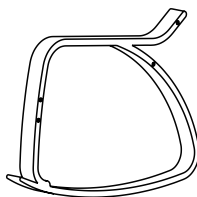


Перекладина

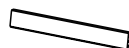

Пульт управления

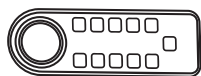


Шнур питания с сетевым адаптером

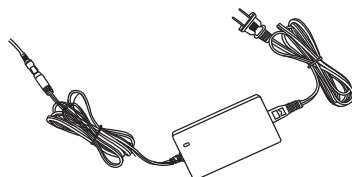

Комплектующие для сборки

1. Болт М6Х83 (6 шт.)
2. Болт М6Х108 (2 шт.) с гайкой-бочонком М6 (2 шт.)
3. Шестигранный ключ (1 шт.)

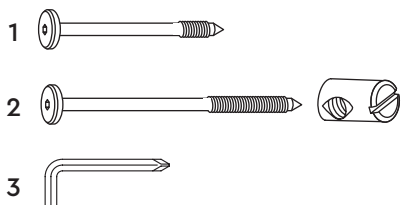

Инструкция по сборке



Внимательно прочтите все инструкции и указания по технике безопасности.



- Извлеките из коробки все элементы массажного кресла-качалки. Удалите все упаковочные материалы и наклейки.
- Внимательно осмотрите массажное кресло-качалку на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.

ШАГ 1:

1. Положите массажное сидение на бок, возьмите одну из опор каркаса (соответствующую правильной стороне сидения) и совместите отверстия на опоре каркаса с отверстиями на массажном сидении.
2. С помощью шестигранного ключа и трех болтов М6Х83 прикрепите опору каркаса к массажному сидению.
3. Возьмите перекладину и с помощью шестигранного ключа и болта М6Х108 прикрепите перекладину к опоре каркаса, используя гайку-бочонок М6, фиксируя перекладину с задней части спинки кресла.


ШАГ 2:

1. Переверните массажное сидение с закрепленными элементами на другой бок.
2. Возьмите вторую опору каркаса и совместите ее отверстия с отверстиями на сидении и закрепите с помощью шестигранного ключа и трех болтов М6Х83, а также с перекладиной, используя М6Х108 и гайку-бочонок М6.

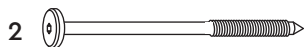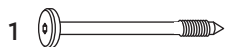


Шаг 1

Шаг 2

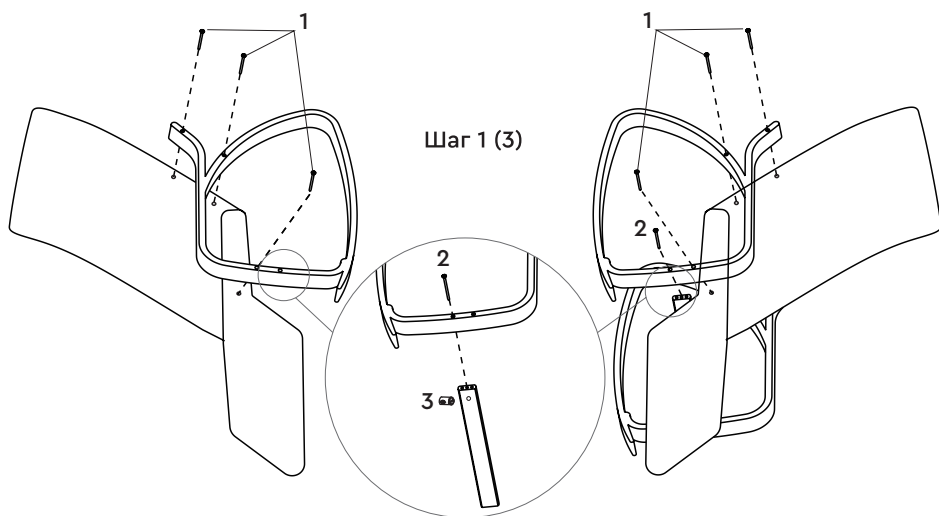


ШАГ 3:

Закрепите съемную накидку на сидении при помощи молнии сверху и липучки снизу.

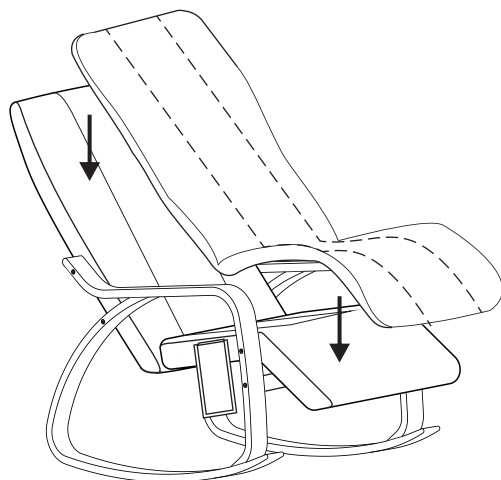


ШАГ 4:

Присоедините массажный подголовник к сидению при помощи липучки, находящейся на задней части спинки кресла. Высоту подголовника можно регулировать при помощи липучки, прикрепляя подголовник выше или ниже.

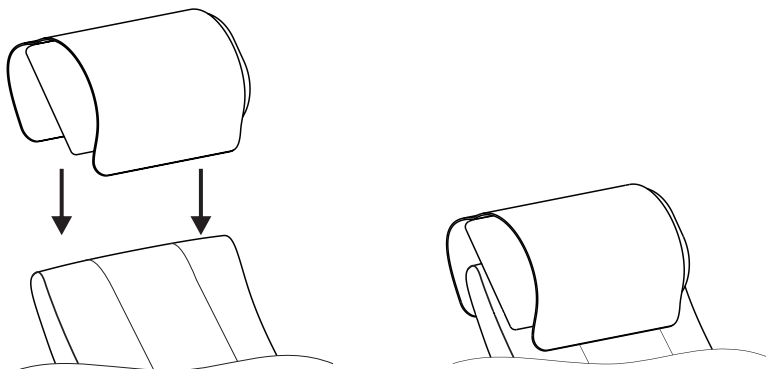


ШАГ 5:

Подключите разъем подголовника в соответствующий разъем в верхней части сидения.

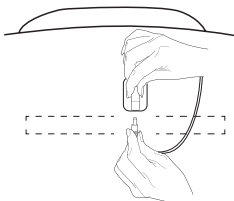

ШАГ 6:

Подсоедините к разъемам на нижней части массажного сидения сетевой адаптер и пульт управления.

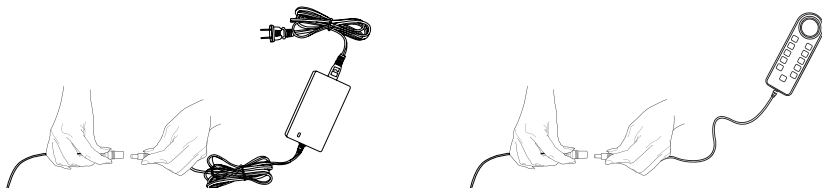


Использование

1. Осмотрите массажное кресло-качалку.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений на устройстве и шнуре питания.
3. Подключите адаптер к розетке электрической сети 220 В.
4. Удобно расположитесь на кресле-качалке.

Регулировка подставки для ног:

Поставка для ног имеет 5 уровней наклона. Для выбора одного из 5 положений необходимо поднять подставку вверх до желаемого уровня до щелчка. Чтобы опустить подставку вниз, поднимите ее до максимально возможного положения, а потом опустите.

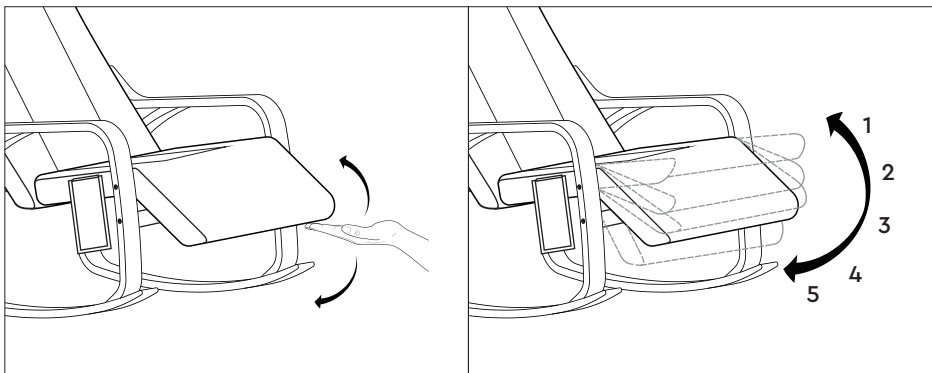


Регулировка высоты подголовника:

Высоту подголовника можно регулировать при помощи липучки, прикрепляя подголовник выше или ниже к сидению.

Выбор интенсивности массажа в области шеи:

Вы можете убрать съемную накидку для повышения интенсивности массажа:

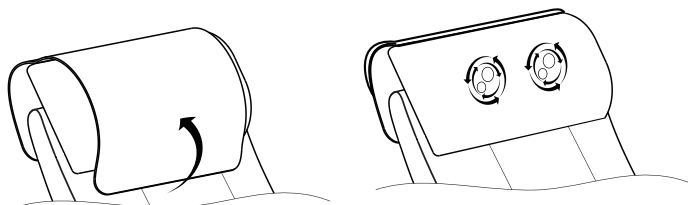

5. Нажмите кнопку  на пульте ДУ для включения устройства. Кнопка подсветится. По умолчанию активируется автоматический режим. Данный режим предусматривает совмещение следующих техник массажа: массаж Шиацу и разминающий массаж шеи на минимальной скорости в комбинации с подогревом спины.
6. Выберите нужный режим массажа нажатием на соответствующую кнопку:
- **Режим ПОСТУКИВАНИЕ** (постукивающий массаж в области спины)
 - Нажмите кнопку  для выбора режима массажа ПОСТУКИВАНИЕ. Кнопка подсветится.
 - Нажимайте кнопку  для выбора интенсивности воздействия массажных роликов (1, 2 или 3 уровень интенсивности), пока не выберете комфортный для Вас уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ: режим массажа ПОСТУКИВАНИЕ предусматривает автономную работу, а также совместно с другими техниками массажа:

- режимом массажа в области ШЕИ (с возможностью выбора одной из 3х скоростей работы и направления движения массажных роликов);
- режимом массажа ШИАЦУ (с возможностью выбора одной из 3х скоростей работы и направления движения массажных роликов);
- функцией ВИБРАЦИЯ (с возможностью выбора одного из 3х уровней интенсивности воздействия и одной из 3х скоростей работы);
- функцией ПОДОГРЕВ.
- Для выключения режима ПОСТУКИВАНИЕ нажмите кнопку  повторно.
- **Режим ШИАЦУ** (глубокое разминание мышц спины)

Данный режим активируется при включении массажного кресла. Для включения массажа ШИАЦУ нажмите кнопку  повторно – кнопка перестанет гореть на пульте ДУ.

- Для повторного выбора режима массажа ШИАЦУ нажмите кнопку  . После нажатия кнопка подсветится.
- Нажмите кнопку  для выбора направления движения массажных роликов (по часовой стрелке или против).
- С помощью кнопки  на пульте дистанционного управления вы можете

выбрать одну из 3х скоростей вращения массажных роликов.

ПРИМЕЧАНИЕ: режим массажа ШИАЦУ предусматривает автономную работу, а также совместно с другими техниками массажа:

- режимом массажа в области ШЕИ (с возможностью выбора одной из 3х скоростей работы и направления движения массажных роликов);
 - режимом массажа ПОСТУКИВАНИЕ (с возможностью выбора одного из 3х уровней интенсивности воздействия);
 - функцией ВИБРАЦИЯ (с возможностью выбора одного из 3х уровней интенсивности воздействия и одной из 3х скоростей работы);
 - функцией ПОДОГРЕВ.
- **Режим массажа В ОБЛАСТИ ШЕИ** (съемная массажная подушка)

Данный режим активируется при включении массажного кресла. Для выключения массажа в области шеи нажмите кнопку  – кнопка перестанет гореть на пульте ДУ.

- Для повторного выбора режима массажа в области шеи нажмите кнопку . После нажатия кнопка подсветится.
- Нажмите кнопку  для выбора направления движения массажных роликов (по часовой стрелке или против).
- С помощью кнопки  на пульте дистанционного управления вы можете выбрать одну из 3х скоростей вращения массажных роликов.

ПРИМЕЧАНИЕ: режим массажа в области шеи предусматривает автономную работу, а также совместно с другими техниками массажа:

- режимом массажа ШИАЦУ (с возможностью выбора одной из 3х скоростей работы и направления движения массажных роликов);
- режимом массажа ПОСТУКИВАНИЕ (с возможностью выбора одного из 3х уровней интенсивности воздействия);
- функцией ВИБРАЦИЯ (с возможностью выбора одного из 3х уровней интенсивности воздействия и одной из 3х скоростей работы);
- функцией ПОДОГРЕВ.

- **Функция ВИБРАЦИЯ**

- Нажмите кнопку  для активации вибрации в области бедер и ягодиц. Кнопка подсветится.
- Нажмите повторно кнопку  для выбора интенсивности воздействия вибромотора (1, 2 или 3 уровень интенсивности), пока не выберете комфортный для Вас уровень.
- С помощью кнопки  на пульте дистанционного управления вы можете выбрать одну из 3х скоростей работы вибромотора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция ВИБРАЦИЯ предусматривает автономную работу, а также совместно с другими техниками массажа:

- режимом массажа в области ШЕИ (с возможностью выбора одной из 3х скоростей работы и направления движения массажных роликов);
- режимом массажа ПОСТУКИВАНИЕ (с возможностью выбора одного из 3х уровней интенсивности воздействия);
- режимом массажа ШИАЦУ (с возможностью выбора одной из 3х скоростей работы и направления движения массажных роликов);
- функцией ПОДОГРЕВ.

- **Функция ПОДОГРЕВ**

- Нажмите кнопку  для активации подогрева в области шеи и спины. Кнопка подсветится.

Для выключения режима подогрева нажмите кнопку  повторно – кнопка перестанет гореть на пульте ДУ.

7. Через 20 минут работы кресло выключится автоматически.
8. Нажатие на кнопку  во время работы прерывает цикл работы программы и отключает массажное кресло-качалку.
9. По завершении массажа выключите прибор из розетки.

 **ВНИМАНИЕ!** При раскачивании кресла следите, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат полозьями кресла.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Прибор автоматически отключается через 20 минут в целях безопасности. Эта функция не должна рассматриваться в качестве замены функции отключения. Не забывайте отключить прибор от сети, если он не используется.
- Не пытайтесь встать (стоять) на этом массажере.
- Не используйте функции массажа или подогрева непрерывно более 20 минут. Полезное действие массажа составляет 20 минут – что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

Внимание!

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполнять только уполномоченные представители производителя.
- Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!

Уход и Хранение

- Перед чисткой выключите устройство и отключите его от сети, дайте креслу-качалке остыть.
- Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.



Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

- Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.



Внимание! Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань.
- Во избежание поломки не сворачивайте шнур вокруг кресла.

Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Устройство не подключено	Убедитесь, что устройство включено в сеть
		Проверьте правильность подключения адаптера
	Устройство включено неправильно	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Устройство неожиданно отключилось	Вы используете массажер более 15 мин	Это нормально, устройство исправно работает
Массажные ролики двигаются слишком медленно	Слишком большое давление на массажные ролики	Уменьшите давление на массажные ролики
Слышен громкий звук во время использования кресла	Звук вызван работой массажного механизма	Это нормальная ситуация при работе массажера

Технические характеристики

Модель: MRC-1200

Питание: 220 В, 50–60 Гц

Мощность: 30 Вт

Размер прибора: 126 х 61,5 х 81 см


Размер подголовника: 41 х 21 см

Ширина сидения: 52 см

Вес нетто: 18,1 кг

Материал: ABS-пластик, полиэстер, пенополиуретан

Каркас – бук и береза

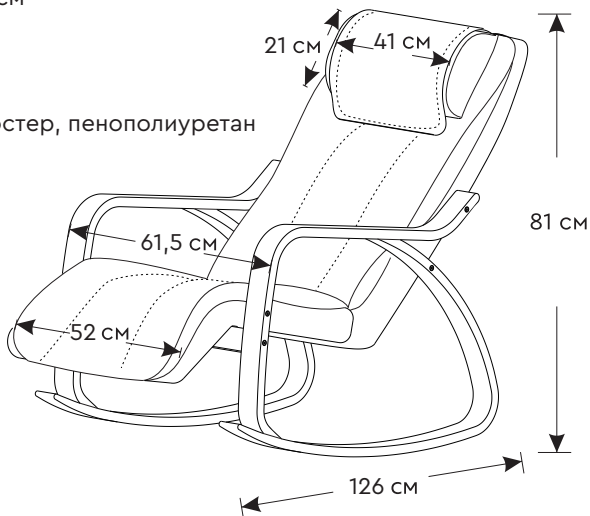

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm 5\text{--}10\%$.

Утилизация

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Гарантийный талон

Условия гарантии - В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. - Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. - Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. - Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. - Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. - Гарантийный срок – 1 год. - Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Фуан Мей Янг Электроникс Ко., Лтд.» Адрес: здание 689, Сюэтуань роуд, Шенгбей, город Фуан, Провинция Фуцзянь, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ» Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мятная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Товар сертифицирован 	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
---	---