



# Ирригатор для полости рта

## Инструкция по эксплуатации

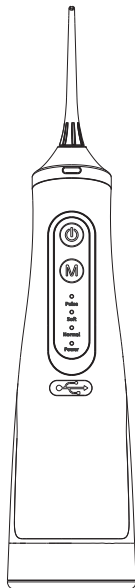

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

## Описание

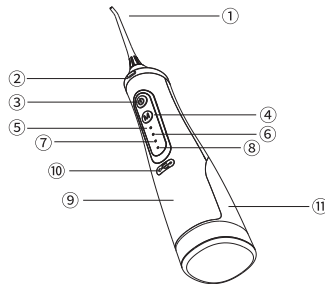

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ① Насадка                        | ⑦ Индикатор стандартного режима |
| ② Кнопка снятия насадки          | ⑧ Индикатор интенсивного режима |
| ③ Кнопка вкл/выкл                | ⑨ Корпус ирригатора             |
| ④ Переключатель режимов          | ⑩ Зарядный порт Type-C          |
| ⑤ Индикатор пульсирующего режима | ⑪ Резервуар для жидкости        |
| ⑥ Индикатор деликатного режима   |                                 |

## Основные параметры

Название продукта: Ирригатор для полости рта  
 Модель продукта: M2090  
 Размер продукта: 241 \* 84 \* 70 мм  
 Номинальное напряжение: 3,7 В  
 Напряжение зарядки: 5 В  
 Номинальная мощность: 6 Вт

## Техническое обслуживание


1. Пожалуйста, используйте воду или нейтральное моющее средство для чистки изделия. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, так как они могут повредить продукт. Не используйте горячую воду температурой выше 40°C.
2. Не погружайте корпус ирригатора в воду, протрите его сухой или влажной тканью или промойте проточной водой и протрите тряпкой насухо.
3. Рекомендуется менять насадки раз в 3 месяца.

## Установка и использование


1. Вставьте насадку в разъем, звук щелчка укажет на то, что она установлена правильно.



2. Откройте крышку резервуара для жидкости и наполните его водой, не заливайте теплую воду температурой выше 40°C, а также не помещайте в него соль, мазь или химикаты. После наполнения резервуара водой, закройте его крышкой.

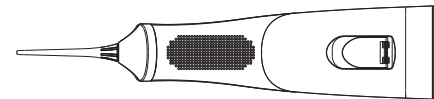


3. Нажмите на кнопку переключателя режимов, выберите подходящий, поместите насадку в полость рта и нажмите кнопку вкл, чтобы начать чистку зубов.

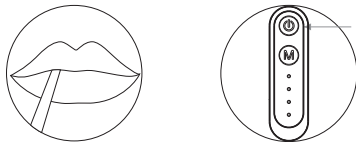

4. При использовании ирригатора слегка наклонитесь, держите рот немного приоткрытым для того, чтобы вода естественным образом могла вытекать в раковину. Не стойте прямо и не сидите во время чистки зубов, а также не держите рот широко открытым во избежание разбрызгивания воды.

Для лучшего эффекта, начинайте чистку с коренных (задних) зубов и постепенно передвигайтесь к передним. При чистке зубов вдоль линии десен, делайте небольшие паузы, чтобы убедиться в том, что область вокруг десен и между зубами полностью очищена.

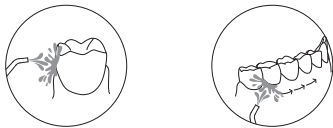

## 5. Выбор режима

Ирригатор по умолчанию включается в пульсирующем режиме. Изделие работает в четырех режимах: пульсирующем, деликатном, стандартном и интенсивном. Последовательность режимов обозначена сверху вниз. Для первой чистки рекомендуется использовать деликатный режим.

6. Руководство по зарядке устройства  
Откройте зарядный кабель Type-C и плотно вставьте один конец в разъем для зарядки устройства, а другой - в адаптер питания для зарядки. Если в зарядном отверстии устройства есть вода, вытрите ее, прежде чем подключать зарядный кабель Type-C.



Четыре световых индикатора мигают одновременно, указывая на низкий уровень заряда батареи



Четыре световых индикатора мигают поочередно, указывая на то, что устройство заряжается



Четыре световых индикатора не мигают, указывая на то, что устройство полностью заряжено

## Предупреждения

### Использование и хранение

- ⊗ 1. Не разбирайте изделие и не меняйте его составные части во избежание повреждения продукта или поражения электрическим током. Если вы это сделали, гарантия будет недействительной.
- ⊗ 2. Не используйте воду температурой выше 40 °C для наполнения резервуара для жидкости, чтобы избежать ожогов.
- ⊗ 3. Если устройство попало в воду при зарядке, сначала отсоедините адаптер питания от розетки, а затем извлеките изделие из воды во избежание риска поражения электрическим током.
- ⊗ 4. Не помещайте устройство под огонь или на обогрев, не заряжайте его при высокой температуре или влажности.

- ⊗ 5. Не оставляйте изделие во влажном месте на длительный срок и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- ⊗ 6. Не вынимайте вилку кабеля электропитания и зарядный штекер мокрыми руками во время зарядки устройства.
- ⊗ 7. Данный продукт не поставляется с адаптером питания, выходное напряжение вашего адаптера должно быть DC 5V, например, как у блока питания сотового телефона.  
Перед использованием адаптера проверьте, пожалуйста, соответствует ли его напряжение требованиям для местного использования.
- ⊗ 8. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отсоедините шнур питания и вилку для зарядки во избежание пожара или других опасностей.

## Распространенные неисправности

| Проблема                                                     | Возможные причины                                                                                | Решение                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резервуар для жидкости протекает                             | В резервуаре есть небольшое отверстие для впуска воздуха                                         | Отверстие для впуска воздуха предназначено для поддержания равновесия давления воздуха внутри резервуара для воды с давлением наружного воздуха, изделие можно использовать в вертикальном положении |
| Напор воды слишком слабый                                    | Недостаточная мощность<br><br>Отверстие для впуска воздуха в резервуаре заблокировано            | Полностью зарядите устройство и используйте<br><br>Прочистите отверстие для впуска воздуха или откройте крышку резервуара                                                                            |
| После зарядки устройство работает лишь в течение неск. минут | Срок службы аккумулятора исчерпан (~ 500 зарядок)<br><br>Неисправный зарядный кабель или адаптер | Обратитесь к своему дистрибьютору<br><br>Замените адаптер или кабель                                                                                                                                 |
| Устройство издает звуки без воды в резервуаре                | Сухой внутренний клапан                                                                          | Добавьте воды в заливное отверстие насадки устройства при включенном питании                                                                                                                         |