


PLANTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОМАССАЖНАЯ СКЛАДНАЯ ВАННОЧКА MFS-600



Мы на YouTube:

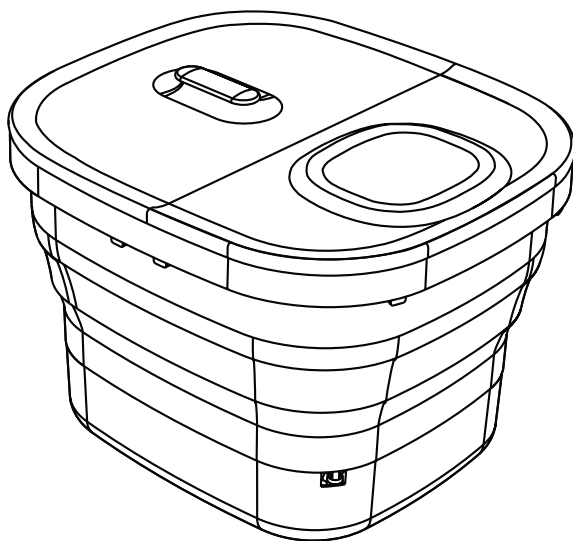

Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение продукции PLANTA!

С **гидромассажной ванночкой PLANTA MFS-600** Вы сможете наслаждаться спа-процедурой ухода за ногами в любое удобное для Вас время прямо у себя дома, а благодаря складной конструкции прибор не займет много места.

Процедуры с использованием гидромассажной ванночки с автоматическими роликами оказывают расслабляющее и стимулирующее действие, снимают напряжение и тяжесть в ногах, помогают избавиться от усталости.

Гидромассажная ванночка MFS-600 имеет 6 автоматических роликов, таймер с возможностью установки времени процедуры, а также функцию регулировки нагрева воды с точностью до 1 градуса в диапазоне от 35 до 48 °С. Пузырьковый массаж имитирует джакузи, благоприятное воздействие которого на организм неоспоримо. А подогрев усиливает положительный эффект гидромассажа и делает процедуру еще более приятной и расслабляющей.

 **ВНИМАНИЕ! ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННОЧКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**

Если Вы не уверены, что ванночка Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Устройство предназначено для личного использования.

Чтобы использовать все преимущества Вашей гидромассажной ванночки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего устройства.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: <https://planta-russia.ru>

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Обязательно вымойте ноги перед использованием устройства. Оставшиеся на ногах грязь или шерсть животных могут привести к засорению автоматических роликов и отверстий подачи пузырьков.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Не используйте устройство дольше, чем 30 минут. Если вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Ремонт прибора могут проводить только специалисты авторизованных сервисов.
- Не используйте прибор во время сна, управления машинами и оборудованием или другой работы, а также под воздействием алкоголя или других веществ.

- При использовании ванночки следите, чтобы устройство располагалось на сухой поверхности и вода не проникала в отсеки устройства, кроме чаши для гидромассажа. Не используйте данное устройство в ванной, душе, бассейне и не погружайте в воду.
- Нельзя оставлять работающее устройство, накрытое одеялами, тканями и т.п.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Не вставайте на ноги в ванночке. Устройство можно использовать только сидя.
- Не осуществляйте нажатие кнопок на панели устройства мокрыми руками.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в устройство.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется использовать прибор, если Вы:

- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- имеете различные патологии в острой фазе;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, вирусное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
- проходите реабилитацию после операции;
- имеете заболевания кожи;
- страдаете от острой или хронической респираторной недостаточности;
- страдаете от сердечной недостаточности.

Запрещено использовать прибор тем людям, у которых имеются:

- расстройства чувствительности кожи (например, пониженный болевой порог), любые кожные заболевания и воспаления, аллергические реакции на коже, а также открытые раны, ушибы и послеоперационные рубцы в процессе заживления;
- нарушения сердечно-сосудистой деятельности, инфаркт, инсульт;
- опухоли, онкология, воспаления внутренних органов и тканей;
- инфекционные заболевания, сепсис, повышенная температура тела;
- гипертонические и другие сосудистые заболевания;
- заболевания желудочно-кишечного тракта, камни в желчном пузыре или почках;
- нарушения свертываемости крови, любые заболевания вен и лимфоузлов, тромбофлебит и склонность к тромбоэмболическим заболеваниям;
- кардиостимулятор, инсулиновая помпа, имплантаты, протезы, штифты или спираль;

- при болезнях, протекающих с приступами (например, эпилепсия);
- диабет.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль в нижних конечностях, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- В устройстве имеются функции подогрева. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.
- Если в зоне массажа имеются украшения или металлические предметы, то перед использованием прибора их необходимо снять во избежание получения травм.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, гидромассаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызывать бессонницу.
- В зависимости от температуры воды рекомендованное время продолжительности процедуры гидромассажа составляет:


35 °C – 37 °C	25 минут
38 °C – 41 °C	15 минут
41 °C – 48 °C	10 минут

Акупунктурный роликовый массаж стоп

Принцип работы прибора основан на вращающихся массажных роликах, оказывающих благотворное воздействие на определённые точки подошвы стоп. Сами ролики разной конфигурации, что позволяет массировать все зоны стопы. Специальная роликовая конфигурация воздействует на всю поверхность ступни, боковой дуги, подошвы.

Рефлексология

Ступня является наиболее сложной чувствительной областью человеческого тела, на которой находятся рефлексорные зоны нервной системы. Зачастую массаж стопы с воздействием рефлексотерапии на акупунктурные точки избавляет от общей усталости, устраняет боль и помогает болезням покинуть ваш организм. Суть метода в том, что под воздействием на отдельные части тела оздоравливает весь организм в целом.

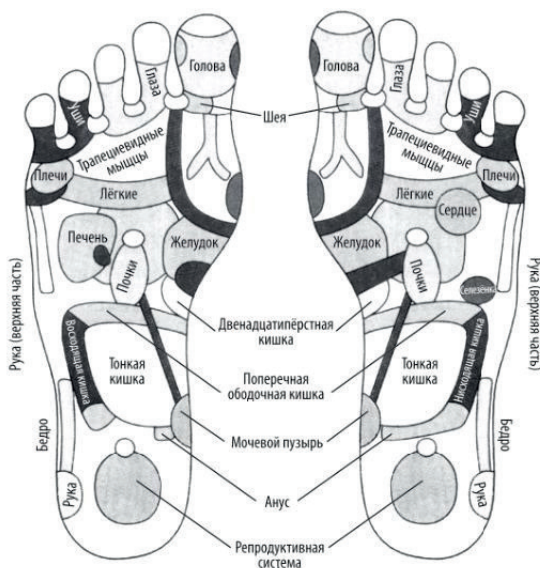

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Комплектация:




Описание прибора:

1. Корпус массажера
2. Съёмная крышка массажера
3. Съёмная панель управления
4. Ручка для переноски массажера
5. Автоматические массажные ролики – 6 шт.
6. Кнопка включения массажера
7. Отверстие для подачи пузырьков
8. Электронный дисплей, отображающий значения времени, оставшегося до окончания массажа и температуры воды
9. Транспортировочные ролики для перемещения массажера

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Примечание! В данной модели ванночки установлена съемная панель, которую при желании можно использовать в качестве пульта управления. Для этого извлеките ее из ниши для панели и используйте на расстоянии.

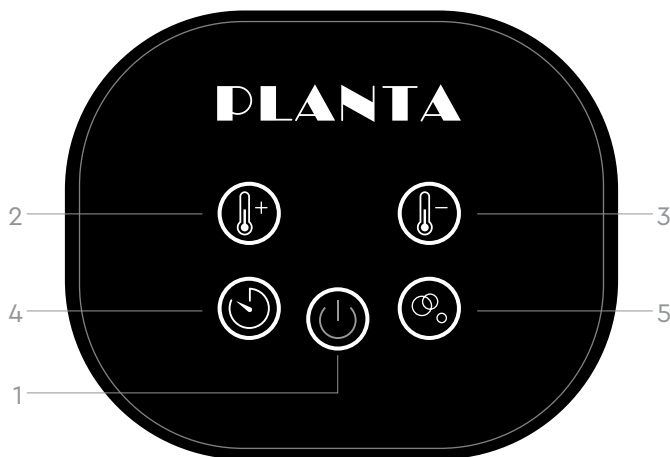

1. Кнопка включения/выключения устройства.

- Гидромассажная ванночка активирует свою работу как при нажатии кнопки на панели управления, так и с помощью отдельной кнопки, находящейся в нижней части корпуса устройства.
- При включении массажера активируется роликовый и пузырьковый массаж ног. На дисплее отобразится предустановленная температура нагрева воды до 42°C.
- Через 3 секунды после включения массажера электронный дисплей покажет текущую температуру налитой воды.

2. Кнопка увеличения температуры нагрева воды в диапазоне от 35°C до 48°C с шагом в 1 градус.

3. Кнопка уменьшения температуры нагрева воды в диапазоне от 35°C до 48°C с шагом в 1 градус.

4. Кнопка установки времени процедуры массажа в диапазоне от 10 до 60 минут с шагом в 10 минут.

- При установке времени массажа электронный дисплей будет отображать активированное время работы массажера.
- Через 3 секунды после активации необходимого времени электронный дисплей покажет текущую температуры налитой в ванночку воды.

5. Кнопка активации роликового и пузырькового массажа ног.


Нажмите на кнопку один раз для активации роликового и пузырькового массажа ног. Нажмите повторно для отключения массажа. Подогрев воды при этом будет оставаться активным.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

⚠ Внимание! Используйте прибор только в положении сидя. Запрещается вставлять на прибор!

⚠ Внимательно прочтите инструкцию и указания по технике безопасности.

1. Извлеките из коробки массажер. Удалите все упаковочные материалы.
2. Внимательно осмотрите массажер на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
3. Снимите крышку массажера.
4. Разложите ванночку, аккуратно потянув вверх за края прибора:

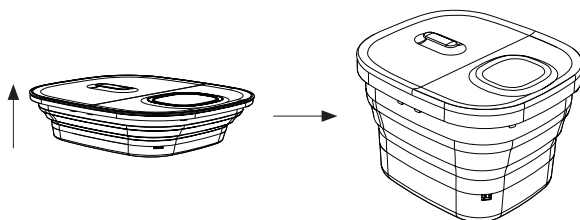

5. Подключите устройство к розетке электрической сети 220–240 В. Экран дисплея будет по умолчанию отображать «OF».
6. Поставьте ванночку перед собой, налейте в ванночку воду. Уровень воды должен быть выше на 2–3 см уровня отверстия для подачи пузырьков:



Примечание! Максимальный уровень воды не должен превышать отметки MAX на внутренней поверхности корпуса прибора.

⚠ ВНИМАНИЕ! ПРИБОР НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ВОДЫ! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛЕЙТЕ ВОДУ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА.

7. **ВКЛЮЧЕНИЕ.** Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку  на съемной панели управления или кнопку вкл/выкл, находящуюся в нижней части корпуса ванночки:
8. По умолчанию активируется работа роликового и пузырькового массажа ног. На дисплее отобразится предустановленная температура нагрева воды до 42°C.



9. С помощью кнопки  установите необходимое время массажа в диапазоне от 10 до 60 минут.
10. С помощью кнопок  и  установите комфортный уровень нагрева воды в диапазоне от 35°C до 48°C. В процессе нагрева на электронном дисплее будет отображаться текущее значение температуры воды в ванночке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Т.к. на температуру воды в том числе оказывает влияние внешняя среда, прибор может нагревать воду на 2–3°C больше выбранного значения. Диапазон колебаний 2–3°C от установленного значения является нормальным и допустимым и не говорит о неисправности прибора.

11. После окончания установленного времени прибор выключится автоматически. Для выключения прибора ранее предустановленного времени необходимо нажать на кнопку  на съемной панели управления или кнопку вкл/выкл, находящуюся в нижней части корпуса ванночки:



12. После завершения работы обязательно выключите прибор из сети питания и вылейте воду.

 **ВНИМАНИЕ! При использовании массажера будьте аккуратны и не ставьте ноги на края ванночки во время работы устройства, чтобы избежать складывания ванночки и разлива воды!**

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не забывайте отключить прибор от сети, если он не используется.
- Не пытайтесь вставать на массажер.
- Не используйте функции массажа или подогрева непрерывно более 15 минут. Полезное действие массажа составляет 15 минут – что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

 **Внимание!**

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполнять только уполномоченные представители производителя.
- Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте устройству остыть.
- Чистите корпус прибора только сухой тканью. Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен. При появлении засаленных участков на панели управления протрите его слегка влажной мягкой тканью и вытрите насухо. Не используйте химические или абразивные средства для чистки и ухода за прибором.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Устройство не подключено в сеть	Убедитесь, что устройство включено в сеть
	Слишком высокая температуры воды в приборе	Уменьшите температуру воды в приборе
На экране дисплея отображается «ЕЕ»	Поврежден сетевой шнур/не работает датчик температуры	Обратитесь в службу поддержки клиентов или авторизованный сервисный центр
Массажные ролики двигаются слишком медленно	Слишком большое давление на массажные ролики	Уменьшите давление на массажные ролики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: MFS-600

Размеры массажера в сложенном виде: 38 x 35 x 16 см

Размеры массажера в разложенном виде: 38 x 35 x 28 см


Питание: 220–240 В ~50 Гц

Мощность: 500 Вт

Объем резервуара: 9 л

Вес: 3 кг

Материал прибора: ABS – пластик

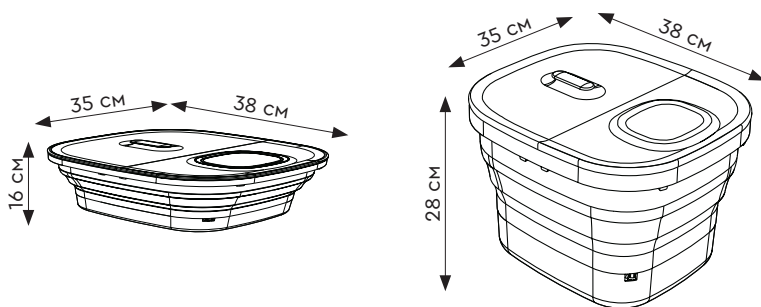

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm 5-10\%$.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата производства указана на упаковке. Изготовитель: Юнкан Кванг индастри энд трейд Ко., Лтд Адрес: 599 Дорога Донгду, зона экономического развития, город Юнкан, провинция Чжэцзян, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАИМ» Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Сделано в Китае	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	---

