




Kitfort

УДОВОЛЬСТВИЕ В ЗАБОТЕ!

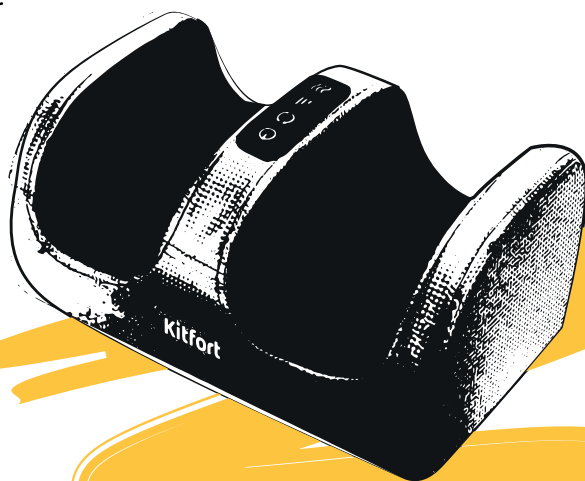

Penguin Pack
Массажер
КТ-2994

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10



Общие сведения

Массажер для ног КТ-2994 поможет снять усталость, уменьшить отеки и ослабить мышцы стоп и икр с помощью роликового массажа. Благодаря нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц. Интенсивность массажа настраивается: вы можете выбрать минимальную, среднюю или максимальную интенсивность. Также можно менять направление движения роликов массажера.

Такое разнообразие настроек поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный массаж.

Предустановленная длительность массажа — 15 минут. По прошествии этого времени массажер автоматически отключится.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. С помощью данного массажера вы можете провести массаж не только стоп, но и икроножных мышц. Прорабатывая стопы и икры при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж ног улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью.

Стильный дизайн массажера отлично впишется в любой интерьер.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-2994 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер для ног — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

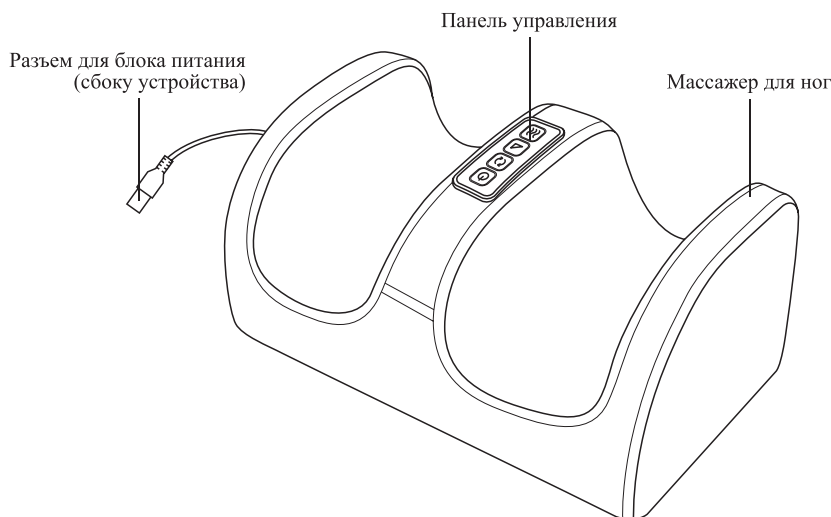

Панель управления

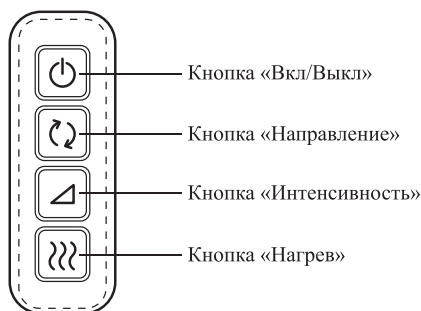

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер. После включения устройство начнет работу со средней интенсивностью массажа, функция нагрева будет включена. По истечении 15 минут массажер автоматически выключится. Вы можете остановить его работу раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Кнопка «Направление» циклически переключает направление движения массажных роликов. Направление вращения роликов меняется автоматически каждую минуту.

Кнопка «Интенсивность» циклически переключает интенсивность массажа. У массажера есть 3 интенсивности массажа: минимальная, средняя и максимальная. После включения массажер начинает работу на средней интенсивности. Чем больше интенсивность, тем быстрее крутятся массажные ролики.

Кнопка «Нагрев» включает и отключает нагрев.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Подключите шнур блока питания к устройству, затем подключите блок питания к сети.

Использование

1. Займите удобное положение сидя или лежа. Затем расположите стопы или икры ног на массажере. Массажер для ног нельзя стирать, поэтому чтобы сохранить устройство в чистоте, проводите сеанс массажа в чистых тонких, эластичных брюках и носках. На одежде не должно быть никаких выпуклых декоративных элементов, молний, пуговиц и прочего.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Устройство начнет выполнять массаж при средней интенсивности, нагрев будет включен.
3. Для настройки интенсивности массажа нажимайте на кнопку «Интенсивность».
4. При желании вы можете выключить нагрев ног. Для этого нажмите на кнопку «Нагрев». Чтобы включить нагрев, снова нажмите на кнопку «Нагрев».
5. Чтобы изменить направление вращения роликов, нажимайте на кнопку «Направление». Направление вращения роликов меняется автоматически каждую минуту.

Продолжительность массажа составляет 15 минут. По прошествии установленного времени массажер автоматически отключится. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Не используйте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к перегреву массажера и сокращению срока службы. Перед повторным включением должно пройти не менее 30 минут.

Сеанс массажа для одного человека рассчитан на 15 минут. Увеличение времени сеанса массажа может привести к чрезмерной стимуляции мышц, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии человека.

6. Отключите устройство от сети питания.



Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским оборудованием и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не используйте массажер более 15 минут. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на ногах могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.



Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети питания. Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен. Не используйте агрессивные моющие средства. Не сушите массажер на солнце. Не используйте массажер, если он влажный.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания и на блок питания.



Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер и блок питания в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер подключен к сети, но не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Шнур блока питания не плотно вставлен в разъем для блока питания на массажере или в розетку	Плотно вставьте штекер блока питания в разъем для блока питания на массажере, затем подключите блок питания к сети
Вы включали массажер более 15 минут подряд, массажер перегрелся	Подождите не менее 30 минут, попробуйте включить массажер снова

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите низкую или среднюю интенсивность массажа

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,7 А
 - выход: $\approx$ 12 В, 2 А
2. Мощность: 24 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
4. Количество уровней интенсивности: 3
5. Тип массажера: роликовый
6. Автоотключение: через 15 мин
7. Длина шнура блока питания: 1,8 м
7. Размер устройства: 330 × 180 × 140 мм
8. Размер упаковки: 365 × 188 × 160 мм
9. Вес нетто: 1,3 кг
10. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания и на блок питания не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера или несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не используйте устройство, если ваши руки или ноги мокрые, прежде следует вытереть мокрые части тела.
10. Не включайте массажер более 15 минут подряд без перерыва. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не мешало доступу воздуха в отверстия, расположенные на дне устройства. Не накрывайте прибор. Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия с длинным ворсом.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания и на блок питания.
19. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
20. Массажер предназначен только для массажа ног. Не используйте устройство для проведения массажа других частей тела.
21. Не превышайте максимальное время работы устройства (15 минут). По истечении этого времени сделайте перерыв на 30 минут во избежание перегрева устройства.

ИМ-1





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

