




Kitfort

# ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ!



**Penguin Pack**  
Массажер для шеи  
КТ-2989

[kitfort.ru](http://kitfort.ru)

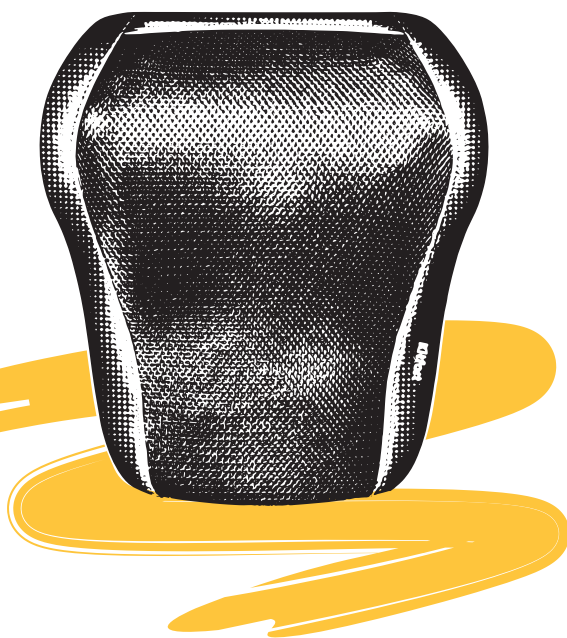



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10



## Общие сведения

Массажер для шеи Kitfort КТ-2989 выполняет массаж, помогая избавиться от дискомфорта в шейно-воротниковой зоне, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или при сидячем образе жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажер устраняет стресс и затекание мышц.

Благодаря нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови.

Массажер можно использовать для массажа других зон: поясницы, живота, бедер и стоп.


Следует помнить, что при беременности, наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-2989 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.

## Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера

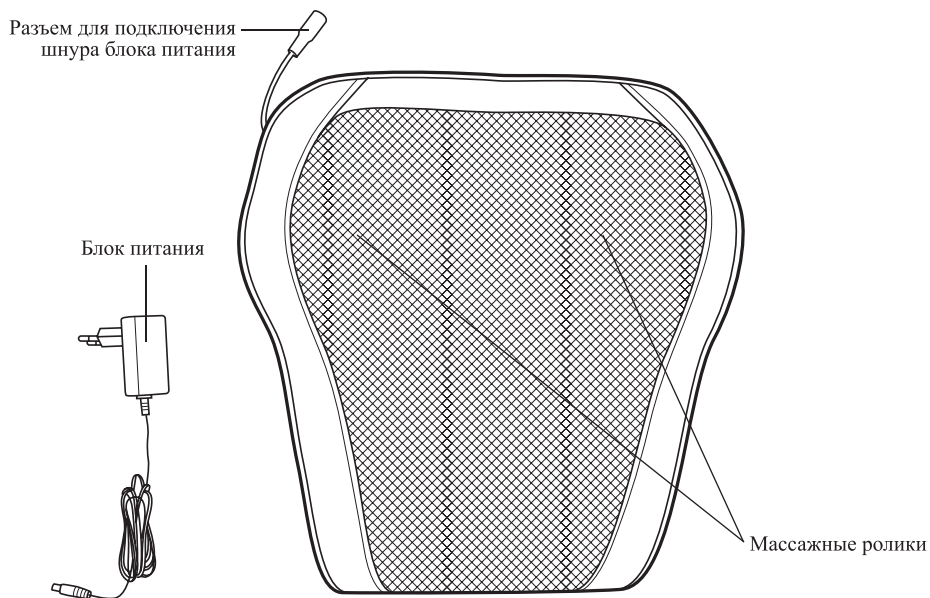

## Панель управления



**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает массажер. После включения устройство начнет работу со средней интенсивностью массажа, функция нагрева будет включена. По истечении 15 минут массажер автоматически выключится. Вы можете остановить его работу раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».



**Кнопка «Направление»** циклически переключает направление движения массажных роликов. Направление движения массажных роликов автоматически меняется каждую минуту.

**Кнопка «Интенсивность»** циклически переключает интенсивность массажа. У массажера есть 3 интенсивности массажа: минимальная, средняя и максимальная. После включения массажер начинает работу на средней интенсивности. Чем больше интенсивность, тем быстрее крутятся массажные ролики.

**Кнопка «Нагрев»** включает и отключает нагрев.

**Примечание.** По умолчанию во время работы массажера включена функция нагрева.

**Кнопка «Режим энергосбережения»** включает и выключает режим энергосбережения.

**Кнопка «Автоматические режимы»** включает, выключает и позволяет выбрать один из трех автоматических режимов. В каждом из режимов происходит смена направления вращения массажных роликов с различным интервалом. Нажмите на кнопку «Автоматические режимы» три раза, чтобы включить первый автоматический режим, затем каждое нажатие на кнопку будет циклически переключать режимы. Чтобы выключить автоматический режим, нажмите три раза на кнопку «Автоматический режим».

**Примечание.** По умолчанию автоматические режимы выключены.



## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

1. Распакуйте массажер и протрите его влажной, а затем сухой мягкой тканью.
2. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.
3. Подключите штекер блока питания к разъему на массажере, блок питания подключите к сети электропитания.
4. Помимо массажа шейно-плечевого отдела, вы можете использовать прибор для массажа голеней, поясницы, живота, бедер или стоп.

### Использование

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Устройство начнет выполнять массаж при средней интенсивности, нагрев по умолчанию будет включен. Режим энергосбережения, а также автоматический режим будут отключены.

**Примечания.** При возникновении неприятных ощущений прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом. Также не используйте массажер 2 раза подряд для одной и той же зоны.

2. Для настройки интенсивности массажа нажмите на кнопку «Интенсивность».
3. При желании вы можете выключить нагрев. Для этого нажмите на кнопку «Нагрев». Чтобы включить нагрев, снова нажмите на кнопку «Нагрев».
4. Чтобы изменить направление вращения роликов, нажмите на кнопку «Направление».

**Примечание.** Направление движения массажных роликов автоматически меняется каждую минуту.

5. При желании вы можете включить режим энергосбережения, нажав на кнопку «Режим энергосбережения». Чтобы выключить этот режим, снова нажмите на данную кнопку.
6. Вы можете выбрать один из трех автоматических режимов, нажав на кнопку «Автоматический режим». Режимы переключаются циклически.

7. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут устройство выключится. Для того, чтобы закончить массаж раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, устройство выключится. Максимальное время работы массажера — 15 минут.

**Примечание.** Если вы хотите использовать массажер повторно для другой зоны, подождите минимум 30 минут, чтобы массажер не перегревался.

8. После завершения работы массажера отключите блок питания от источника питания, а затем от устройства.



### Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Массажер не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
  - наличие ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
  - нечувствительность к теплу;
  - переутомление;
  - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора;
  - злокачественные новообразования;
  - повреждения целостности кожного покрова в зоне массажа;
  - инфекционные заболевания кожи;
  - остеопороз;
  - переломы, вывихи, разрывы мышц и прочие повреждения;
  - повышенная температура;
  - сахарный диабет;
  - беременность;
  - возраст младше 16 лет.



### Советы

Не используйте массажер более 15 минут на каждой части тела. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

### Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, смоченные водой. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, блок питания и разъем для подключения шнура.



### Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

### Устранение неполадок

#### Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Шнур блока питания не подключен к массажеру или к источнику питания	Вставьте штекер шнура блока питания в разъем массажера или в источник питания



### Массажер нагрелся

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть минимум 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

### Технические характеристики

- Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,8 А
  - выход: =12 В, 2 А
- Мощность: 24 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - массажера: III
- Уровней интенсивности: 3
- Длина шнура блока питания: 1,5 м
- Размер устройства: 335 × 100 × 400 мм
- Размер упаковки: 340 × 140 × 395 мм
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение массажера или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, блок питания и разъем для подключения шнура не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие превышения времени использования не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания или шнур разъема для подключения на самом массажере. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, блок питания и разъем для подключения шнура.
15. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не используйте устройство во время передвижения в транспортном средстве.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.

ИМ-2





# ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте  
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

