



Весы напольные Body Composition Smart Scale

Model TELSC007



Инструкция по эксплуатации

Для безопасного использования данного продукта
сначала прочитайте инструкцию.

Весы напольные Body Composition Smart Scale

Умные беспроводные Bluetooth весы для определения состава тела – анализатор тела, измеряющий вес и использующий технологию анализа биоэлектрического импеданса (BIA) для оценки процентного содержания жира в организме и других данных о составе тела. Весы предназначены только для домашнего использования.



Версия системы
Android: 5.0~11.0,
iOS: 10.0~14.0
Bluetooth: 4.2 и совместим
с версиями 4.2



ВНИМАНИЕ!

Прочтите перед использованием!

- Не используйте весы, если у вас есть кардиостимулятор, искусственное легкое, или вы носите электрокардиограф, или любое другое внутреннее медицинское устройство.
- Не используйте устройство на мокрой или скользкой поверхности; Не становитесь на весы, если Ваши ноги или поверхность весов мокрые.



ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Измерения данных о составе вашего тела могут быть неточными при использовании весов сразу после тяжелых физических нагрузок.
- Шкала лучше всего подходит для взрослых старше 18 лет. (Дети в возрасте 0-9 лет могут воспользоваться данными о весе и ИМТ, подростки 10-17 лет - о весе, ИМТ и процентном содержании жира в организме, но лучше всего использовать другие данные в качестве справочных).
- Смарт-весы не следует использовать для диагностики или лечения каких-либо заболеваний. Всегда консультируйтесь со своим врачом или медицинским работником, чтобы определить, что лучше для вас.



Советы по измерению веса

Прочтите эти советы, чтобы получить наиболее точные результаты измерений:

В этом продукте используется технология BIA (анализ биоэлектрического импеданса). Чтобы получить точный и надежный результат измерения, пожалуйста, по возможности используйте его в одно и то же время в течение дня и при одинаковых условиях. Пожалуйста, избегайте проведения измерений:



- Во время или сразу после интенсивных физических упражнений
- После обильного приема пищи
- Сразу после душа, ванны или сауны
- После сильного употребления алкоголя
- Во время беременности
- Во время болезни

- При тестировании встаньте прямо босиком. Ношение носков может привести к неточному результату. Грязные ноги также могут повлиять на точность измерения.
- Единица измерения веса - килограмм (кг), единица измерения высоты может быть изменена соответствующим образом (метр на футы/дюймы).
- Измерьте вес правильно: поставьте весы на твердый пол и сбросьте их перед измерением. Прежде чем встать на весы, вес должен показывать 0,0 кг.

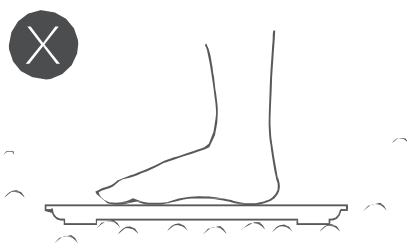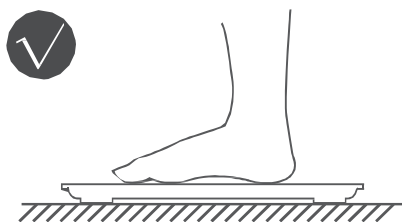

Используйте их на твердой
плоской поверхности

- Измерьте жировые отложения и другие параметры состава тела правильно: встаньте прямо на весы босиком и равномерно соприкасайтесь ступнями с электродами, как показано на рисунке ниже.

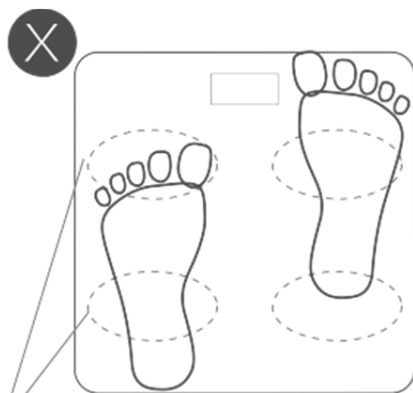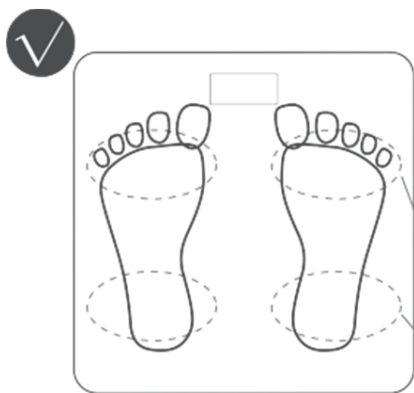

Зона измерения электрода

Включение весов

- Ваши смарт-весы поставляются с 4 батарейками типа AAA. Установите батарейки в батарейный отсек, после чего весы включатся.
- После установки батареек вы можете встать на весы, чтобы измерить свой вес. Однако для измерения других данных о составе тела, таких как процентное содержание жира в организме, вам необходимо использовать смарт-весы вместе со смартфоном или планшетом.
- Чтобы узнать, как установить мобильное приложение на ваши мобильные устройства, смотрите следующий раздел.



Установка приложения и измерение

Умные весы подключаются к вашим мобильным телефонам или планшетам по беспроводной сети. Для этого необходимо установить наше приложение на ваших мобильных устройствах. Самый простой способ загрузить приложение - отсканировать QR-код на следующей странице с помощью своего телефона или планшета. Следуйте инструкциям, чтобы полностью ознакомиться с функциями весов.

ШАГ 1: СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Отсканируйте QR-код и скачайте приложение Unique health




Зарегистрируйтесь и введите личные данные



Установите батарейки в весы


ШАГ 2: СОПРЯЖЕНИЕ ВЕСОВ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

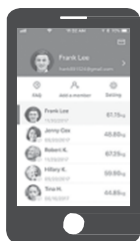

Выберите свой зарегистрированный аккаунт



Встаньте на весы

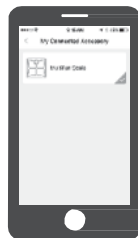

Подключите весы к приложению

Сопряжение происходит автоматически, как только вы становитесь на весы, в противном случае вам следует подключить весы вручную в меню настроек приложения.

Примечание: Устройствам Android 6.0 или выше требуется разрешение на геолокацию для использования службы Bluetooth.

ШАГ 3: ИЗМЕРЕНИЕ И СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА-АНАЛИЗА




Быстрая
калибровка весов
(может быть
выполнено
в любое время)



Наступайте на
весы до тех пор,
пока цифры
не дисплее не
стабилизируются



Проверьте
отчет об
анализе тела в
приложении

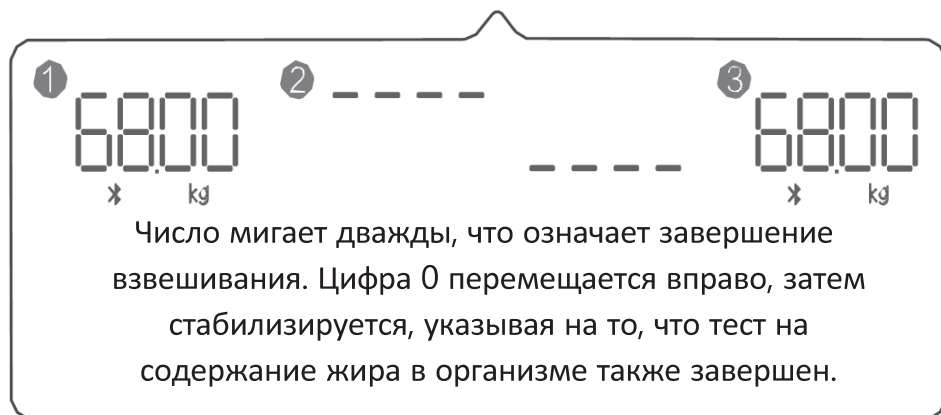

Комплект поставки

1. Смарт-весы TELSC007
2. Батарея: 2 x 1,5 В AAA
3. Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Размеры: 260*260*22 мм (10,2x10,2x0,87 дюйма)

Вес изделия: 1,1 кг

Батарейки: 2x1,5В ААА

Диапазон взвешивания: 5 кг – 180 кг

Описание дисплея

6800
✱ kg

Нормальное
рабочее
состояние

(no display)

Нет батареи/бате-
рея разряжена

6800
kg

Беспроводная
связь отключена

Lo

Низкий уровень
заряда батареи

Egg

Перегрузка
(высокий вес)



R 210-133289



Сделано в Китае