


**Удовольствие
в заботе!**

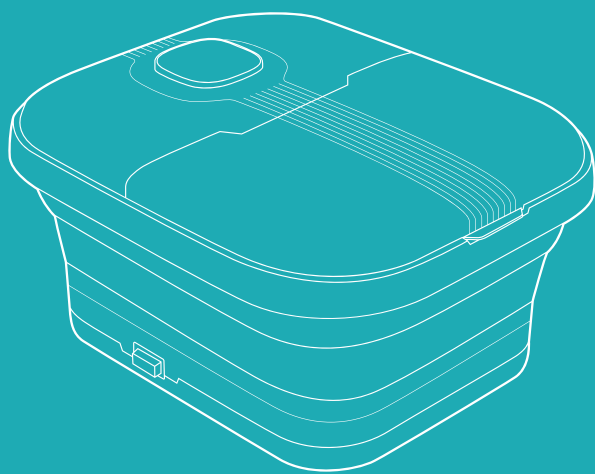

**Гидромассажная
ванна для ног
КТ-5904**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство гидромассажной ванны для ног	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Гидромассажная ванна для ног КТ-5904 поможет снять усталость, уменьшить отеки, улучшить циркуляцию крови и расслабить мышцы стоп с помощью гидро-массажа и пузырькового массажа. Благодаря нагреву воды эффективность гидро-массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц. Температура нагрева воды настраивается: вы можете установить нагрев воды до 42, 44 или 46 °С.

Гидромассажная ванна для ног оснащена таймером на 20 и 30 минут. По прошествии этого времени устройство автоматически выключится. Если таймер не будет включен и вы не выключите устройство вручную, автоотключение гидромассажной ванны произойдет через 60 минут.

Такое разнообразие настроек поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный гидромассаж.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Прорабатывая стопы при помощи гидромассажа, можно улучшить состояние здоровья в целом. Гидромассаж ног улучшает метаболизм и процессы регенерации, снижает напряжение, активизирует кровообращение, помогает в борьбе с отечностью.

Для компактного хранения гидромассажная ванна для ног складывается.


При наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед использованием. Гидромассажная ванна для ног КТ-5904 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также гидромассажную ванну для ног можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация

1. Гидромассажная ванна для ног с крышкой — 1 шт.
2. Пульт ДУ с отсеком для батарейки и батареей CR2025 — 1 шт.
3. Массажный ролик — 6 шт.
4. Насадка для педикюра с крышкой — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство гидромассажной ванны для ног

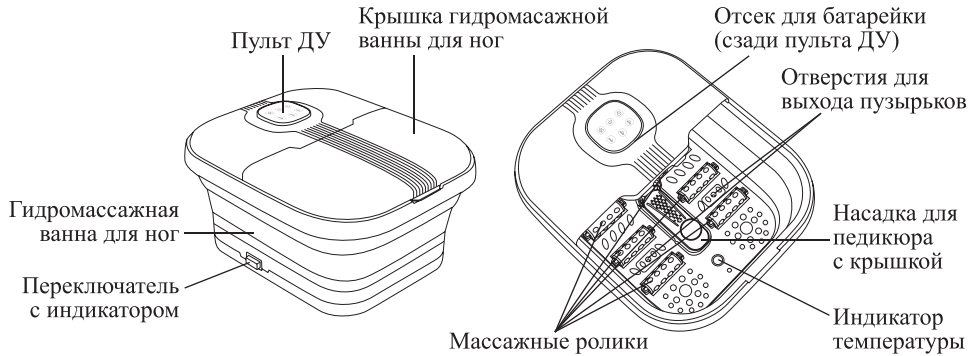

Сверху гидромассажной ванны есть магнитная зона для установки *пульт дистанционного управления (ДУ)*, однако вы можете держать пульт ДУ в руках.

Переключатель включает и выключает устройство. Когда переключатель переведен в положение «ON», индикатор переключателя горит, когда переключатель переведен в положение «OFF», индикатор гаснет.

Внимание! При управлении устройством необходимо направлять пульт ДУ на **индикатор температуры**, под которым находится датчик контроллера.

После выбора температуры воды с помощью пульта ДУ начнется нагрев, **индикатор температуры** будет гореть в соответствии с температурой в реальном времени.

Массажные ролики устанавливаются в пазы на корпусе устройства и помогают снять усталость и напряжение стоп, расслабить мышцы и улучшить кровоток. К тому же массажные ролики позволяют принять стопе удобное положение. Массажные ролики не вращаются автоматически, их нужно вращать.

Насадка для педикюра с крышкой подходит для удаления ороговевшей кожи на ступнях. Для удобства чистки устройства вы можете поднять крышку насадки для педикюра и снять саму насадку.


Для большего расслабления вы можете добавить соль для ванны или травы в отсек под насадкой для педикюра.

Если включен пузырьковый массаж, то из **отверстий для выхода пузырьков** выйдут пузырьки. Не блокируйте отверстия для выхода пузырьков.

Примечание. Достать педикюрный камень из насадки и заменить его невозможно.

Внимание! Не используйте прибор без воды!

Пульт ДУ

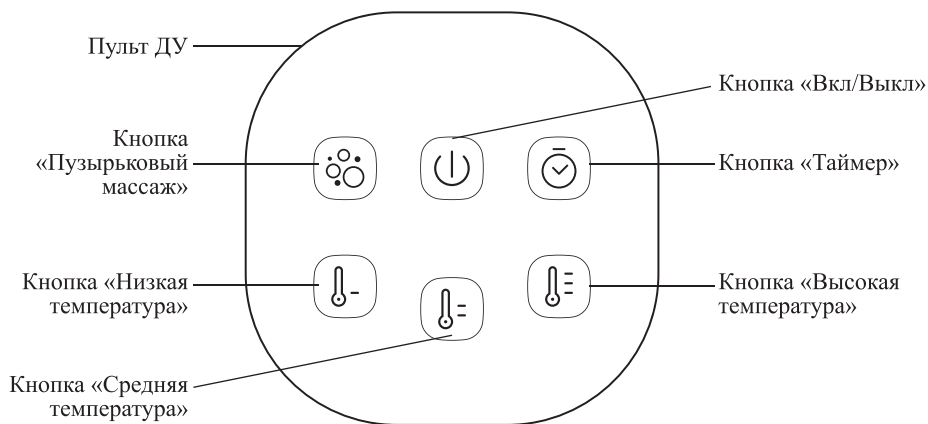

Управление гидромассажной ванной для ног осуществляется с помощью пульта ДУ. В пульте есть отсек для батарейки CR2025. Чтобы сменить батарейку, достаньте отсек для батарейки и вставьте новую батарейку.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает гидромассаж. Если вы не нажмете на кнопку «Вкл/Выкл», массаж автоматически начнется через 10 секунд.

Кнопка «Таймер» позволяет включить таймер на 20 или 30 минут. Если таймер не будет установлен или устройство не будет выключено вручную, оно автоматически выключится через 60 минут. При первом нажатии на кнопку «Таймер» раздастся один звуковой сигнал — таймер установлен на 20 минут. При втором нажатии раздастся два звуковых сигнала — таймер установлен на 30 минут. За 5 минут до истечения таймера и по истечении таймера устройство подаст звуковой сигнал. Если вы установите таймер еще раз, звуковой сигнал за 5 минут до истечения таймера не прозвучит.

Кнопка «Пузырьковый массаж» включает и выключает пузырьковый массаж.

Примечание. По умолчанию пузырьковый массаж включен.

Кнопка «Низкая температура» включает и выключает нагрев воды до 42 °С, индикатор температуры горит синим.

Кнопка «Средняя температура» включает и выключает нагрев воды до 44 °С, индикатор температуры горит розовым.

Кнопка «Высокая температура» включает и выключает нагрев воды до 46 °С, индикатор температуры горит красным.

Примечания. По умолчанию установлен нагрев воды до 42 °С.

При достижении заданной температуры раздастся звуковой сигнал, а также вы можете следить за температурой воды, ориентируясь на цвет индикатора температуры.

Нажатия на кнопки сопровождаются звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте гидромассажную ванну для ног из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и крышку устройства влажной, затем сухой мягкой тканью. Проверьте, что батарейка CR2025 вставлена в отсек пульта ДУ.

Разложите ванну, если она находится в собранном виде. Для этого одной рукой надавите на дно ванны, а другой поднимите сначала один борт до упора, затем второй.

Установите гидромассажную ванну для ног на полу вдали от нагревательных элементов, на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов так, чтобы ничего не перекрывало вентиляционные отверстия, расположенные на дне устройства. Не устанавливайте устройство на ковер с длинным ворсом. Устанавливайте ванну так, чтобы случайно не опрокинуть ее.

Для того чтобы добавить соль или травы, вам нужно поднять крышку насадки для педикюра, снять насадку для педикюра, а затем добавить травы или соль для ванны в отсек под насадкой в гидромассажной ванне, установить сверху насадку для педикюра и закрыть крышкой.

Внимание! Не добавляйте травы и соль при наличии аллергии или ран, порезов и ожогов.

Наполните гидромассажную ванну водой, не превышая максимальную отметку. Наливайте воду комнатной температуры, которая будет комфортна для вас. Если температура наливаемой воды превышает 42 °С, нагрев не включится.

Примечание. Запрещено добавлять в воду аромамасла. Не заливайте в резервуар для воды никакие иные жидкости и средства, кроме воды.

Подключите гидромассажную ванну к источнику питания.

Внимание! Не используйте прибор без воды!

Использование

1. Сядьте на диван или стул и займите удобное положение. Затем поставьте ноги в гидромассажную ванну для ног. Следует расположить ноги так, чтобы продольный свод каждой стопы находился над массажными роликами.

Внимание! Делайте массаж только сидя. Не вставайте на массажер.

2. Переверните переключатель в положение «ON», индикатор переключателя загорится, и раздастся звуковой сигнал.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте ДУ. Если вы не нажмете на кнопку «Вкл/Выкл», массаж автоматически начнется через 10 секунд. По умолчанию установлен нагрев воды до 42 °С, индикатор температуры горит синим, пузырьковый массаж включен, автоотключение сработает через 60 минут.
4. Чтобы выключить пузырьковый массаж, нажмите на кнопку «Пузырьковый массаж».
5. Чтобы изменить температуру нагрева воды, нажмите на кнопку «Низкая температура» (42 °С), «Средняя температура» (44 °С) или «Высокая температура» (46 °С). После выбора температуры воды индикатор температуры будет гореть в соответствии с фактической температурой нагрева, при достижении заданной температуры устройство подаст звуковой сигнал, индикатор будет гореть соответствующим цветом — синим (42 °С), розовым (44 °С) или красным (46 °С).

6. Чтобы выбрать время таймера, нажимайте на кнопку «Таймер»: при первом нажатии раздастся один звуковой сигнал — включен таймер на 20 минут, при втором нажатии раздастся два звуковых сигнала — включен таймер на 30 минут.
 7. Время от времени двигайте массажные ролики ступнями.
 8. Удалите отмершие частички кожи стоп с помощью насадки для педикюра.
 9. За 5 минут до истечения таймера и по истечении таймера гидромассажная ванна подаст звуковой сигнал и по истечении таймера автоматически отключится. Чтобы выключить массаж раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
- Примечания.** Не используйте гидромассажную ванну более 60 минут подряд. Это может привести к перегреву устройства и сокращению срока службы. Перед повторным включением должно пройти не менее 30 минут.
10. Переверните переключатель в положение «OFF», индикатор переключателя погаснет, отключите устройство от сети питания.
 11. Слейте воду и просушите устройство.

Меры предосторожности по применению

1. Прибор не является медицинским оборудованием и используется только в профилактических целях.
2. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением и используйте с осторожностью при следующих состояниях:
 - беременности;
 - тромбозе, варикозе;
 - нарушении целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушении свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострении хронических заболеваний;
 - онкологии;
 - травмах, переломах;
 - остеопорозе;
 - наличии электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавней операции или вводе инъекций;
 - гипертонии;
 - гриппе, ОРВИ, повышенной температуре;
 - почечной недостаточности;
 - сахарном диабете;
 - гипогликемии;
 - возрасте младше 16 лет.
3. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите гидромассаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не используйте гидромассажную ванну для ног более 60 минут. Гидромассаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться гидромассажной ванной для ног, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день может начаться боль в мышцах ног. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Добавление трав в ванну очень полезно: хмель, валериана и лаванда расслабляют мышцы и оказывают успокаивающее действие, а ромашка, шалфей и мята обладают укрепляющими свойствами. Хвоя стимулирует кровообращение и снимает напряжение.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте гидромассажную ванну и отключайте ее от сети питания. Протирайте корпус и пульт ДУ влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для мойки внутренней поверхности гидромассажной ванны для ног.

Также вы можете снять массажные ролики и насадку для педикюра с крышкой, чтобы их промыть. Для снятия массажных роликов потяните их на себя, чтобы установить ролики в ванну, вставьте их в пазы на корпусе. Чтобы снять насадку для педикюра, поднимите крышку насадки для педикюра, а затем достаньте насадку для педикюра. Не используйте агрессивные моющие средства и жесткие губки. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Не сушите гидромассажную ванну на солнце.


Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на пульт ДУ и шнур питания.

Уход и хранение

Храните гидромассажную ванну для ног в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Обязательно слейте воду и тщательно просушите устройство. На длительное хранение закройте устройство крышкой и уберите в пакет или коробку для защиты от пыли. Для более компактного хранения сложите гидромассажную ванну для ног и поместите пульт ДУ в магнитную зону сверху гидромассажной ванны.



Вы можете сложить гидромассажную ванну для ног, для этого надавите сначала на один борт ванны до упора, а затем на другой.

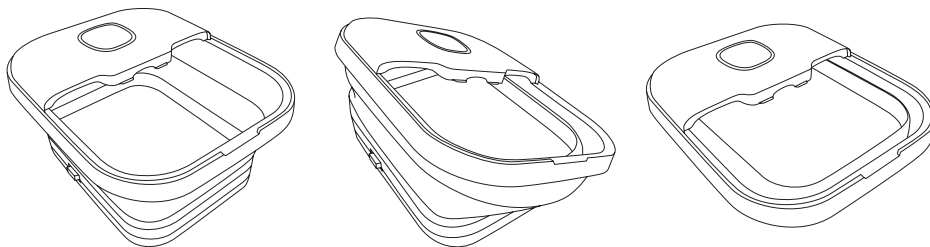

Устранение неполадок

Гидромассажная ванна не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Гидромассажная ванна для ног подключена к сети, но переключатель не переведен в положение «ON», а кнопка «Вкл/Выкл» не нажата	Чтобы включить гидромассажную ванну для ног, переведите переключатель в положение «ON» и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

Гидромассажная ванна выключилась во время работы

Возможная причина	Решение
Сработало автоотключение после 60 минут работы	Если вы хотите продолжить гидромассаж, сделайте перерыв 30 минут, затем включите гидромассажную ванну снова
Истекло время таймера	Если вы хотите продолжить гидромассаж, включите гидромассажную ванну снова, но не превышайте общее время непрерывной работы 60 минут

Нагрев не включается

Возможная причина	Решение
Вы налили воду, температура которой превышает 42 °C	Выключите устройство, отключите от сети электропитания, сделайте перерыв на 30 минут, чтобы вода остыла, и включите снова

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Выбрана высокая температура воды	Установите низкую или среднюю температуру воды

Пульт ДУ не работает

Возможная причина	Решение
Села батарейка	Откройте отсек для батарейки и замените батарейку CR2025 на новую

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 505 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость ванны: 8 л
5. Температура нагрева воды: 42, 44 и 46 °C
6. Таймер: 20, 30 мин
7. Автоотключение: через 60 мин
8. Длина шнура: 1,5 м
9. Размер устройства: 335 × 400 × 210 мм
10. Размер устройства в сложенном виде: 335 × 400 × 90 мм
11. Размер упаковки: 342 × 110 × 410 мм
12. Вес нетто: 1,9 кг
13. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя гидромассажной ванны для ног вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на пульт ДУ и шнур питания не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа гидромассажной ванны или несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте гидромассажную ванну только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите гидромассажную ванну, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или намокли. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться гидромассажной ванной только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с гидромассажной ванной.
8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте гидромассажную ванну более чем на 60 минут подряд без перерыва. Это может привести к повреждению устройства. По истечении этого времени сделайте перерыв на 30 минут во избежание перегрева устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте гидромассажную ванну только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не мешало доступу воздуха в вентиляционные отверстия, расположенные на дне устройства. Не накрывайте прибор. Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия с длинным ворсом.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на пульт ДУ и шнур питания.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
18. Гидромассажная ванна для ног предназначена только для массажа ног. Не используйте устройство для проведения массажа других частей тела.
19. Направляйте пульт ДУ на датчик контроллера.
20. Запрещено использовать прибор без воды!
21. Запрещено добавлять в воду аромамасла.
22. Заливайте воду комнатной температуры, комфортную для вас. Не превышайте максимальную отметку.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87