

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Массажер шумит во время работы.	Небольшой уровень шума допустим при работе массажера.	–
Массаж прервался до окончания положенного времени.	– Время, установленное таймером, истекло. – Случайно была нажата кнопка отключения массажера. – Закончилась зарядка аккумулятора.	– Не рекомендуется использовать массажер дольше рекомендуемого времени. – Включить массажер еще раз. – Зарядить аккумулятор и включить массажер.
В процессе работы массажера прекратился прогрев.	– Время, установленное таймером, истекло. – Случайно была нажата кнопка прогрева.	– Не рекомендуется использовать массажер дольше рекомендуемого времени. – Включить Прогрев еще раз.

Если предложенные решения не позволили решить проблему – не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При обнаружении неисправностей обращайтесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя.

ГАРАНТИЯ:

Условия гарантии:

- Гарантия распространяется только на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
- Если в течение гарантийного срока будет получена обоснованная претензия о выявленном производственном дефекте, мы либо устраним брак, либо заменим изделие на то, которое функционально эквивалентно оригинальному изделию.

Гарантия не распространяется:

- При наличии механических или иных повреждений изделия, вызванных неправильной эксплуатацией прибора.
- В случае ремонта или модификации массажера самостоятельно, не в специализированном сервисном центре.
- В случае несоблюдения рекомендаций производителя по эксплуатации, уходу и хранению массажера, описанные в данной инструкции.

- В случае проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
- На неисправности изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом частей изделия, имеющих ограниченный срок службы;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКИ:

- После перемещения массажера в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.
- Массажер лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в сухом чистом, недоступном для детей месте.
- При необходимости, при видимых загрязнениях тканевой части очищайте ее поверхность спиртовой салфеткой или чистой слегка влажной тканью.
- Избегайте влажной чистки рабочих элементов массажера, не используйте чистящих средств. Протирайте их сухой и мягкой тканью.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в воду.
- Храните массажер вдали от огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Если устройство не используется в течение длительного периода, заряжайте аккумулятор каждые 2 месяца.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

	РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Диапазон температуры.	+5°C...+ 40°C	-25°C...+ 70°C
Диапазон влажности.	15%-90%	0%-90%
Атмосферное давление.	70-106 Па	70-110 Па

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Прежде чем выбросить массажер, извлеките из него литиевую батарею.

Массажер лимфодренажный беспроводной, высокий

Артикул KZ 1430

Материал: АБС пластик, полиэстер. Цвет: серый.
Размер: 26,5х30х75 см.
Напряжение: 5 В постоянного тока, 2 А. Мощность: 5 Вт.
Температура прогрева: 45°С – 55°С. Время зарядки: 3 ч. Время работы: 1,5 ч.
Сенсорный экран со светодиодной подсветкой.
Размер вставки для икр: 19/23х20,5 см. Размер вставки для бедер: 23,5/28х25 см.
Работает от аккумулятора. Аккумулятор: 2500 мАч.
6 режимов аэрокомпрессии. 3 уровня интенсивности аэрокомпрессии.
3 уровня прогрева. 4 режима вибрации. Функция памяти. Таймер: 20 минут.
Комплектация: массажер – 1 шт, вставка – 2 шт., USB провод Type-C – 1 шт, инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4, УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель:

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183

Израиль - Рег. №204012

Россия - Рег. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.



KZ 1181

МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК БЛАЖЕНСТВО АЛЬФА




KZ 1180

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ СО СЪЕМНЫМИ ЛИМФОДРЕНАЖНЫМИ МАНЖЕТАМИ ВИВО

МАССАЖЕР ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ, ВЫСОКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1430

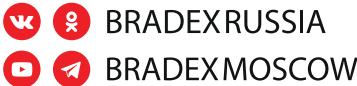

Спасибо за покупку нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием, особенно раздел «Меры предосторожности», изучите правила применения и функции работы устройства, чтобы вы могли использовать его правильно и безопасно. Используйте прибор только по прямому назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед каждым использованием обязательно проверяйте массажер и его компоненты на отсутствие повреждений. Если обнаружались неисправности или повреждения, не используйте устройство и обратитесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
- Обязательно отсоединяйте USB-кабель после полной зарядки аккумулятора.
- Не оставляйте массажер без присмотра во включенном состоянии, особенно в присутствии детей.
- Не допускайте самостоятельного использования массажера детьми, а также лицами, имеющими физические и умственные ограничения без помощи ответственных за их безопасность лиц.
- Не накрывайте и не используйте массажер в местах с недостаточной вентиляцией. Перегрев прибора может привести к его поломке.
- Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах. Не погружайте устройство в воду, так как оно не является водонепроницаемым. Не допускайте попадания воды на панель управления.
- Не эксплуатируйте массажер, если на него попала вода или другая жидкость. В случае попадания жидкости дождитесь полного высыхания.
- Держите USB-кабель для зарядки массажера вдали от источников тепла, не тяните за него. Никогда не беритесь за кабель мокрыми или влажными руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не садитесь на массажер, не вставляйте ноги и не помещайте на него посторонние предметы.
- Не засыпайте во время использования массажера.
- Не используйте массажер после употребления алкоголя.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Не храните и не используйте массажер при температуре воздуха выше 40 С.
- Во избежание перегрева массажера, не используйте его в непрерывном режиме более 20 минут. Делайте перерывы между применениями, чтобы прибор успевал полностью остыть.
- Перед утилизацией массажера (по истечении срока службы), аккумулятор необходимо извлечь и утилизировать безопасным способом.

Соблюдение этих мер предосторожности гарантирует безопасное использование массажера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Во избежание неприятных последствий, перед использованием массажера следует учесть ряд противопоказаний, запрещающих использование прибора:

- гиперчувствительность кожи и кожные заболевания;
- острые гнойные воспаления, наличие ран и воспаленных участков (переломов, ушибов, порезов) в местах воздействия;
- нарушения кровообращения: тромбоз, флебит, варикозное расширение вен и др.;
- онкологические заболевания;
- диабет;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- недавно перенесенные травмы или операция;
- наличие простуды с повышенной температурой, лихорадочное состояние;
- беременность;
- эпилепсия.

При наличии в организме кардиостимуляторов и электронных имплантатов, необходимо проконсультироваться с врачом.

Если в процессе использования массажера вы почувствуете дискомфорт немедленно прекратите использование прибора.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

О всех возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом. Помните, что забота о своем теле и здоровье должны быть повседневной практикой.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Беспроводной лимфодренажный массажер, высокий


Артикул KZ 1430

Комплектация:

- Массажер – 1 шт.
- Вставка – 2 шт.
- USB провод Type-C – 1 шт.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

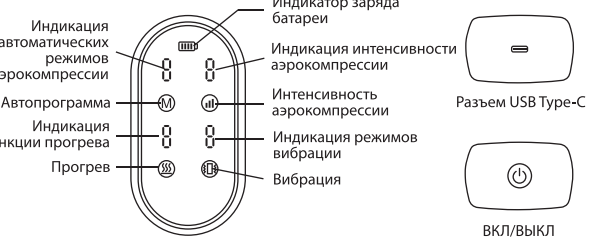

Индикация заряда батареи:

Если уровень заряда батареи <25%, индикатор горит красным цветом. Если уровень заряда батареи <25% и она заряжается, индикатор мигает красным цветом.

Если уровень заряда батареи >25% и она заряжается, индикатор мигает синим цветом. Если батарея полностью заряжена, индикатор горит синим цветом.

Индикация функции прогрева:

Индикация 1 – низкий
Индикация 2 – средний
Индикация 3 – сильный
Индикация 0 – прогрев отключен

Индикация режимов вибрации:

1 режим
2 режим
3 режим
4 режим
0 режим – отключение функции вибрации

Индикация интенсивности аэрокомпрессии:

Индикация 1 – низкий уровень
Индикация 2 – средний уровень
Индикация 3 – высокий уровень

Индикация автоматических режимов аэрокомпрессии:

Предусматривает аэрокомпрессионный массаж бедер, икр, лодыжек и стоп в следующей последовательности:
Индикация 0 - означает выключенную функцию аэрокомпрессии.

Режим 1 – Бедра + икры → Стопы + лодыжки → Полный массаж → Стопы + лодыжки



Режим 2 – Бедра + икры → Бедра + икры → Бедра + икры → Бедра + икры → Бедра + икры



Режим 3 – Стопы + лодыжки → Стопы + лодыжки → Стопы + лодыжки → Стопы + лодыжки → Стопы + лодыжки



Режим 4 – Стопы + лодыжки → Бедра + икры → Полный массаж → Бедра + икры → Стопы + лодыжки



Режим 5 – Стопы + лодыжки → Бедра + икры → Полный массаж → Бедра + икры → Полный массаж



Режим 6 – Полный массаж → Бедра + икры → Полный массаж → Стопы + лодыжки → Бедра + икры



ИНТЕНСИВНОСТЬ АЭРОКОМПРЕССИИ

Mode	Низкий уровень аэрокомпрессии			Средний уровень аэрокомпрессии			Высокий уровень аэрокомпрессии		
	Стопа	Икры	Бедро	Стопа	Икры	Бедро	Стопа	Икры	Бедро
Mode 1	47,56 кПа	35,36 кПа	35,36 кПа	50,58 кПа	37,19 кПа	37,19 кПа	50,94 кПа	37,11 кПа	37,11 кПа
Mode 2	0 кПа	34,56 кПа	34,56 кПа	0 кПа	36,08 кПа	36,08 кПа	0 кПа	38,96 кПа	38,96 кПа

Mode	Низкий уровень аэрокомпрессии			Средний уровень аэрокомпрессии			Высокий уровень аэрокомпрессии		
	Стопа	Икры	Бедро	Стопа	Икры	Бедро	Стопа	Икры	Бедро
Mode 3	44,26 кПа	0 кПа	0 кПа	45,63 кПа	0 кПа	0 кПа	45,66 кПа	0 кПа	0 кПа
Mode 4	32,17 кПа	29,92 кПа	29,92 кПа	32,72 кПа	29,87 кПа	29,87 кПа	36,21 кПа	32,41 кПа	32,41 кПа
Mode 5	43,15 кПа	30,91 кПа	30,91 кПа	49,74 кПа	35,64 кПа	35,64 кПа	48,7 кПа	36,29 кПа	36,29 кПа
Mode 6	50,52 кПа	24,1 кПа	24,1 кПа	53,29 кПа	26,24 кПа	26,24 кПа	56,93 кПа	28,79 кПа	28,79 кПа

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед началом использования убедитесь, что массажер исправен, полностью заряжен и готов к работе. Если массажер разряжен, зарядите его с помощью прилагаемого USB-кабеля. Массажер не работает во время зарядки. Перед использование отключите его от сети.
- Открепите фиксирующие липучки манжет и полностью разверните устройство.
- Оберните манжеты вокруг ног, отрегулируйте необходимую плотность и закрепите с помощью фиксирующих липучек. Массажер можно использовать поверх одежды.
- Массажер управляется с помощью индивидуального сенсорного экрана, расположенного отдельно на блоке управления сапога.
- Включите массажер, нажав на 2 секунды кнопку включения (⏻).
- По умолчанию выставляется рекомендуемое время работы – 20 минут. С помощью этой же кнопки можно преждевременно прервать сеанс массажа.
- Выбор интенсивности аэрокомпрессии (⌵):
 - Режим 1 – низкий уровень
 - Режим 2 – средний уровень
 - Режим 3 – высокий уровень
По умолчанию при включении массажера запускается 1 режим.
- Каждое нажатие увеличивает интенсивность на один уровень.
- Выбор уровня прогрева (☀):
 - 1 уровень – низкий
 - 2 уровень – средний
 - 3 уровень – высокий
 - 0 уровень – отключение функции прогрева
По умолчанию при включении массажера запускается 1 уровень прогрева.
- Каждое нажатие увеличивает прогрев на один уровень.
- При желании после выбора автоматического режима массажа Вы можете установить желаемый уровень интенсивности прогрева или отключить данную функцию. Для этого нажмите кнопку (⌵), пока на панели не загорится цифра, соответствующая выбранному уровню.
- Выбор режима вибрации (🔊):
 - В массажере предусмотрено 4 режима вибромассажа:

- 1 режим
 - 2 режим
 - 3 режим
 - 4 режим
 - 0 режим – отключение функции вибрации
- Каждое нажатие увеличивает вибрацию на один режим. При желании после выбора автоматического режима массажа Вы можете установить желаемый режим вибрации или отключить данную функцию. Для этого нажмите кнопку (🔊), пока на панели не загорится цифра, соответствующая выбранному режиму.
- Кнопка (⏻) дает возможность выбрать из памяти устройства один из 6 запрограммированных режимов аэкомпрессии (включает определенные зоны аэрокомпрессии). Выберите подходящие для вас режимы интенсивности аэрокомпрессии, прогрева и вибрации, либо один из 6 запрограммированных режимов (см. «Индикация автоматических режимов аэрокомпрессии»).
 - После начала работы выбранного автоматического режима Вы можете изменить интенсивность аэрокомпрессии, выбрав 1 из 3-х уровней, а так же активировать один из 3-х уровней интенсивности прогрева и один из 4-х уровней интенсивности вибрации.
 - После завершения процедуры массажер автоматически отключится.
 - Открепите фиксирующие липучки, снимите устройство и положите его для хранения в безопасное место.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДOK:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При нажатии на кнопку включения массажер не включается.	– Отсутствует заряд аккумулятора. – Перегрев, если массажер не успел остыть после предыдущего сеанса.	– Проверьте уровень заряда массажера, при необходимости зарядите. – Дайте массажеру возможность полностью остыть в течение 10-15 минут.
Компрессия чувствуется недостаточно сильно.	– Неправильно подобран режим интенсивности. – Недостаточно плотно зафиксированы регулирующие липучки.	– Подобрать режим интенсивности, в соответствии с желаемым эффектом. – Расстегнуть липучки, хорошо затянуть и зафиксировать.