


ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЛКОТЕСТЕРА GARIN «ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» DAT-3

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции ТМ GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

GARIN DAT-3 - это компактное, портативное устройство, предназначенное для измерения уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе. Позволяет быстро и с высокой точностью определить концентрацию алкоголя в организме человека, что особенно полезно для контроля собственного состояния перед вождением или выполнением ответственных задач.

01 СХЕМА АЛКОТЕСТЕРА

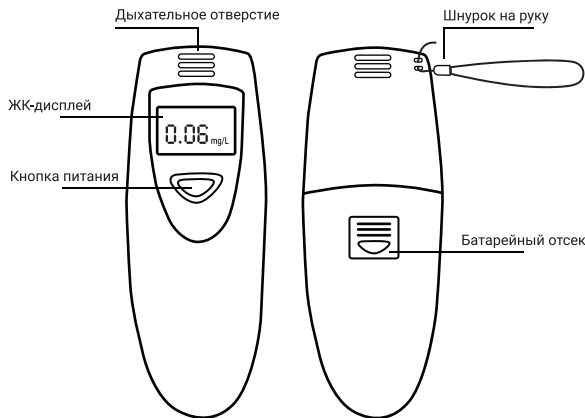

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения: 0,00-0,95 мг/л
- Точность измерения: 0,05 мг/л
- Автовыключение: 3 сек
- Время прогрева: 15 сек
- Тип питания: 2*AAA 1,5 В (нет в комплекте)

03 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте две батарейки типа AAA 1,5 В, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

04 ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Нажмите кнопку питания один раз, на ЖК-дисплее алкотестера отобразятся три цифры (3 предыдущих теста) и раздастся звуковой сигнал.
2. Затем на дисплее отобразится надпись «Warm up» и обратный отсчет «15 секунд» для предварительного нагрева.
3. После завершения прогрева датчика на дисплее отобразится надпись «START» и начнется обратный отсчет «6 секунд» для тестирования – равномерно выдохните в отверстие над дисплеем.
4. На дисплее отобразится результат.
5. Для обеспечения точности мы рекомендуем проводить измерение 2–3 раза.
6. При результатах больше «0,95 мг/л», устройство отобразит «Danger» и издаст звуковой сигнал.
7. Устройство имеет функцию автоматического выключения. После завершения отбора проб в правом верхнем углу устройства отобразится подсказка «OFF», и устройство автоматически выключится через 3 секунды.

Если батарейки сели, на дисплее отобразится «LO», а также раздастся звуковой сигнал. Необходимо заменить источники питания на новые перед его использованием.

Поверхность датчика алкоголя может быть покрыта большим количеством газа и примесей, когда тестер только достается из упаковки или только использовался. Дайте прибору немного времени для очистки, а затем включите.

05 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Чтобы обеспечить точность данных, рекомендуется проводить тестирование через 20 минут после употребления алкоголя, поскольку для попадания алкоголя в кровь из органов пищеварения требуется время.
- Для получения точных результатов не повторяйте тест в течение 3 минут.
- Не курите и не принимайте пищу за 20 минут до теста.

Сравнительная таблица концентрации алкоголя в крови / выдыхаемом воздухе						
№	BAC				BrAC	
	mg/100mL	%	‰	g/L	mg/L	-‰ ppm
01	10	0.01	0.1	0.1	0.05	25
02	20	0.02	0.2	0.2	0.10	50
03	30	0.03	0.3	0.3	0.15	75
04	40	0.04	0.4	0.4	0.20	100
05	50	0.05	0.5	0.5	0.25	125
06	60	0.06	0.6	0.6	0.30	150
07	70	0.07	0.7	0.7	0.35	175
08	80	0.08	0.8	0.8	0.40	200
09	90	0.09	0.9	0.9	0.45	225
10	100	0.10	1.0	1.0	0.50	250
11	110	0.11	1.1	1.1	0.55	275
12	120	0.12	1.2	1.2	0.60	300
13	130	0.13	1.3	1.3	0.65	325
14	140	0.14	1.4	1.4	0.70	350
15	150	0.15	1.5	1.5	0.75	375
16	160	0.16	1.6	1.6	0.80	400
17	170	0.17	1.7	1.7	0.85	425
18	180	0.18	1.8	1.8	0.90	450
19	190	0.19	1.9	1.9	0.95	475
20	200	0.20	2.0	2.0	1.00	500

BAC: Содержание алкоголя в крови
BrAC: Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе
0,05% BAC: Кровь содержит 0,05 г (50 мг) алкоголя на 100 мл

06 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте для очистки устройства абразивные моющие средства, растворители, бензин.
- Не допускайте попадания жидкости в окно отбора проб во время тестирования.
- Не разбирайте устройство, так как это может привести к получению неточных данных или его поломке.
- Данное устройство предназначено для содействия разумному вождению. Прибор не указывает содержание алкоголя в крови и не предназначен для медицинских или юридических целей идентификации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттэксис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-ru.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

М.П. Фирмы-продавца	
Модель изделия:	
Фирма-производитель:	
Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	
Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:	

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихийей, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.