


ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЛКОТЕСТЕРА GARIN “ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ” DAT-4

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции TM GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

Алкотестер GARIN DAT-4 - это специализированное устройство, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Основная цель его использования заключается в определении уровня алкогольного опьянения человека.

01 СХЕМА АЛКОТЕСТЕРА

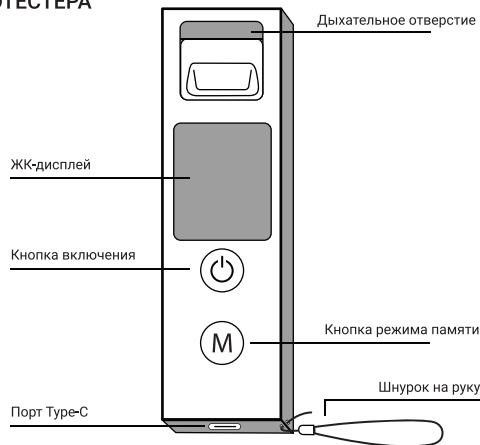

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения: 0,00-0,95 мг/л
- Точность измерения: 0,01 мг/л
- Режимы измерений: ‰BAC, mg/100mL, mg/L
- Автовыключение: 6 сек
- Питание: встроенный Li-Po аккумулятор 3,7 В 200мАч
- Память: 50 последних измерений
- Заряд: Type-C, 5 В /1 А

03 ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте крышку дыхательного отверстия и дайте выйти остаточному воздуху.
2. Нажмите на кнопку «ВКЛ». На дисплее начнется обратный отсчет «10 секунд» для предварительного нагрева.
3. Последовательно нажмите кнопку «М» для выбора режима отображения результата.
4. После завершения прогрева датчика на дисплее начнет мигать значок  и начнется обратный отсчет «10 секунд» для тестирования – равномерно выдохните в отверстие над дисплеем.
5. На дисплее отобразится результат. Индикация на дисплее отображает:
 - Зеленый – нормальный уровень алкоголя
 - Желтый – высокий уровень алкоголя
 - Красный – очень высокий уровень алкоголя
6. Для обеспечения точности мы рекомендуем проводить измерение 2–3 раза.
7. После 6 секунд бездействия алкотестер автоматически выключится. Для включения режима памяти нажмите кнопку «М». Последовательно нажимайте кнопку «М» для выбора сохраненного результата.

04 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Чтобы обеспечить точность данных, рекомендуется проводить тестирование через 20 минут после употребления алкоголя, поскольку для попадания алкоголя в кровь из органов пищеварения требуется время.
- Для получения точных результатов не повторяйте тест в течение 3 минут.
- Не курите и не принимайте пищу за 20 минут до теста.

05 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте для очистки устройства абразивные моющие средства, растворители, бензин.
- Не допускайте попадания жидкости в окно отбора проб во время тестирования.
- Не разбирайте устройство, так как это может привести к получению неточных данных или его поломке.
- Данное устройство предназначено для содействия разумному вождению. Прибор не указывает содержание алкоголя в крови и не предназначен для медицинских или юридических целей идентификации.

Сравнительная таблица концентрации алкоголя в крови / выдыхаемом воздухе						
№	BAC				BrAC	
	mg/100mL	%	‰	g/L	mg/L	-‰ ppm
01	10	0.01	0.1	0.1	0.05	25
02	20	0.02	0.2	0.2	0.10	50
03	30	0.03	0.3	0.3	0.15	75
04	40	0.04	0.4	0.4	0.20	100
05	50	0.05	0.5	0.5	0.25	125
06	60	0.06	0.6	0.6	0.30	150
07	70	0.07	0.7	0.7	0.35	175
08	80	0.08	0.8	0.8	0.40	200
09	90	0.09	0.9	0.9	0.45	225
10	100	0.10	1.0	1.0	0.50	250
11	110	0.11	1.1	1.1	0.55	275
12	120	0.12	1.2	1.2	0.60	300
13	130	0.13	1.3	1.3	0.65	325
14	140	0.14	1.4	1.4	0.70	350
15	150	0.15	1.5	1.5	0.75	375
16	160	0.16	1.6	1.6	0.80	400
17	170	0.17	1.7	1.7	0.85	425
18	180	0.18	1.8	1.8	0.90	450
19	190	0.19	1.9	1.9	0.95	475
20	200	0.20	2.0	2.0	1.00	500

BAC: Содержание алкоголя в крови
BrAC: Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе
0,05% BAC: Кровь содержит 0,05 г (50 мг) алкоголя на 100 мл

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-rl.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца	
Фирма-продавец:			
Адрес фирмы-продавца:			
Дата продажи:			
Гарантийный срок: 12 месяцев			
Подпись продавца:			

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.

2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.

3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или на уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.

4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.

5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.

6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
изделие имеет следы постороннего вмешательства;
обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:
механические повреждения;
повреждения, вызванные стихийей, пожаром, бытовыми факторами;

8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.