


Руководство по эксплуатации Ультразвуковые мойки Рок Юнит UCA 20-100

> > > > > Серия UCA < < < < < <


Модель	Частота (KHz)	Емкость (L)	Размер бака(мм)	Габариты(мм)	Мощность нагрева (W)	Ультразвуковая мощность (W)	Время(мин)	Температура(°C)
UCA 20	40	3.2	240x135x100	265x165x220	100	120	0~30	Комн. темп - 80
UCA 31	40	6.5	300x150x150	325x180x280	200	180	0~30	Комн. темп - 80
UCA 40	40	10	300x240x150	325x265x280	200	240	0~30	Комн. темп - 80
UCA 60	40	15	330x300x150	360x325x285	300	360	0~30	Комн. темп - 80
UCA 100	40	30	500x300x200	530x325x325	500	600	0~30	Комн. темп - 80

Серия UCA

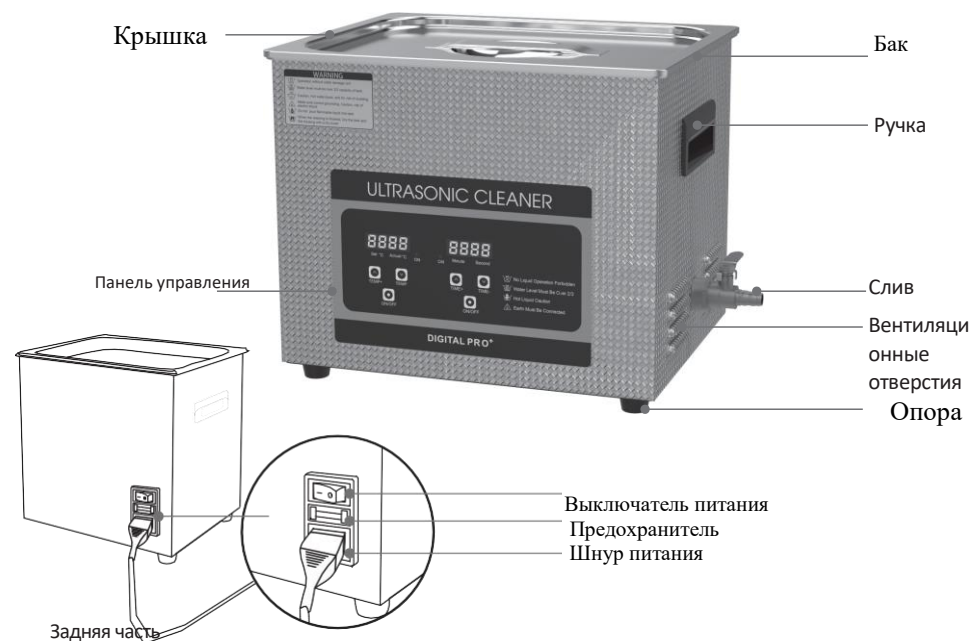


UCA 20-100:

Индикатор нагрева
Цифровой дисплей
Темп -
Темп +
Нагрев ВКЛ/ВЫКЛ

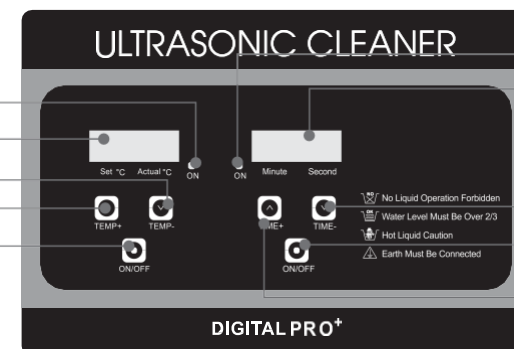

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации мойки

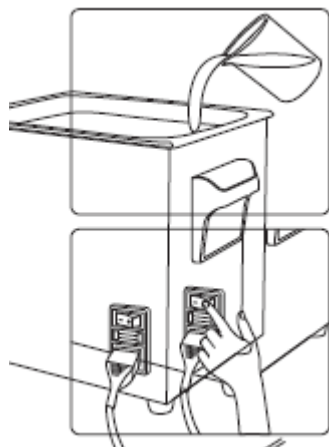

включено).

1. Добавьте очищающую жидкость

Налейте в резервуар необходимое для очистки количество моющей жидкости; при включении функции нагрева убедитесь, что уровень жидкости составляет не менее 2/3 высоты внутренней емкости. Запрещается использовать легковоспламеняющиеся жидкости (например, спирт, бензин и т. д.), так как нагрев и длительная вибрация приводят к повышению температуры жидкости — существует риск возгорания! Категорически запрещается использовать агрессивные вещества (сильные кислоты и щелочи).

2. Включите питание

Подключите мойку к розетке с заземлением. Включите питание с помощью выключателя, расположенного на задней стороне мойки («О» — выключено, «—» —

Начало ультразвуковой мойки



Серия USA

При первом включении на дисплее отображается произвольное время. Нажмите сенсорную кнопку «+» (увеличение времени), чтобы увеличить установленное значение на 1 минуту; нажмите сенсорную кнопку «-» (уменьшение времени), чтобы уменьшить его на 1 минуту. После настройки времени нажмите кнопку включения/выключения (ON/OFF): индикатор ультразвукового режима загорится красным, и

устройство начнет работу с заданными параметрами. Одновременно с этим запустится таймер обратного отсчета; по достижении значения «00:00» устройство автоматически прекратит работу.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение ультразвуковой мойки. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы избежать повреждения прибора или угрозы личной безопасности. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Перед подключением прибора к сети убедитесь, что параметры электропитания соответствуют номинальным значениям.

Внесение конструктивных изменений в прибор строго запрещено! Обратите внимание: органические растворители, а также сильные кислоты и щелочи могут повредить панель управления.

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОЙКИ

В мойке используется ультразвуковая энергия (40 кГц) в виде звуковых волн, создающих в растворе миллионы мельчайших микроскопических пузырьков. Они проникают даже в отверстия и скрытые полости, отделяя загрязнения от всех поверхностей, с которыми соприкасается раствор. Этот процесс, называемый кавитацией, повторяется тысячи раз в секунду, позволяя бережно, но тщательно удалять загрязнения с очищаемого изделия. Когда вы извлекаете предмет из мойки, он становится идеально чистым — вплоть до микроскопического уровня.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед подключением кабеля питания убедитесь, что параметры электросети соответствуют номинальным значениям. Внесение изменений в конструкцию строго запрещено! Обратите внимание: органические растворители, сильные кислоты и щелочи могут повредить панель управления.
2. Перед запуском убедитесь в надежности заземления.
3. Перед запуском убедитесь, что выключатель питания находится в положении «О» (выключено).
4. Не включайте прибор, если резервуар пуст — это приведет к повреждению ультразвукового генератора. При использовании функции нагрева уровень жидкости должен составлять не менее 2/3 объема резервуара.
5. Закрывайте крышку для снижения уровня шума; при открытии крышки соблюдайте осторожность, чтобы избежать ожогов паром или горячей водой.
6. Не перемещайте прибор, если в резервуаре находится жидкость (во избежание ее проливания).
7. Выбирайте размер и тип корзины в соответствии с характеристиками очищаемых предметов.
8. Для ультразвуковой очистки рекомендуется использовать водорастворимые моющие средства; добавляйте необходимое количество средства в резервуар в зависимости от задач очистки. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (например, спирт, бензин и т. д.), так как нагрев и длительная вибрация могут привести к повышению температуры жидкости, что создает риск возгорания.
9. Не используйте прибор в неблагоприятных условиях: в местах с резкими перепадами температур; в местах с высокой влажностью и риском образования конденсата; в местах с сильной вибрацией или ударными нагрузками; в среде, содержащей коррозионно-активные газы или пыль; в местах, где возможны брызги воды, масла или химикатов; в помещениях, где присутствуют взрывоопасные или легковоспламеняющиеся газы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте электрические компоненты от пыли с помощью струи сжатого воздуха. Очищайте резервуар не реже одного раза в неделю.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№	Проблема	Возможные причины	Решения	Замечания
1	Нет ультразвука	А. Источник питания не подключен В. Сгорел предохранитель С. Короткое замыкание кабеля D. Короткое замыкание преобразователя Е. Печатная плата повреждена F. Другие причины	А. Проверьте и подключите питание В. Проверьте установленный источник питания и замените предохранитель С. Подсоедините установленный кабель или замените на новый D. Обратитесь к нашему инженеру по послепродажному обслуживанию Е. Проверьте сломанную деталь и замените ее F. Обратитесь к нашему инженеру по послепродажному обслуживанию	
2	Сбой контроля времени	А. Неисправность таймера В. Другие причины	А. Замените таймер или цифровую панель управления В. Обратитесь к нашему инженеру по послепродажному обслуживанию	
3	Нет нагрева	А. Неисправен выключатель питания нагревателя В. Сгорел предохранитель С. Перегорел нагревательный элемент D. Плата цифрового дисплея вышла из строя Е. Неправильная настройка температуры F. Другие причины	А. Проверьте вилку нагревателя и правильно ли она подключена. проверьте выходную линию мультиметром: если все в порядке, значение сопротивления составляет несколько сотен Ом. В. Замените предохранитель С. Замените неисправную элемент D. Проверьте сломанную деталь и замените ее Е. Перед включением обогрева установленная температура должна быть на 3 °C выше фактической. Пожалуйста, сбросьте температуру. F. Обратитесь к нашему инженеру по послепродажному обслуживанию	Предположение 50-60 °C
4	Сбой контроля температуры	А. Ослабление терморегулятора В. Сломана трубка термостата С. Цифровой дисплей вышел из-под контроля D. Другие причины	А. Закрепите коллектор термостата. В. Замените термостат. С. Проверьте сломанную деталь и замените ее. D. Обратитесь к нашему инженеру по техническому обслуживанию	
5	Плохая очистка	А. Слишком высокий, слишком низкий уровень жидкости В. Слишком высокая, слишком низкая температура С. Неподходящая чистящая жидкость D. Другие причины	А. Обеспечьте оптимальный уровень жидкости В. Отрегулируйте температуру до наиболее подходящей С. Остановите и выключите источник питания, замените подходящую жидкость после того, как предыдущая жидкость остынет D. Обратитесь к нашему специалисту по техническому обслуживанию	Предложено не 50-60 °C
6	Электрическая утечка	А. Провод заземления оборудования подключен неправильно. В. Внутренняя линия или нейтральная линия оборудования обрывается	А. Проверьте, подключены ли внутренний провод заземления и кабель питания устройства. В. Проверьте, не отвалился ли внутренний провод или нейтральный провод аппарата.	
7	Лом	Не подлежит ремонту или выбрасыванию	В соответствии с законами для списанного медицинского оборудования	
8	Другие проблемы		Обратитесь к инженеру по техническому обслуживанию	

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 <p>Не работайте при пустом баке</p>	 <p>Не используйте легковоспламеняющийся раствор</p>	 <p>Пожалуйста, используйте провод заземления правильно</p>	 <p>При утилизации данного изделия обратитесь внимание на загрязнение окружающей среды.</p>
---	---	--	--

Контакты Компания Адрес

Тел.
Веб.
Почта

ООО Рок Юнит
107023, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское,
ул.Малая Семеновская, д.9, стр.3
+7 495 943-11-55
www.rock-unit.ru
info@rock-unit.ru