



# ДЕЗАР-КРОНТ

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ  
"ДЕЗАР-КРОНТ". Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4142.



"ДЕЗАР-КРОНТ"-802 (801)  
(в настенном исполнении)



"ДЕЗАР-КРОНТ"-802п (801п)  
(в передвижном исполнении)

Бактерицидная  
эффективность:  
до **99,9%**


Производительность:  
**80** м<sup>3</sup>/ч



Бактерицидные лампы прошли  
испытания на бактерицидную  
эффективность в лаборатории  
НИИИС имени А.Н. Лодыгина.

- Счетчик наработки часов бактерицидных ламп
- Фильтрация и очистка воздушного потока
- II класс электробезопасности

АО «КРОНТ-М»

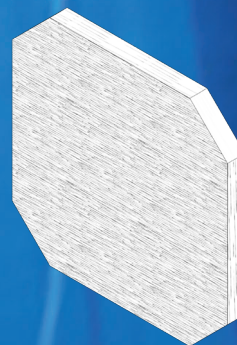

Фильтр воздушный сменный ФВС «КРОНТ» или  
Фильтр воздушный угольный сменный ФУС «КРОНТ»

Телефон: +7 495 500-48-84, Email: [info@kront.com](mailto:info@kront.com), Интернет: [kront.com](http://kront.com)

**Технические характеристики**  
**«Облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных «ДЕЗАР-КРОНТ»**

| Исполнение                                                            | настенный                                                                                                                                                                                                                                                             | «ДЕЗАР-КРОНТ»-801  | «ДЕЗАР-КРОНТ»-802         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                       | передвижной                                                                                                                                                                                                                                                           | «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п | «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п        |
| Применение                                                            | Помещения III - V категории                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Помещения I - V категории |
| Производительность                                                    | 80 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                           |
| Бактерицидная эффективность                                           | 95,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 99,9 %                    |
| Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа) | 25 Вт - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 25 Вт - 2 шт.             |
| Срок службы у/ф ламп                                                  | 8000 часов                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |
| Длина волны у/ф излучения                                             | 253,7 нм                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                           |
| Фиксация отработанного времени бактерицидных ламп                     | Цифровой четырехразрядный счетчик часов, обнуление при замене ламп                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |
| Электробезопасность                                                   | Соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки.                                                         |                    |                           |
| Материал корпуса                                                      | Ударопрочный химическистойкий пластик                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                           |
| Защита от ультрафиолетового излучения                                 | Светозащитные перегородки, исключающие выход наружу у/ф излучения, как прямого так и отраженного                                                                                                                                                                      |                    |                           |
| Дезинфекция наружных поверхностей                                     | Любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами                                                                                                                                                                                                        |                    |                           |
| Фильтрация и очистка воздушного потока                                | Оседающая пыль, пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, пары дезинфицирующих и стерилизующих средств, пары кислот и щелочей, оксиды азота и др., а также органические вещества основной и кислотной природы (аэрозоли, анестезирующие газы, антибиотики и др.). |                    |                           |
| Напряжение сети                                                       | 220 В                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                           |
| Потребляемая мощность (не более)                                      | 50 ВА                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 88 ВА                     |
| Звуковая мощность (уровень шума)                                      | до 45 дБА                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |
| Габаритные размеры (не более)                                         | 700х230х100 мм<br>835х450х485 мм                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           |

| МОДЕЛЬ          | Категория помещений | Бактерицидная эффективность <sup>1</sup> | Типы помещений                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>802/802п</b> | <b>I</b>            | <b>99,9%</b>                             | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.                                                                             |
|                 | <b>II</b>           | <b>99,0%</b>                             | Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови.    |
| <b>801/801п</b> | <b>III</b>          | <b>95,0%</b>                             | Палаты, кабинеты и прочие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории). Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей. |

<sup>1</sup> Норма бактерицидной эффективности в отношении *S.aureus* (санитарно-показательный микроорганизм).